



# Be Brilliant<sup>\* TM</sup>

EarWear 3.0 : les solutions d'adaptation 3.0


\* Révélez-vous.



## Les solutions d'adaptation 3.0

# Notre nouvelle offre de miniEcouleurs 3.0

- Compatibles avec plus de formes de conduits
- Design plus discret
- Connectique 25% plus petite
- Meilleure rétention dans le conduit
- Manipulation simplifiée

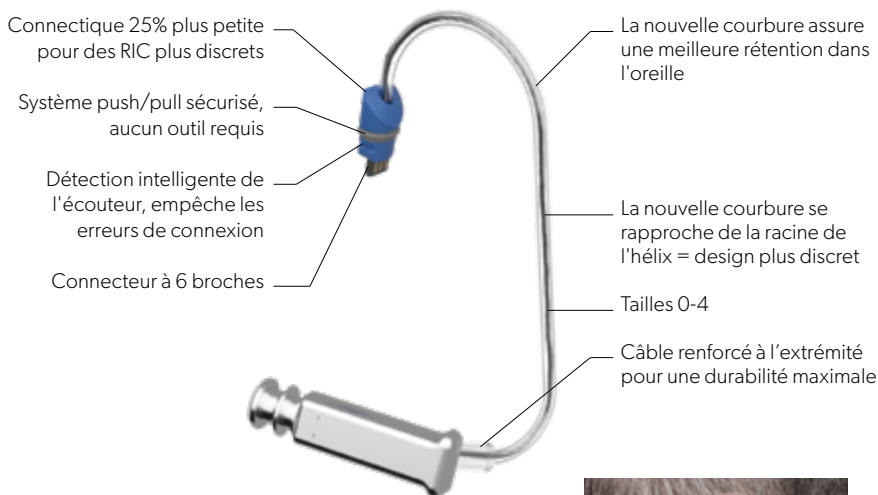

miniEcouleur 3.0 : l'écouteur épouse plus naturellement les contours de l'oreille pour plus de discrétion



### Convient à plus de conduits

Des dômes plus souples et des écouteurs plus petits permettant une insertion plus profonde avec un confort élevé, même dans les petits conduits auditifs. Ceci **augmente grandement le taux d'adaptation morphologique**.

### Design discret et attrayant

La courbure améliorée du câble et un meilleur positionnement dans le conduit, offrent un **ensemble plus discret**. Chaque écouteur est disponible dans les longueurs de 0 à 4.

### Meilleure rétention dans le conduit

La nouvelle courbure du câble stabilise mieux l'écouteur. Elle évite toute migration latérale et améliore le couplage acoustique. Il est donc maintenant possible de **s'affranchir des fouets de maintien !**

### Nouveaux Eartips (Dômes) et nouveaux Sleeves (Dômes manchon)

Compatibles avec les miniEcouleurs 3.0 et ThinTubes 3.0 avec **manipulation simplifiée** (par rapport aux dômes cliquables 2.0).

Un nouveau Sleeve nommé « Power » s'ajoute à la gamme pour garantir un couplage acoustique optimal même pour les pertes auditives sévères.

### Pour des aides auditives plus petites


La nouvelle **connectique 25% plus petite** permet de créer des aides auditives toujours plus discrètes.

Performances miniEcouleur 3.0	S		M		P		SP	
	Coupleur 2CC	Simulateur d'oreille	Coupleur 2CC	Simulateur d'oreille	Coupleur 2CC	Simulateur d'oreille	Coupleur 2CC	Simulateur d'oreille
OSPL 90 (Valeur de crête)	110 dB SPL	120 dB SPL	119 dB SPL	129 dB SPL	122 dB SPL	131 dB SPL	130 dB SPL	138 dB SPL
50 dB SPL	46 dB	57 dB	60 dB	70 dB	65 dB	75 dB	75 dB	83 dB

## Les solutions d'adaptation 3.0

# Notre nouvelle offre de ThinTubes 3.0


Grâce à leurs nouvelles formes identiques, les nouveaux miniEcouleurs 3.0 et ThinTube 3.0 utilisent les mêmes embouts et dômes pour une simplicité d'utilisation maximale

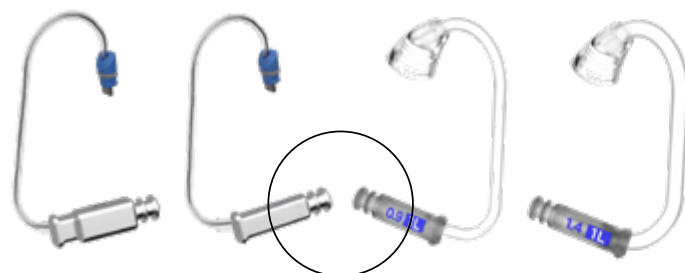

miniEcouleurs 3.0 (à gauche) et ThinTubes 3.0 (à droite) partagent la même embase


Les deux options (0,9mm et 1,4mm) de ThinTube 3.0 offrent les mêmes avantages que le miniEcouleur 3.0 : une **meilleure rétention**, un **meilleur confort**, une meilleure **facilité d'utilisation** et correspondent à **plus de morphologies** d'oreilles.

Le nouveau ThinTube 3.0 de 1,4 mm délivre **plus de puissance** que le tube fin classique de 0,9 mm tout en étant très discret et esthétique.

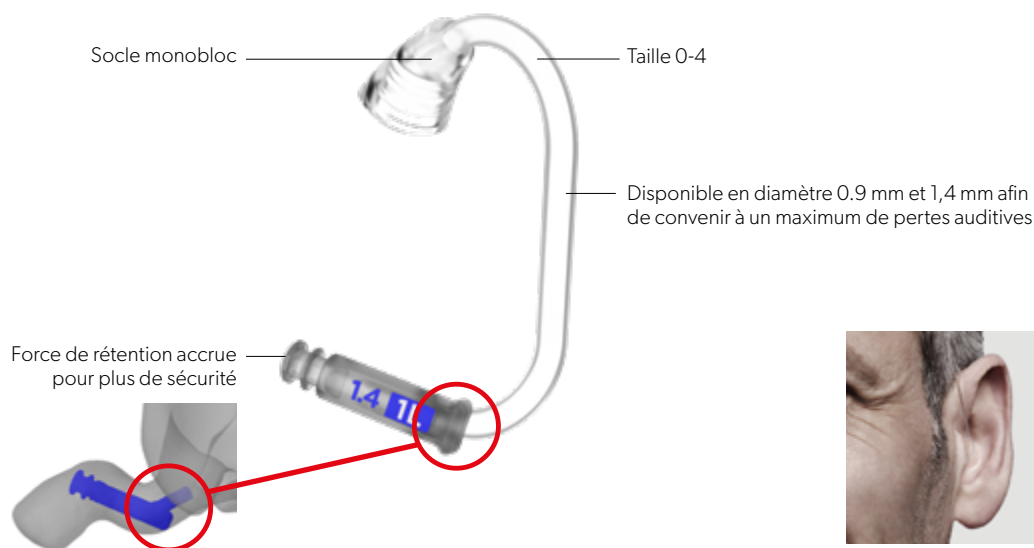

### Rétention

La nouvelle courbure du tube sur sa partie externe stabilise mieux l'écouteur. Elle évite toute migration latérale et améliore le couplage acoustique. Il est donc maintenant possible de s'affranchir d'un fouet de maintien !

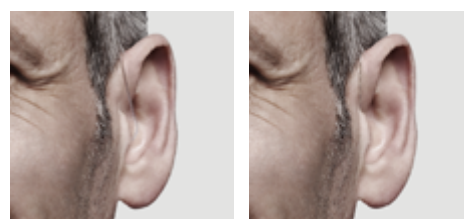

miniEcouleur 2.0

miniEcouleur 3.0

### Design

La nouvelle courbure du tube ainsi que son meilleur positionnement, permettent une plus grande discrétion sur l'oreille. De plus, la nouvelle connectique 25% plus petite, permet de concevoir des aides auditives plus petites et plus discrètes.


## Les solutions d'adaptation 3.0

# Nouvelle gamme de dômes polyvalente


Compatibles avec la grande majorité des morphologies et des besoins acoustiques

Les dômes souples permettent une insertion profonde avec un grand confort de port, même dans les petits conduits auditifs


Pour plus de simplicité d'utilisation tous nos nouveaux dômes sont compatibles avec l'intégralité des solutions d'adaptation (miniEcouteurs 3.0 ou ThinTubes 3.0).

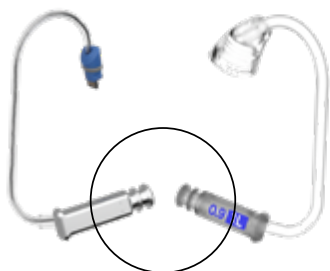

miniEcouteurs 3.0 (à gauche) et ThinTubes 3.0 (à droite) partagent la même embase

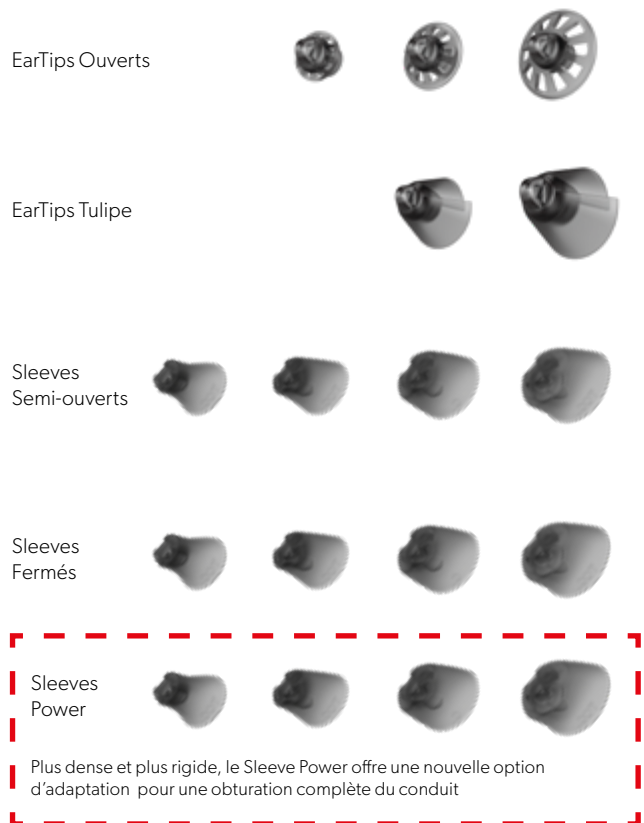


Sleeves Power  
Plus dense et plus rigide, le Sleeve Power offre une nouvelle option d'adaptation pour une obturation complète du conduit

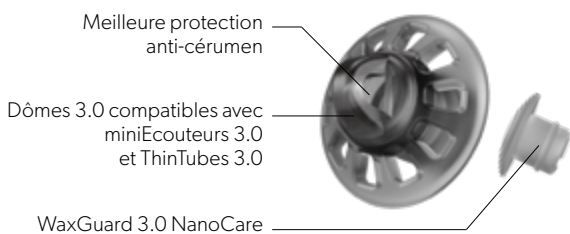

Meilleure protection anti-cérumen

Dômes 3.0 compatibles avec miniEcouteurs 3.0 et ThinTubes 3.0

WaxGuard 3.0 NanoCare

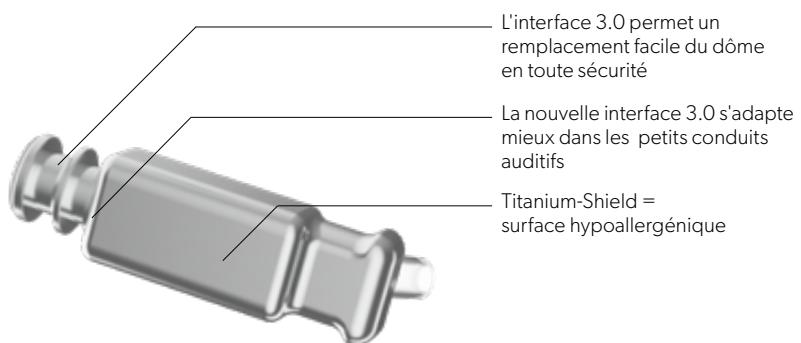

L'interface 3.0 permet un remplacement facile du dôme en toute sécurité

La nouvelle interface 3.0 s'adapte mieux dans les petits conduits auditifs

Titanium-Shield = surface hypoallergénique

## Les solutions d'adaptation 3.0

# Compatibilité des accessoires d'adaptation (3.0 et 2.0)

Tableau de compatibilité des produits Signia avec les différentes solutions d'adaptation 3.0 et 2.0

	ThinTube 3.0	miniEcouteur 3.0	EarTips/ Sleeves 3.0	Embouts sur-mesure 3.0	ThinTube	Life-Tips	Embouts Life	miniEcouteur 2.0	Click Domes & Click Sleeves	Embout sur-mesure 2.0
Pure AX	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Motion X <sup>1</sup>	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Pure X	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Styletto X	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Silk X	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Pure Nx	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Styletto Nx	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Motion Nx	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Silk Nx	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-

<sup>1</sup> Attention! Les appareils Motion SP X ne sont pas adaptables en ThinTube

Référence	Pièces	Nom	Référence	Pièces	Nom	Référence	Pièces	Nom
10992855	6	Sleeve 3.0 Vented XS TBLK	10992548	1	miniReceiver 3.0 OR S	10992569	1	miniReceiver 3.0 OR P
10992856	6	Sleeve 3.0 Vented S TBLK	10992549	1	miniReceiver 3.0 OL S	10992570	1	miniReceiver 3.0 OL P
10992857	6	Sleeve 3.0 Vented M TBLK	10992550	1	miniReceiver 3.0 IR S	10992571	1	miniReceiver 3.0 IR P
10992858	6	Sleeve 3.0 Vented L TBLK	10992552	1	miniReceiver 3.0 1L S	10992572	1	miniReceiver 3.0 1L P
10992859	6	Sleeve 3.0 Closed XS TBLK	10992553	1	miniReceiver 3.0 2R S	10992573	1	miniReceiver 3.0 2R P
10992860	6	Sleeve 3.0 Closed S TBLK	10992554	1	miniReceiver 3.0 2L S	10992574	1	miniReceiver 3.0 2L P
10992861	6	Sleeve 3.0 Closed M TBLK	10992555	1	miniReceiver 3.0 3R S	10992575	1	miniReceiver 3.0 3R P
10992862	6	Sleeve 3.0 Closed L TBLK	10992556	1	miniReceiver 3.0 3R S	10992576	1	miniReceiver 3.0 3L P
10997196	6	Sleeve 3.0 Power XS Signia	10992557	1	miniReceiver 3.0 4R S	10992577	1	miniReceiver 3.0 4R P
10997197	6	Sleeve 3.0 Power S Signia	10992558	1	miniReceiver 3.0 4R S	10992578	1	miniReceiver 3.0 4L P
10997198	6	Sleeve 3.0 Power M Signia	10992559	1	miniReceiver 3.0 OR M	10991609	2	ThinTube 3.0 S0 (0,9mm)
10997199	6	Sleeve 3.0 Power L Signia	10992560	1	miniReceiver 3.0 OL M	10991610	2	ThinTube 3.0 S1 (0,9mm)
10993696	6	EarTip 3.0 5mm Open Signia	10992561	1	miniReceiver 3.0 1R M	10991611	2	ThinTube 3.0 S2 (0,9mm)
10993697	6	EarTip 3.0 7mm Open Signia	10992562	1	miniReceiver 3.0 1L M	10991612	2	ThinTube 3.0 S3 (0,9mm)
10993698	6	EarTip 3.0 10mm Open Signia	10992563	1	miniReceiver 3.0 2R M	10991613	2	ThinTube 3.0 S4 (0,9mm)
10993699	6	EarTip 3.0 8mm Tulip Signia	10992564	1	miniReceiver 3.0 2L M	10992492	2	ThinTube 3.0 S0 P (1,4mm)
10993700	6	EarTip 3.0 12mm Tulip Signia	10992565	1	miniReceiver 3.0 3R M	10992493	2	ThinTube 3.0 S1 P (1,4mm)
			10992566	1	miniReceiver 3.0 3L M	10992494	2	ThinTube 3.0 S2 P (1,4mm)
			10992567	1	miniReceiver 3.0 4R M	10992495	2	ThinTube 3.0 S3 P (1,4mm)
			10992568	1	miniReceiver 3.0 4L M	10992496	2	ThinTube 3.0 S4 P (1,4mm)
						10984033	1	Outil extraction Embout 3.0
						10994214	1	Outil insertion Earwear 3.0
						10991403	1	Gabarit Earwear 3.0
						10993607	8	Parcerumen Nanocare 3.0
						10993677	10	Fouet de maintien Earwear 3.0



Gabarit de mesure Earwear 3.0



## Manipulation des solutions d'adaptation 3.0


### → Connectiques 3.0




### → Connexion et retrait du miniEcouteur 3.0




### → EarTip 3.0 et Sleeve 3.0

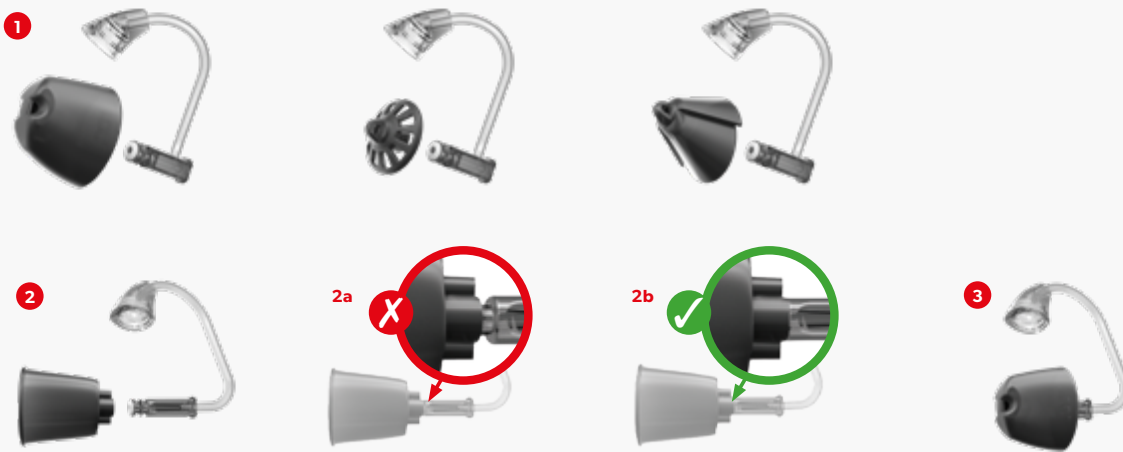


### → Fouet de maintien 3.0

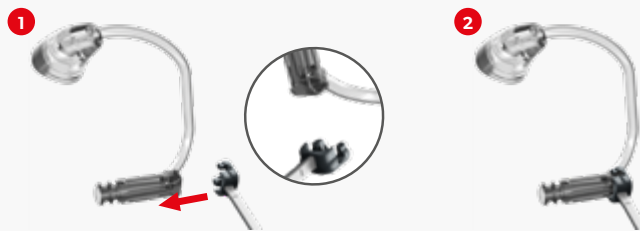


### → Changer le pare-cérumen 3.0

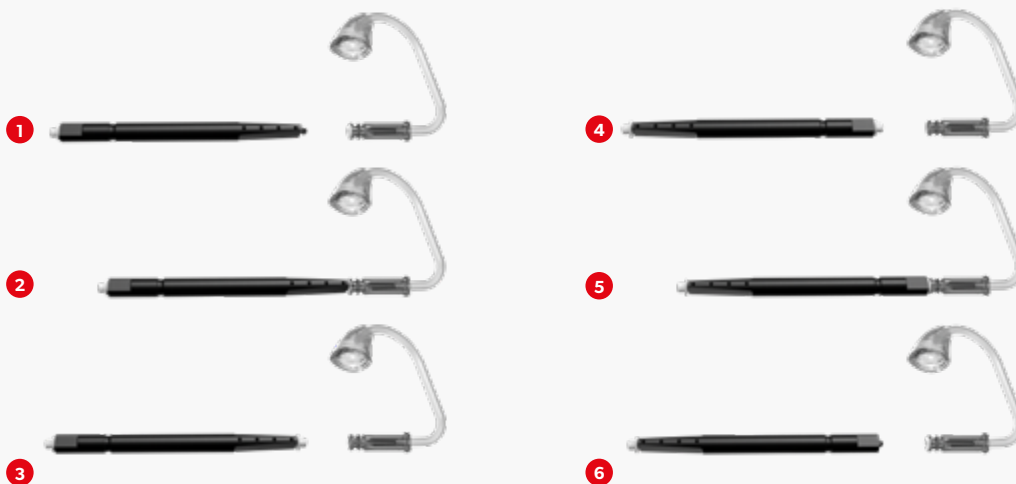

➔ Changer un embout sur-mesure court 3.0

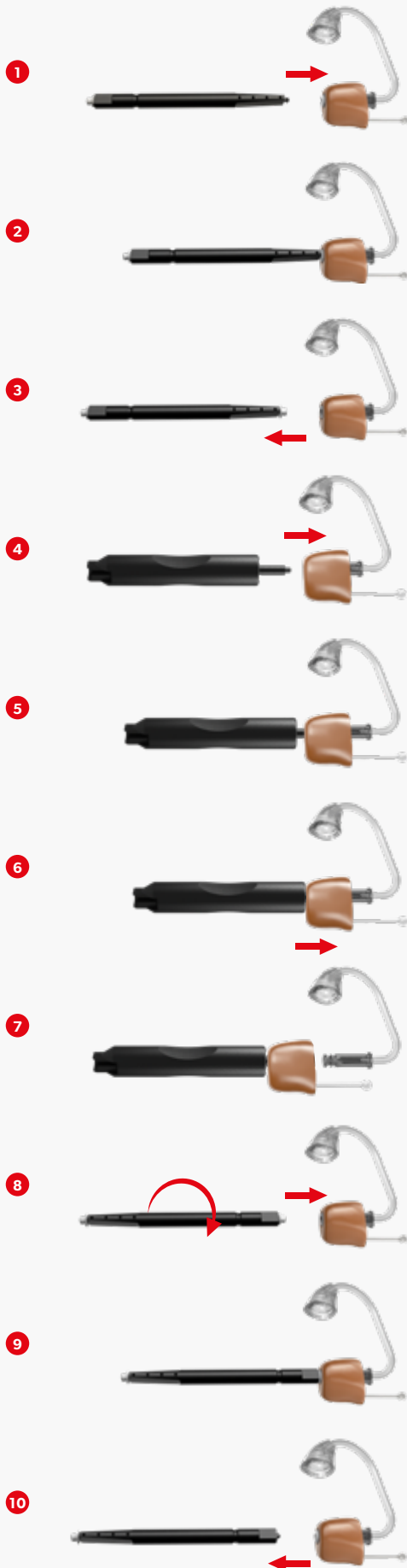

➔ Changer un embout sur-mesure long 3.0

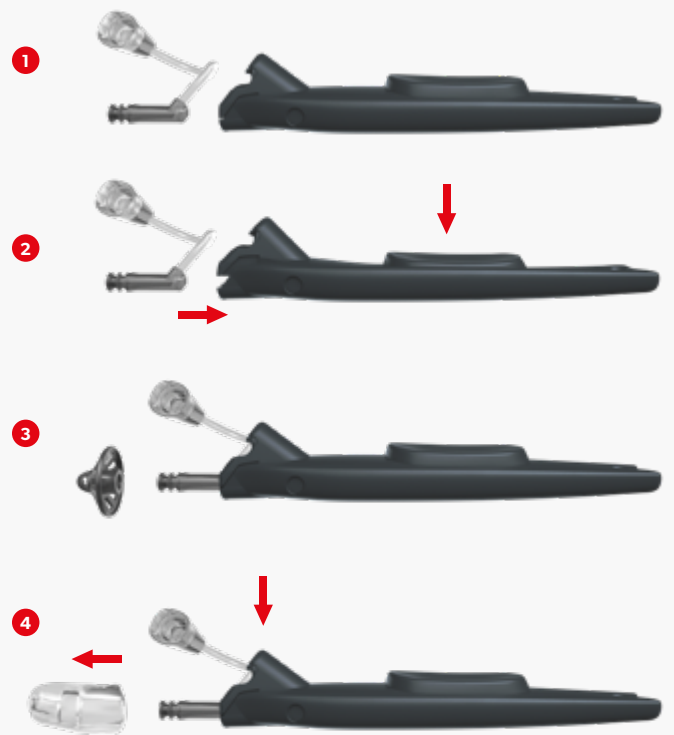

➔ Fixer le ThinTube 3.0



➔ Retirer le ThinTube 3.0



## À propos de Signia

Marque premium du groupe WSA, Signia, synonyme d'innovation par excellence, offre des produits à la pointe de la technologie, disruptifs repoussant les limites pour permettre à chacun de retrouver le plaisir d'entendre. Signia déstigmatise le port des appareils auditifs grâce à un design épuré, des appareils connectés et rechargeables. Nous refusons d'accepter la perte auditive comme une limitation, nous souhaitons motiver les utilisateurs et leur donner les moyens d'agir. Nous portons l'épanouissement personnel au plus haut de nos ambitions : « Be Brilliant » sans limite du regard des autres ou de soi-même.

## En savoir plus sur [signia-pro.com](https://signia-pro.com)

Les informations contenues dans ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne doivent pas toujours être présentes dans des cas individuels et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

### Fabricant légal

WSAUD A/S  
Nymøllevej 6  
3540 Lyngø  
Denmark

### Distributeur local

Signia SAS  
CS 70025  
175 boulevard Anatole France  
93285 Saint-Denis Cedex  
France

09/2021 | 10242775  
©WSAUD A/S 2021

### Retrouvez-nous sur



[signia-pro.com](https://signia-pro.com)



[www.facebook.com/SigniaFrance/](https://www.facebook.com/SigniaFrance/)



[youtube.com/signiahearing](https://youtube.com/signiahearing)



<https://www.linkedin.com/company/signia-hearing/>