



signia


Life sounds brilliant.

Inσιο ITC/ITE Nx

Les nouveaux intra-auriculaires avec connectivité Bluetooth pour une expérience unique !



Bluetooth®

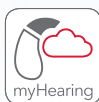

Accessoires / Applications



Applications touchControl™ et myControl™



miniPocket™



StreamLine™ Mic



StreamLine™ TV



CARACTÉRISTIQUES 7/5/3 Nx

- La plus grande connectivité grâce au **Bluetooth Low Energy*** : streaming direct en stéréo dans les aides auditives
- **Streaming direct de la télévision avec StreamLine TV**
- **Streaming audio direct iOS** et depuis les **smartphones Android** et tous les **périphériques Bluetooth** avec **StreamLine Mic**
- **Nouvelle faceplate** avec **antenne Bluetooth** et bouton poussoir intégrés
- **Super Focus : double micro pour une meilleure intelligibilité** grâce à une focalisation de la directivité sur l'interlocuteur

- **e2e Ultra HD** (synchronisation binaurale en continu) pour des **performances audiologiques inégalées**
- **Dynamique étendue pour une qualité sonore optimale à fort niveau d'entrée**
- **Anti-Larsen ultra performant** et **amélioration de la qualité sonore des sons environnants** pour une expérience auditive naturelle, même avec un casque sur la tête ou un téléphone collé à l'oreille



- Intra-auriculaires pile 312 pour pertes auditives légères à sévères
- **Protection microphonique MF1** interchangeable : barrière contre le vent, l'humidité, les saletés
- **CROSPhone**, pour une écoute du **téléphone dans les 2 oreilles****
- **CROS/BiCROS** : captation microphonique sans fil du côté cophotique avec CROS Pure 312Nx
- **Contrôle des aides auditives sans aucun relais intermédiaire** via applications myControl et touchControl ou via télécommande miniPocket
- **Réglages affinés à distance et accompagnement sur mesure** via l'application myHearing (TeleCare 3.0)
- 5 coloris de faceplates : beige, tan, moka, marron, chocolat

Valeurs (NS/G)	Coupleur 2 CC	113/50 dB***	118/55 dB	124/65 dB
----------------	---------------	--------------	-----------	-----------

Autonomie : pile 312 standard : environ 70h selon page d'application

* Basse consommation

** CROSPhone activable via bouton poussoir, application touchControl ou télécommande miniPocket (le téléphone doit être proche d'une des 2 aides auditives)

*** Inσιο ITC uniquement

Exclusivité mondiale !
Intras Bluetooth

Solutions Auditives
SIEMENS

signia-pro.fr








Insignia ITC/ITE Nx

Les nouveaux intra-auriculaires avec connectivité Bluetooth pour une expérience unique !

Plages d'adaptation

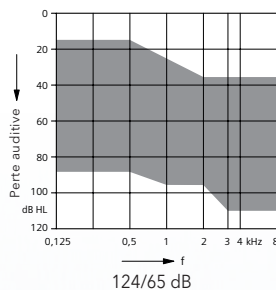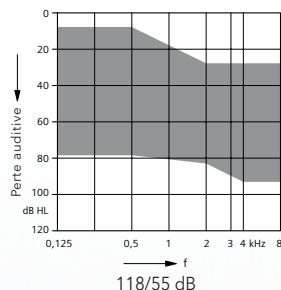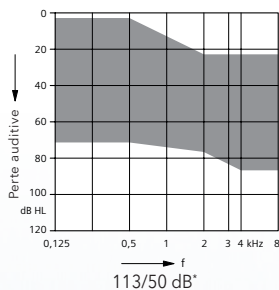

TECHNOLOGIE Nx

7Nx

5Nx

3Nx

SPÉCIFICITÉS Nx

e2e Ultra HD : synchronisation binaurale en continu pour des performances audiologiques inégalées	●	●	●
HD Spatial : reproduction précise du mode naturel de localisation des sons grâce aux algorithmes de détection spatiale HD	●	●	●
Classification 3D : basée sur une triple détection - acoustique, du mouvement, de la propre voix - pour une meilleure qualité sonore	— — — — —	— — — — —	— — —

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES

Canaux de traitement de signal / curseurs de réglage de gain et de compression : plus grande précision d'analyse et de traitement de signal	48/20	32/16	24/12
Bande passante élargie à 12 kHz : restitution plus naturelle de la parole et de l'environnement sonore	●		
HD Music : programmes d'écoute spécifiques à la musique	3	1	
EchoShield : programme d'écoute spécifique aux situations réverbérantes	●		
Émergence directionnelle de parole (EDP) / pas de réglage : réduit les voix gênantes	48/3	32/1	
eWindScreen : réduction de la gêne liée au vent	●	●	●
Spatial SpeechFocus : la directivité suit la parole (activé automatiquement en voiture)	●	●**	
SpeechFocus : la directivité suit la parole (activé automatiquement en voiture)	●	●	●
Super Focus : focalisation de la directivité sur l'interlocuteur face au patient / efficacité	●	●	
Compression fréquentielle : meilleure intelligibilité si pertes sévères-profondes dans les HF	●	●	●
Spatial Configurator : contrôle de la directivité (focalisation & direction) en situation sonore « ambigüe »	● AV - AR / D - G	● AV - AR / D - G	
Volume de streaming adaptatif : conserve l'émergence du signal sur les bruits fluctuants	●	●	●
Générateur de bruit anti-acouphène & amplification encochée (TIL)	●	●	●

APPLICATIONS

Compatibilité avec les applications gratuites touchControl et myControl	●	●	●
Application myHearing/TeleCare 3.0 : outil révolutionnaire de suivi à distance des patients, augmentation des réussites d'appareillages	●	●	●

* Insignia ITC uniquement ** Dans le programme Promenade ou avec le Spatial Configurator uniquement

LOGICIEL

Insignia ITC/ITE Nx se programment à l'aide du nouveau logiciel **Connexx™ 8.5.10** (et versions suivantes), téléchargeable via **Update Manager**. Connexion sans fil avec NoahLink Wireless ou filaire avec NoahLink ou HiPro.



TARIFS

Insignia ITC/ITE 7Nx (48/20 canaux)	Gamme PLATINE	1159 € HT
Insignia ITC/ITE 5Nx (32/16 canaux)	Gamme OR	989 € HT
Insignia ITC/ITE 3Nx (24/12 canaux)	Gamme OR	849 € HT

Pour commander - Sur notre site de commande en ligne : ebusiness.sivantos.com/fra/fr
Par mail : commande.audio.fr@sivantos.com ; Par téléphone : **01 49 33 15 15 - choix 1.**

Pour plus d'informations, contactez votre **responsable commercial** ou notre **hotline technique** au **01 49 33 15 15 - choix 3.**