




# Silk™ primax


Intra CIC-RIC.

## CARACTÉRISTIQUES


Silk, concept exclusif d'intra-auriculaire modulaire, pile 10, extrêmement miniaturisé.

### L'appareil hybride CIC-RIC

- Ultra confortable et extrêmement discret.
- Essais faciles et adaptations immédiates.
- Tenue optimale dans le conduit auditif avec un dôme manchon coudé en silicone souple.
- 3 tailles de dômes manchons (S, M, L) pour convenir au maximum d'anatomie d'oreille, évent ouvert ou fermé (de décompression).
- Connexion boule à trois axes de rotation pour une plus grande flexibilité.
- Technologie primax : SpeechMaster, HD Music, EchoShield, CROS/BiCROS.
- Directivité binaurale OneMic.
- e2e wireless™ 3.0, Bluetooth® - technologie sans fil , compatible avec le nouveau TV Transmitter, la nouvelle miniPocket, easyTek, easyPocket et applications easyTek, touchControl.
- Compatible avec transmetteur CROS Pure.
- Coque :  
Transparente rouge / bleue  
Taille unique miniaturisée à l'extrême  
Faceplate moka.
- Entretien simplifié : nettoyage et remplacement des dômes.
- Stockage facile, comme un contour d'oreille.

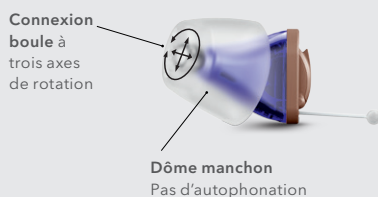

### Plage d'adaptation

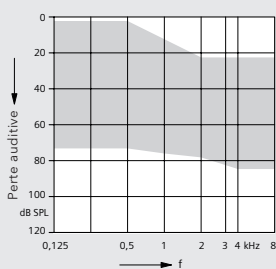

Silk 7px, 5px, 3px

Niveau de sortie/gain : 113/50 dB

Innovation  
2017

Solutions  
Auditives

SIEMENS





# Silk primax

Intra CIC-RIC.

## CIRCUIT

### Caractéristiques primax

	7px	5px	3px
Canaux de traitement de signal / curseurs de réglage de gain et de compression : plus grande précision d'analyse et de traitement de signal	48/20	32/16	24/12
Bande passante élargie à 12 kHz : restitution plus naturelle de la parole et de l'environnement sonore	●		
primax fit : formule de pré-réglage assurant sonorité naturelle, acceptation spontanée, équilibre binaural et efficacité sur le long terme	●	●	●
SpeechMaster : facilité d'écoute dans tous les milieux	●	●	●
HD Music : programmes d'écoute spécifiques à la musique	3	1	1
EchoShield : programme d'écoute spécifique aux situations réverbérantes	●		
CROS/BiCROS : captation microphonique sans fil du côté cophotique (avec CROS Pure)	●	●	●
Émergence directionnelle de parole (EDP) / pas de réglage : réduit les voix gênantes	48/3	32/1	
Égaliseur automatique : une courbe de réponse par situation acoustique dans le programme universel	● 6 situations	● 3 situations	
eWindScreen : réduction de la gêne liée au vent	●	●	●
Compression fréquentielle : meilleure intelligibilité si pertes dans les HF	●	●	●
Compatibilité avec les applications gratuites : easyTek & touchControl	●	●	●
Volume de streaming adaptatif : conserve l'émergence du signal sur les bruits fluctuants	●		
Deux méthodologies anti acouphènes, bruiteur & amplification encochée : soulage le patient	●	●	●

## LOGICIEL



Silk se programme à l'aide du nouveau logiciel Connexx™ 8.2.10 (et les versions suivantes), téléchargeable via Update Manager.

## TARIFS & INFORMATIONS

**Silk 7px** (48/20 canaux) (droit : Réf. 10940343 - gauche : Réf. 10940342)  
**Silk 5px** (32/16 canaux) (droit : Réf. 10938517 - gauche : Réf. 10938579)  
**Silk 3px** (24/12 canaux) (droit : Réf. 10938572 - gauche : Réf. 10938580)  
**Dôme manchon** (plaquette de 6)

Gamme PLATINE **1109,00 € HT**  
Gamme OR **939,00 € HT**  
Gamme OR **799,00 € HT**  
**9,90 € HT**

### Pour commander

Par mail : [commande.audio.fr@sivantos.com](mailto:commande.audio.fr@sivantos.com) ; Sur notre site de commande en ligne : [ebusiness.sivantos.com/fra/fr](http://ebusiness.sivantos.com/fra/fr)  
Par téléphone : **01 49 33 15 15 - choix 1.**

### Pour plus d'informations

Contactez votre **responsable commercial** ou notre **hotline technique** au **01 49 33 15 15 - choix 3.**