


MOTION X

Courbes de réponses comparatives

Même si les qualités intrinsèques du RIC lui ont offert une place dominante, **l'appareillage en BTE garde tout son intérêt**. Il demeure incontournable pour les patients ayant des **conduits étroits, coudés, ou produisant beaucoup de cérumen**. Aussi pour les patients qui, ayant une **dextérité réduite**, mettent en place et entretiennent plus facilement les BTE. Enfin pour les **perdes les plus importantes**, les BTE offrent une réserve de puissance inégalée. Nous proposons donc pour répondre à ces besoins une **gamme de contours complète et homogène**, équipée de notre toute dernière puce Xperience.

Notre nouvelle famille Motion se décline en **trois modèles rechargeables**, Charge&Go - Charge&Go P - Charge&Go SP, respectivement équivalents en puissance et en gabarit aux modèles en pile 312, 13 et 675. Ce qui vous permet de couvrir l'ensemble des pertes auditives, de légères à profondes.


Motion C&Go X offre autant de gain aigu que Motion C&Go Nx pour un gabarit nettement plus discret. Il est donc parfaitement adapté aux pertes presbycousiques légères à moyennes et aux pertes dites en « pente de ski ». Il est une parfaite alternative au Pure C&Go X, pour un gabarit similaire.

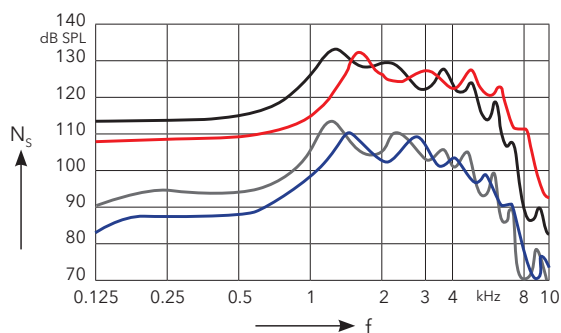

Comparatif au coupleur 2cc des courbes de Motion C&Go X (rouge & bleu) vs Motion C&Go Nx (noir & gris).



C'est le **plus petit BTE rechargeable Li-ion**, de dimensions équivalentes au contour 312 Life, appareil plébiscité en son temps.

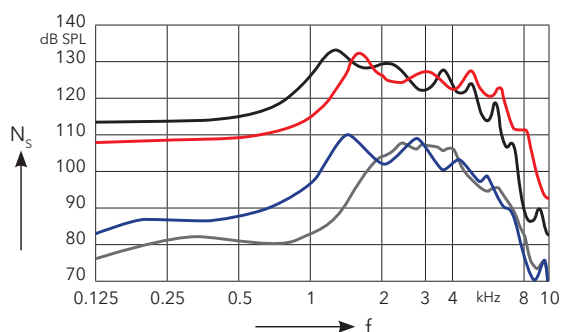


Comparatif au coupleur 2cc des courbes de Motion C&Go X (rouge & bleu) vs Life (noir & gris).



Avec plus de gain grave & medium, et plus d'émergence des aigus dans le bruit, Motion C&Go X **couvre un plus large spectre de pertes auditives**.

Motion C&Go P X, parfait renouvellement de Motion 13 P Nx, offre de meilleures performances pour un gabarit équivalent.

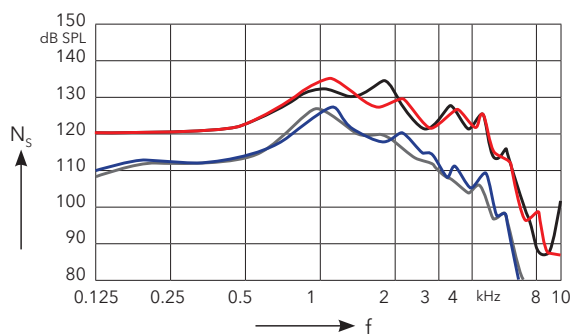


Comparatif au coupleur 2cc des courbes de Motion C&Go P X (rouge & bleu) vs Motion 13 P Nx (noir & gris).



Le pic de gain à 1kHz est plus facilement exploitable sur Motion X que sur Motion Nx. Notez aussi sur Motion P X l'absence de résonance écouleur à 2kHz, pour une **sonorité plus agréable**.

Motion C&Go SP X renouvelle avantageusement Motion SP px, car en plus d'être rechargeable, il offre des caractéristiques acoustiques en nette amélioration.

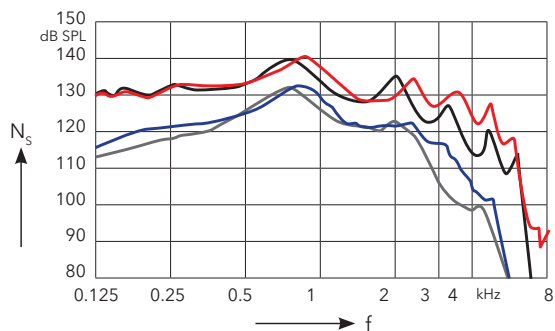

Comparatif au coupleur 2cc des courbes de Motion C&Go SP X (rouge & bleu) vs Motion SP px (noir & gris).



D'abord le pic de gain et de puissance est plus proche d'1 kHz, offrant le maximum d'énergie sur cette fréquence si indispensable aux pertes sévères à profondes. Il offre aussi légèrement plus de gain dans les basses fréquences. Mais c'est surtout dans les aigus entre 3 & 4 kHz que vous bénéficierez de jusqu'à 13 dB de gain supplémentaire avec un niveau de sortie supérieur et plus stable en fréquence. Cette réponse **plus performante dans les médiums et aigus augure de meilleurs résultats en intelligibilité dans le bruit**.

Ainsi le fait d'avoir une **gamme complète** de trois contours vous permet de proposer une **réponse parfaitement adaptée au besoin de chacun de vos patients**, avec la toute dernière technologie. **Y compris en pédiatrie**, car sans tiroir pile ils sont tous trois adaptables en coude enfant de petit diamètre, ou en coude standard, **sécurisés par verrouillage**. Une bobine T est par ailleurs intégrée aux modèles P et SP.

Enfin les trois Motion Charge&Go X sont **rechargeables en Lithium-ion** avec plus d'une journée d'autonomie, y compris le surpuissant SP offrant **jusqu'à 61 h d'utilisation** ! Les modèles P & SP bénéficient d'un **chargeur Dry&Clean** optionnel avec les fonctions de séchage et de désinfection UV pour encore plus de confort.

Ces produits sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l'audition, caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. Motion X est une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa. TUV SUD, CE 0123. Pour un bon usage, veuillez consulter les manuels d'utilisation. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux remboursés par les organismes d'assurance maladie. Classe I : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336246, droite / 7336223, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans : 7336200, droite / 7336230, gauche (400 €). Classe II : Codes individuels Sivantos (Base de remboursement) - de 20 ans : 7336163, droite / 7336140, gauche (1400 €) et + de plus 20 ans : 7379971, droite / 7336186, gauche (400 €). Janvier 2021 ©Signia GmbH 2021



ZOOM