


■ シーメンス補聴器の修理サービス

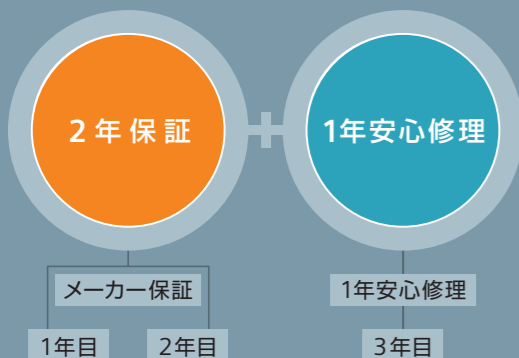

※リモコンの保証期間は2年間

① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障*が生じた場合

*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
 *紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)ならびに、電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証および安心修理の対象外です

② さらにプラス1年間は修理金額のご負担 → 最高2万円までの安心修理期間

「1年安心修理」は入会金などの費用が一切かかりません。

③ 120日以内の無料再作 (耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から120日以内の再作を無料で行います(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)。

シバントス株式会社

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野5-29-15 <http://www.bestsound-technology.jp>

■ 「シーメンス補聴器」お客様コールセンター

■ 販売店様専用問合せ窓口 本社・カスタマーサービス部

オーミミ オーミミ
 ☎ 0800-888-0303

Tel.042-740-0022 Fax.042-765-7237

営業時間 9:00-17:00(土・日・祝日 定休日)

ヨイミミ
 ☎ 0800-222-4133 Fax 0800-888-4133

Tel.042-765-7211 Fax.042-765-7237

営業時間 平日 9:00-18:30 土曜日 9:00-17:00(日・祝日 定休日)

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください。

シーメンス補聴器のご相談・ご利用は当店へ

SIEMENS



シーメンス補聴器 イメージキャラクター プロスキーヤー・冒険家 三浦雄一郎

www.bestsound-technology.jp

シーメンス補聴器 総合カタログ

2015年7月版

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷の関係で異なる場合があります。カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 1482X00018 このカタログの内容は2015年7月時点のものです。15.07.SM100. 17001187

BestSound™
Technology

Life sounds brilliant.

聞こえる。生きてる輝きが。

一人ひとりに、ベストな聞こえを。 補聴器の限界に挑み続けています。

聴力の低下に対する感じ方や問題点は異なり、
すべてのご要望にお応えすることは簡単なことでは
ありません。しかし、私たちは、その難題に挑戦
し続けています。個々の聴力やご要望に合わせた
聞こえをご提供するために、たゆまぬ製品開発、
丁寧な生産工程、そしてフィッティングソフトの改
善などを通じてみなさま一人ひとりにベストな
聞こえをご提供したいと考えています。今後日本
が世界でもトップレベルの高齢化社会を迎えてい
く中で、歳をとっても多くの方に充実した毎日を送
っていただきたい。そのために我々は日々、努力
を続けています。



シーメンス補聴器 イメージキャラクター フロスキーヤー 冒険家 三浦雄一郎



INDEX

SIEMENSテクノロジー
P5~



聞こえのこと
難聴のこと
P13~



製品のご案内
P21~

130年以上

聞こえのケアに取り組んでいます。

■ 私たちは130年以上に渡り、補聴器の技術と聞こえの経験を積み重ねてきました。1878年にベルナー・フォン・シーメンスが最初の難聴補助機器「Phonophor」を開発して以降、音響学の最先端を切り開いてきた歴史があります。

1878

Phonophor

ベルナー・フォン・シーメンスが難聴者向けの特別な電話受話器を発明



1910

難聴の従業員とその家族向けに製造したシーメンス最初の補聴器



1949

Phonophor Alpha
シーメンス初のポケットサイズの補聴器



1959

Auriculina 326
シーメンス初の耳かけ型補聴器



1966

Siretta 339
シーメンス初の耳あな型補聴器



1997

Prisma
シーメンス初のフルデジタル補聴器



2011

アクアリス Aquaris
シーメンス初の防水・防塵補聴器



2011

シーメンス クール **SIEMENS COOL**
補聴器の新しいカタチ

2013

miconテクノロジー
搭載ラインナップ
マイコン **miCON**

高性能・多機能を実現し、より自然な音であなただけの聞こえをサポート

2014 / 2015

スーパーナチュラルヒヤリング **binax** テクノロジー

バイナックス

binax

脳の聴覚メカニズムの研究から誕生
会話の聞き取りやすさをハイスpekク化で追求



シーメンス技術が
一人ひとりの聞こえに合わせた補聴器を
ご提供します。



Oldenburg大学との共同研究により、両耳通信システム(e2eワイヤレス)を開発。ドイツの最も革新的な発明や技術に与えられる賞「**ジャーマン・フューチャー・プライズ**」を受賞しました。



GOOD DESIGN

シーメンス補聴器は、そのデザイン性や画期的な商品が評価され、複数回**グッドデザイン賞**を受賞しています。最近では2013年にInsioが受賞しています。



1 Apple
8 TOYOTA
49 SIEMENS
52 SONY
64 Panasonic

ベストグローバルブランドランキングで**2014年49位**。

Interbrand社が毎年実施しているベストグローバルブランドランキングは、企業や商品のブランド価値を金額に換算してランク付けするもので、世界的にも名立たるブランドが並びます。シーメンスは、2014年には49位にランクインしており、補聴器メーカーとしてもトップに位置しています。

バイナックス
binax

マイコン
miCON

あなたのライフスタイルに合わせる シーメンステクノロジー

会話の聞きとりやすさ、快適な聞き心地、音の自然さ…。補聴器ユーザーのさまざまなニーズに応えるオールマイティな補聴器。日本語特有の聞きとりやすさも追求。開発陣が実際に耳で音を確認しながら最適なバランスに調節しました。性能表に出ない聞き心地にまで、配慮されています。それがシーメンス補聴器のバイナックス(2014年発売)とマイコン(2013年発売)です。



聞き心地

補聴器の課題だった、「聞きとり」と「聞き心地」を両立。

従来は言葉の「聞きとり」を優先すると「聞き心地」が損なわれがちでした。バイナックスとマイコンはこの二つを高品位にバランス。長時間装用しても疲れにくい聞こえで、補聴器をつけていることを忘れさせてくれます。



聞きとり



一人ひとりに

一人ひとりに合わせて調整できる、パーソナライズ機能。

一人ひとりの好みに合わせて音を調整できます。永くお使いいただけるように、お好みに合わせて、きめ細かな調整ができます。

バイナックス・マイコン共通性能


■ 声はしっかり、他の音はすっきり聞きたい。

48ch*



補聴器最高クラスの48chが従来の3倍の細かさで音をふるいにかけるから、今までの補聴器とは別次元の静かさで会話を余すことなく拾います。さらに、両耳に装用すると、片耳あたりの音量が少なくすすむため、より静かで自然な聞き心地を実現します。

*7bx・7miのみ。5bx・5miでは32ch、3bx・3miでは24chとなります
*両耳装用の利点については11・12ページをご覧ください

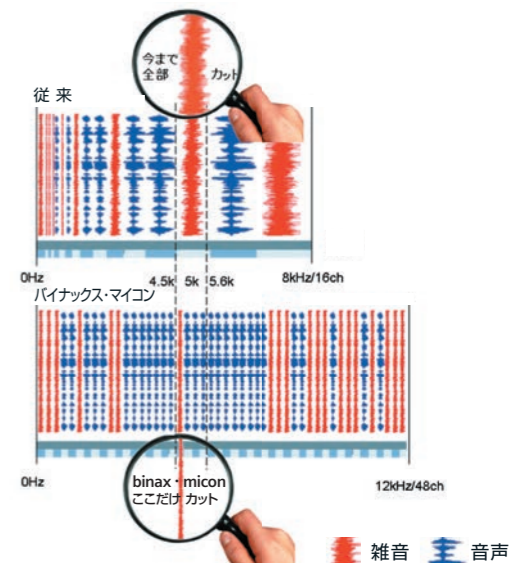


■ こもった音にならない、
クリアで自然な音で聞きたい。

12 kHz*



従来の補聴器では不可能だった12kHzの高音域までを再生できます。それにより、原音により近い自然で耳なじみがいい聞き心地が得られます。

*7bx・7miのみ(Nitroを除く)

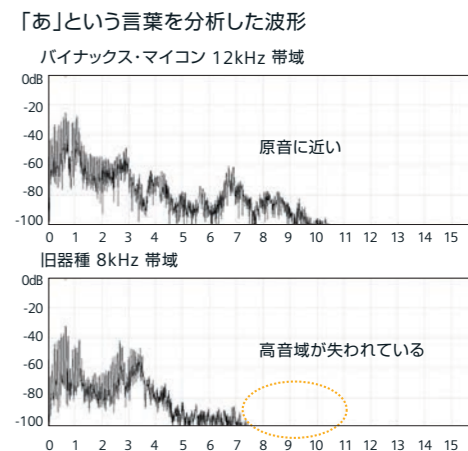


■ 騒がしいところでも、大事な話は漏らさず聞きたい。

指向性パワーエンハンス*



横や後の音を大幅に抑えることで、前からの声ますます聞きやすくなります。また、両耳に装用することで聴覚がさらに活きるので、必要な声に、さらに集中しやすくなります。

*7bx・7mi・5bxのみ

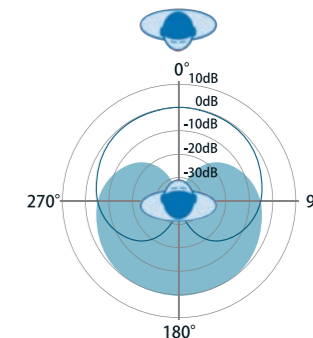

脳の聴覚メカニズムの研究から生まれた バイナックス
スーパーナチュラルヒヤリング binax

ザワザワしたレストラン、風がゴーゴー吹く屋外、
車中や教室でもレーダーのようにピンポイントで言葉を拾い、
補聴器をつけている事を忘れてしまうほど自然な聞こえを実現。
開発段階から日本語の聞き取りやすさにもこだわり、
日本人が好む優しい聞き心地をプラス。




両耳装用でより自然な聞こえに。

バーチャルマイクテクノロジー

人は本来、両耳で聞いています。両耳で聞くから、正しく、きれいに、集中して聞くことができます。binaxは、この脳の働きを助けます。だからbinaxは両耳で使わなければ、もったいない。

両耳の2台は常に無線で高速通信し、
より高精度な指向性効果をもたせ、高度な音声処理環境を構築。
消費電力は従来とほぼ同じ。エコなところもbinaxのテクノロジーです。

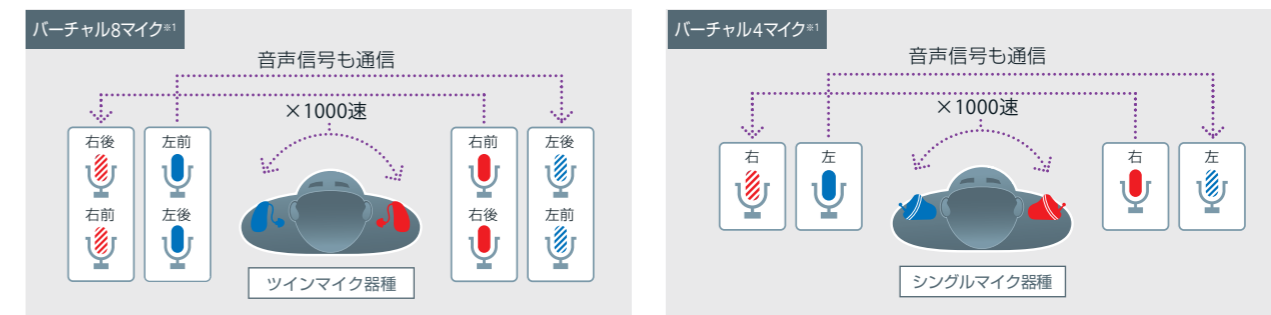

シーメンス両耳通信技術は2012年にドイツの最も革新的な発明や技術に与えられる「ジャーマン・フューチャー・プライズ」を受賞。世界で認められた技術です。

※1: 7bxを両耳装用し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応



より明瞭な聞きとりを実現した耳あな型補聴器。新発売。

今までは目立たなさを優先し、機能を搭載しきれなかった小型の耳あな型に世界で初めて指向性を搭載。両耳につけると、より明瞭な会話の聞きとりを実現します。たとえば、相手の声を拾うとき。今までは、耳介(耳たぶ)のみが集音器でした。しかし、binaxは、補聴器自ら音を集めるので、耳介と合わせてダブル集音。ますます聞きたい声が聞きやすくなります。

※2: 2015年3月現在、当社調べ。シングルマイク耳あな型を両耳装用において(CIC、CIC312は対象外)



脳の聴覚メカニズムの研究から生まれた
バイナックス
スーパーナチュラルヒヤリング binax

1 騒がしい場所でも聞きとりラクラク。

ビーム指向性*

バイナックスは、聞きとる範囲を今まで以上にシャープにできるので、ザワザワした居酒屋やレストランでも、かつてないほど会話が明瞭に聞きとれるようになりました。

*7bx・5bx・3bxを両耳装着し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応



■ ビーム指向性の範囲
■ 一般的な指向性の範囲




2 横からも後からも会話をしっかりキャッチ。

スピーチフォーカス360°*

バイナックスは、レーダーのように前後左右の音声を拾うから、相手が横や後にいてもしっかりと声をキャッチ。電車や車の中、カルチャー教室や散歩をしていてもみんなと話が弾みます。

*7bxを両耳装着し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応

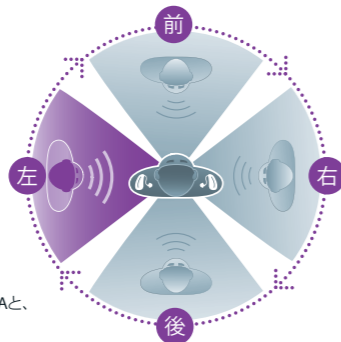

シーメンス補聴器の開発施設

シーメンス補聴器では、60台のスピーカーが囲む開発施設を設け、バーチャルに「レストラン」「交差点」など様々な仮想音響環境を作り出し、より良い聞こえの補聴器開発に役立っています。




3 風が吹いても大丈夫。

両耳eウィンドスクリーン*

ゴルフ・ウォーキングや旅行など屋外では風のゴーゴー音が気になるものです。バイナックスは、風の音をぐっと軽減して会話をますます楽しめます。屋外でも楽しい時間を満喫できます。

*7bxを両耳装着し、耳かけ型: Pure・Carat・Motion PX+・Motion SAと、耳あな型: CT Twin・LS Twinに対応


風の音をブロックし、
会話を妨げないように配慮

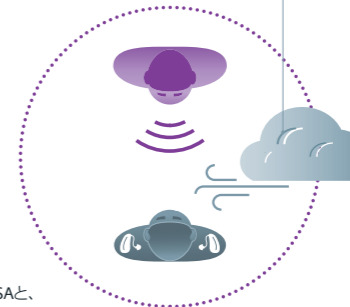

4 小さい補聴器でもカンタン操作。

リモコン&アプリ


リモコンやスマートフォンアプリでボリュームや音色を簡単便利に調整できます。しかも、補聴器を操作していることが気付かれにくく、スマート。

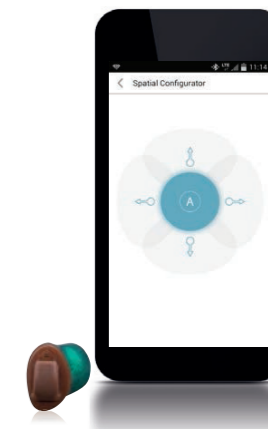

片耳だけの補聴器は、 片目で見ると同じです

片目で見ると視野が狭まり遠近感が分かりません。同様に、片耳で聞いても、音の広がりや方向感は分かりません。目も耳も二つあることにはちゃんと理由があるのです。だからこそ、補聴器の両耳装用を推進しています。

アメリカでは10人中約8人が両耳に補聴器を装着しています。確かな聞こえのために、日本でも両耳装用をおすすめします。

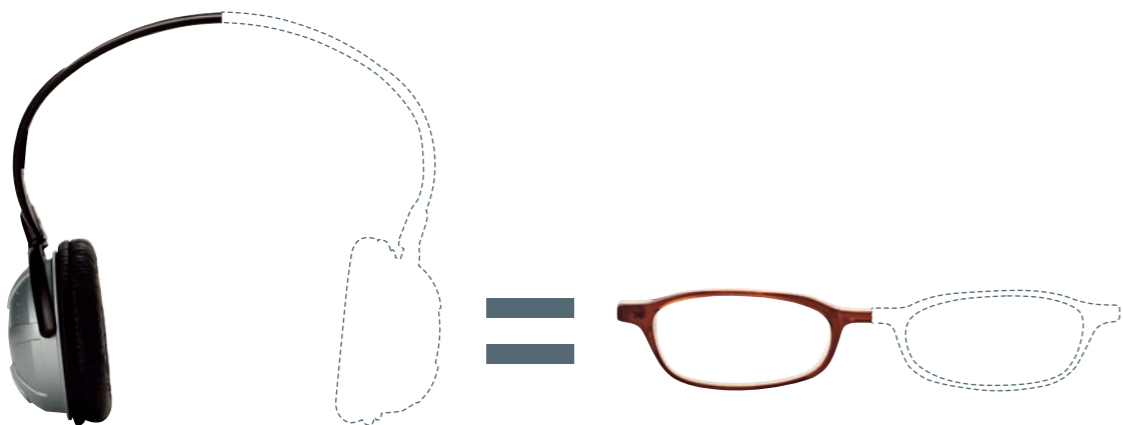


出典:

- (1) JapanTrakの2010/2009購入時期別の補聴器両耳装用者率より
- (2) 補聴器1年間使用後の主観的評価によるデータ(スキャンジナビアンオージオロジーより抜粋)
- (3) 米国立加齢研究所(NIA)が1990~2008年にわたり実施した、「難聴と認知症との関連性についての調査」
- (4) 認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向け~(新オレンジプラン)厚生労働省2015年1月発表
- (5) JAAA 141-149, Vol. 6/No. 2 Mar. 1995




1 海外では両耳装用が一般的⁽¹⁾

アメリカでは補聴器の両耳装用率が日本の約2.5倍あります。補聴器使用者10人中約8人が両耳につけています。

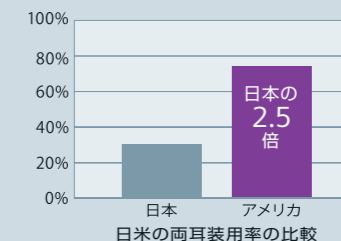

2 両耳装用は満足度が高いという事実⁽²⁾

両耳装用は様々な環境において満足度が高い事が判明しています。

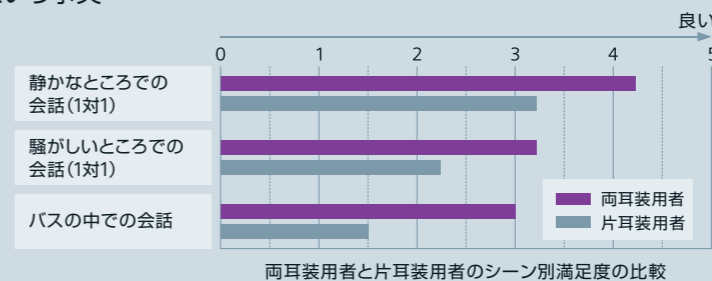


3 難聴を放置すると認知症になるリスクが上昇⁽³⁾



軽度難聴では認知症のリスクがわずかに上昇、中等度及び重度難聴の患者では認知症のリスクが顕著に増大していることが判明しました。また、日本の厚生労働省も、「難聴も認知症の危険因子」としています。⁽⁴⁾

4 言葉の聞き取り、聴き取り能力の低下⁽⁵⁾

片耳装用だと、補聴器をつけていない方の耳は言葉の聞き取り能力が次第に衰えていく場合があるという研究結果があります。

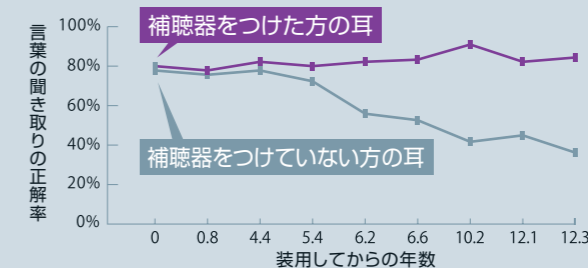

5 両耳装用だと、音の方向を捉えやすい

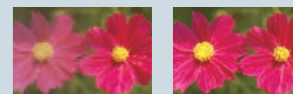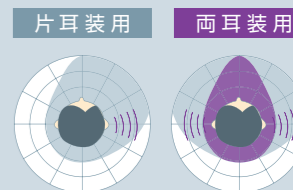

聞こえの範囲イメージ図

両耳に音が入るので、聞こえの範囲が左右に広がり、音の場所を捉えやすくなります。音の方向が分からないと道路沿いを歩行中などに危険性が高まります。

聞こえのこと

難聴のこと

補聴器を選ぶ前に
知っておきたいこと。

聞こえにくくなること。 それは誰にでも起きる自然なことです。


人は年を重ねると聴力が低下していきます。このような加齢性難聴は高音から少しずつ聞こえにくくなっていき、「あ、い、う、え、お」の母音は聞こえるものの、子音を聞きとる力が低下していきます。

■ こんなことありませんか？



- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りから、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

■ 耳の構造と役割

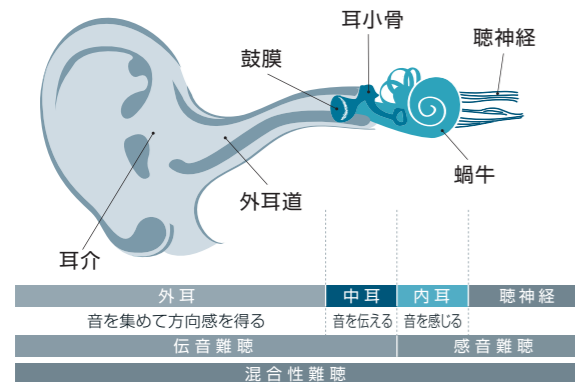


難聴の種類	伝音難聴	感音難聴	混合性難聴
解説	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴
	医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もあります。	医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもあります。	

出典：立木 孝 他：日本人聴力の加齢変化の研究 Audiology Japan 45:241、241~250(2001)より改編

■ 加齢に伴う聴力の変化

難聴が進むにつれて、聞こえる音が減っていきます。聴力の低下は30代からすでに始まっています。

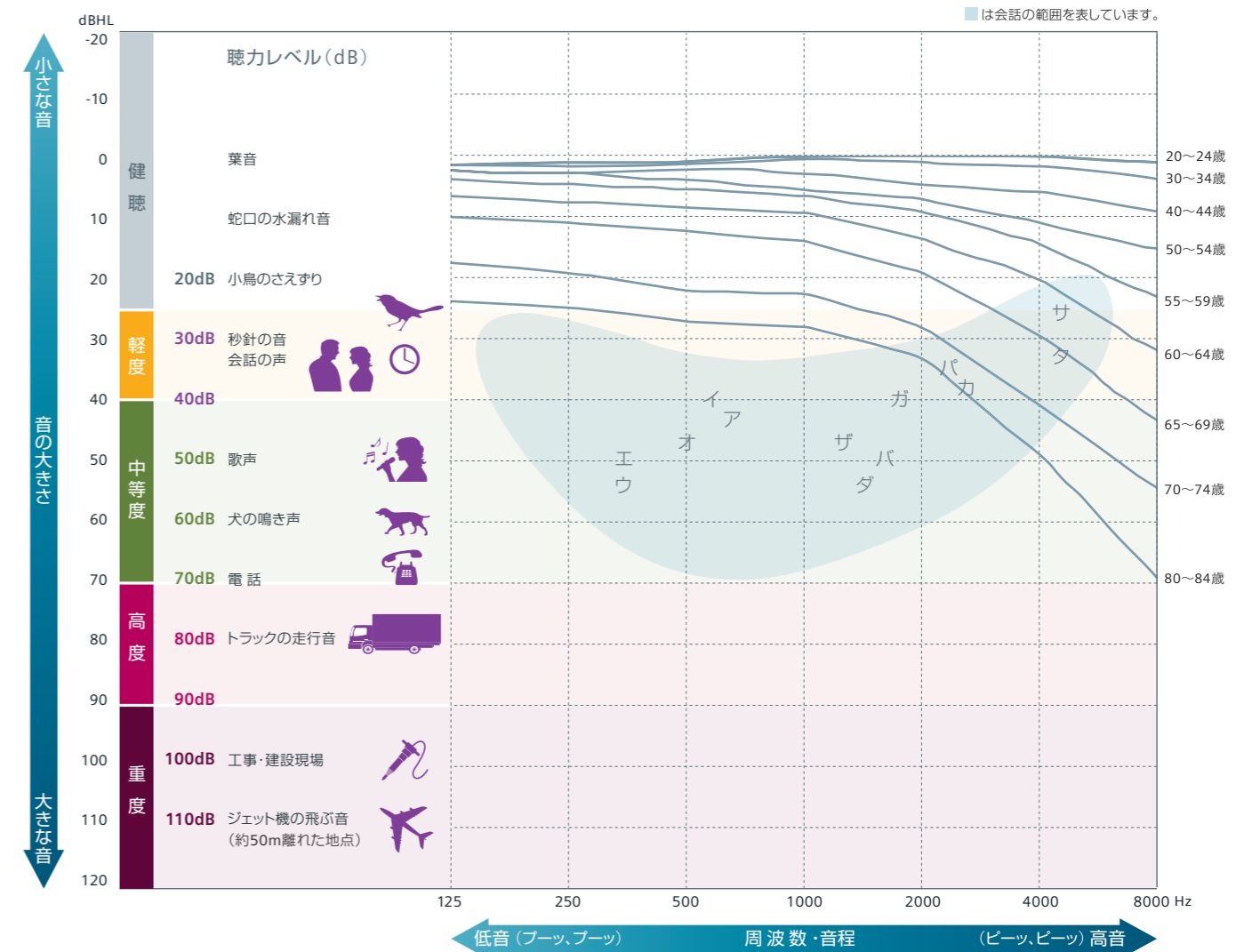


■ 聞こえの目安

軽度 25dBHL~40dBHL	中等度 40dBHL~70dBHL	高度 70dBHL~90dBHL	重度 90dBHL以上
小声が聞こえにくい	普通の声の大きさが聞こえにくい	少し離れると大声でも聞こえにくい	耳元で大声でも聞こえにくい

補聴器にはさまざまなタイプがあります。
聞こえのレベルやお好みにあわせてお選びいただけます。

名前刻印 ¥2,160 (税込/1台につき)

「名前刻印」で、世界に1つだけのあなたの補聴器にしませんか？
 ※カタカナ・ひらがなで最大6文字まで刻印可能 ※Aquaris及びAcelは対象外です
 ※カラーによっては刻印ができないものもあります
 ※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,640税込)。

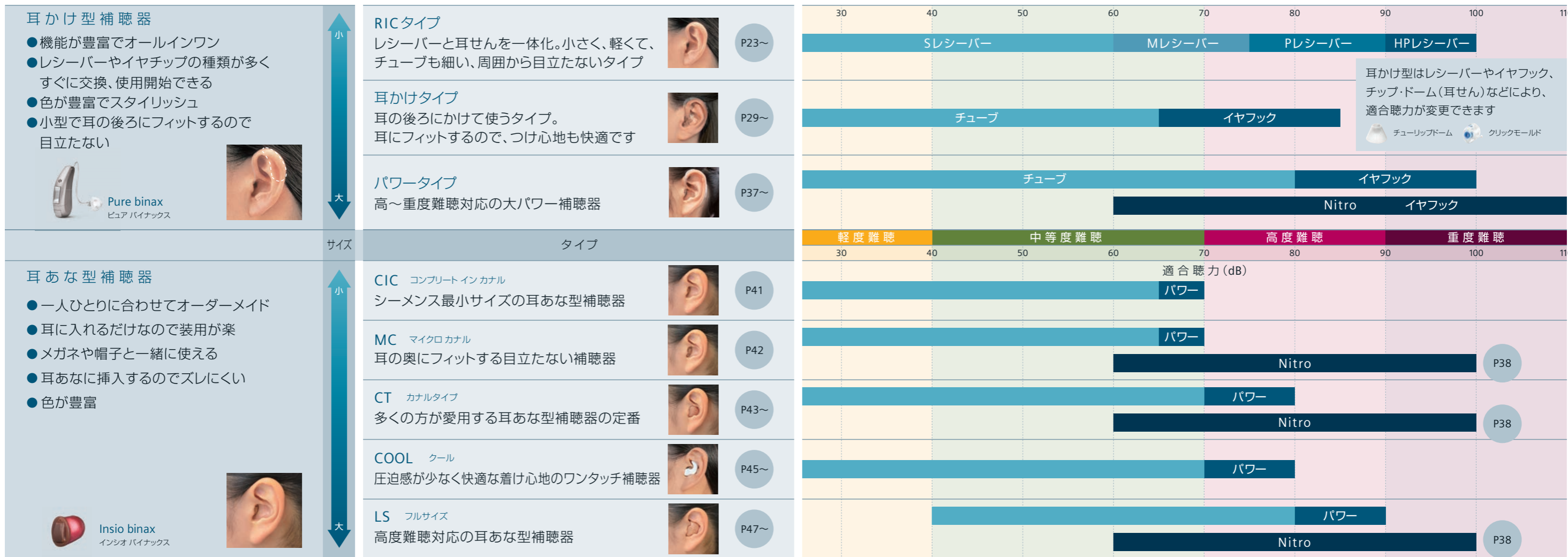

P37

P38

P38

P38

クラス別
機能比較

機能	チャンネル数	ハウリングストッパー ²	スピーチ & ノイズ マネジメント	アダプティブ ^{※1} (指向性)	周波数圧縮	テレビ・電話	サウンドスムージング	スピーチフォーカス ^{※1}	パワーエンハンス ^{※1}	サウンドイコライザー	12 kHz
機能の説明	音を高さごとに分割。その分割数のこと。	万一のピーピー音をしっかり防ぐ。	周囲の騒がしさを抑え、言葉を浮き上がらせる。	雑音を追尾して抑える。チャンネル数が多いほど、より多く抑制。	聞こえる範囲まで音程を下げ、高い音を聞きやすくする。	テレビや電話の音声を補聴器で直接聞ける。	突発的な不快音を抑える。	レーダーのように前後左右の声をひろい、聞きやすくする。	横や後からの音を大幅に下げ、正面からの声を聞きやすくする。	音環境に合わせて、最適な音質に自動切り替え。	従来の補聴器では不可能だった高音域(12kHz)の音まで再生。
役立つシーン	一つずつが細かいほどより高度に調節できる。 	 OK!	 うん あしたは?								
	チャンネル数が多いほど、右記の機能が高性能に働いて、より静かで聞き取りやすくなります。	ピーピー音が発生しやすいとき(食事をしたり、帽子を目深にかぶったとき)などでも、安心です。	人ごみやレストランなどの雑音が多い場所でも、会話がはっきり際立ちます。	掃除機や車など動く騒音源をしっかり抑えます。	体温計の音、鳥の声、「さしすせそ」など、聞こえにくくなった音を聞き取りやすくします。	テレビや電話を明瞭な音質で周りに気がねなく聞くことができます。	耳に響く、食器のあたる音・新聞をめくる音・ドアが閉まる音などを抑えます。	カルチャー教室や車の中などで、隣や後の友人の声もしっかり聞くことができます。	駅前・スーパーなどのざわざわした場所でも、正面からの声がぐっと聞きやすくなります。	補聴器が自動的に、「会話」・「音楽」・「外出時」など環境にあった聞きやすさに切り替えます。	原音に近い、より豊かで自然な聞き心地を得られます。
クラス											
シーメンス補聴器の最上位器種 プレミアム 7	 48 ch	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★ 自動:48chアダプティブ	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★	★★★★★★	★★★★★★ ^{※3}
一日中、ワンランク上の聞こえを実感 アドバンス 5	 32 ch	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★ 自動:32chアダプティブ	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★ ^{※2}	★★★★	
テレビや電話もクリアに聞こえる スタンダード 3	 24 ch	★★★★★★	★★★★	★★★★ 自動:24chアダプティブ	★★★★	★★★★	★★★★				
基本機能を重視した ベーシック Orion	 ^{※4} 16 ch	★★★★★★	★★★★	★★★★ ^{※5} 自動:1バンド	★★★★			^{※6}			
シンプル機能をお手軽価格で バリュー Sirion リモコン非対応	 12 ch	★★★★	★★	★ 固定							

※1 耳あな型のシングルマイク器種にはありません ※2 binaxのみ ※3 Nitro 7miを除く ※4 Orion Plus RICは24chです ※5 Orion Plus RICは★★★★自動:1chアダプティブです ※6 Orion Plus RICは★★★★です

魅力の秘訣は「元気な聞こえ」!
前向きになる原動力です。

ピュア マイコン
Puremicon



ニトロ エスピー マイコン
Nitro SP micon



Pure

海外在住の孫と話すために、英会話を勉強中です。

娘が国際結婚して、オーストラリアに住んでいます。孫は3歳と1歳。3歳の孫は日本語も話しますが、まわりが英語を話す人ばかりなので、これからは英語が主になっていくと思います。娘家族とは、パソコンでテレビ電話を楽しんでいます。孫ともっと話しができるように、半年前から英会話を勉強を始めました。

開き直ることで、すべてに前向きになれます。

還暦を過ぎたら、誰でも何らかの老化や衰えが始まります。それを隠さず堂々とカミングアウトして、逆に開き直って前向きにとらえたいですね。聴力も同じこと。補聴器は、おしゃれでカッコいいものが好みます。いくつになっても今までのように明るく過ごしたいと思っています。



大西 三恵子 さん
(68歳・東京都在住)



松本 日登絵 さん
(62歳・東京都在住)

旅行や温泉などを積極的に楽しんでいます。

元気なうちに、旅行や温泉を楽しみたいので、毎月のように夫婦や姉、息子と出掛けています。海外旅行にも年2、3回行きますが、まだまだ訪れたいところがいっぱいあります。今後は海外への一人旅行に挑戦したいと考えています。

着けていることを感じないくらい軽くて快適。

家族や友人の話すことが聞き取りにくく、何度も聞き返すようになっていました。補聴器は考えたことが無かったのですが、試してみて驚きました。こんなに軽く、小さくて大丈夫かしらという印象でしたが、すぐに不安は無くなり着けていることさえ忘れるほど話しに夢中になっていました。カラーも豊富で、最近は赤が好きです。



Nitro

もっと早く走れる様になりたい。 世界で通用するアスリートとして、もっと強くなりたい。 それが僕の原動力です。

トレーニングに明け暮れる毎日ですが、それも「もっと早く走れる様になりたい」といった強い思いから。僕の補聴器は、防水性や防塵性にも優れているので、練習三昧で大量の汗をかく僕にとってピッタリです。風が強い日でも砂埃を気にしなくて良いのも助かっています。

これからも練習に励み、トップ選手のレベルに近づけるように、補聴器と一緒に引き続き邁進していきたいと思っています。



岡部 祐介 さん
(2013年デフリンピック陸上競技日本代表選手(400m))



荒井 由紀子 さん
(東京都在住)




音や声が聞こえる嬉しさと大切さを 感じられるようになりました。

両耳の聴力が短期間のうちに低下し、高度難聴と診断されました。補聴器を着けるようになり聞こえる嬉しさと大切さを感じられるようになりました。

耳鼻科の先生や販売店の担当者様が私にもっと聞かせてあげたいと、親身になって診察や補聴器の調整を続けてくださっています。進行する難聴で重度難聴となりましたが、多くの方々に出会い支えられて感謝しています。



PRODUCT

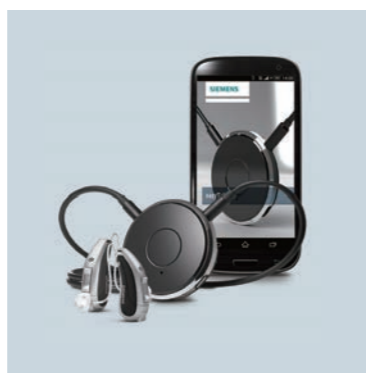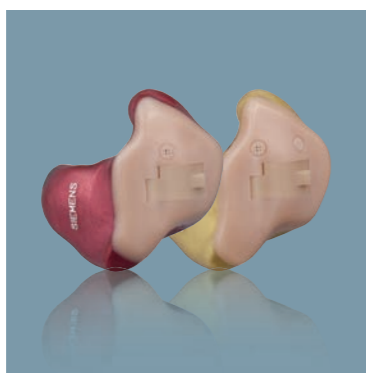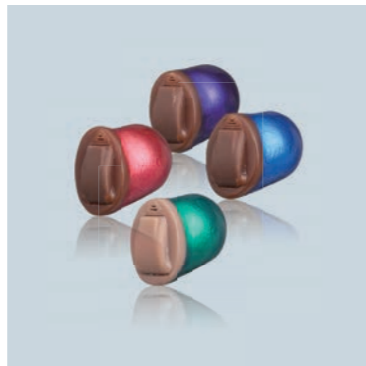

製品のご案内

軽度難聴から重度難聴まで幅広い聴力に対応した補聴器を取り揃えています。

デザインやカラー、機能も豊富だからお好きなタイプを選べます。

TRT マークが目印です。 バイナックスとマイコン及びオリオンは耳鳴り治療器機能を搭載

8割の方に効果があったと報告されている*1
TRT(耳鳴り再訓練法)用のノイズ(治療音)を発生させることができます。

* 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください。* TRT: Tinnitus Retraining Therapy
*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6:639~646、2002

目次

Pure (ピュア)	23
Carat (カラット)	25
Ace (エース)	27
Life (ライフ)	29
Motion PX+ / P (モーションピーエックスプラス/ピー)	31
Motion SA / SX (モーション エスエー/エスエックス)	33
Aquaris (アクアリス)	35
Nitro (ニトロ)	37
Inσιο シリーズ (インシオ シリーズ)	39
Orion シリーズ (オリオン シリーズ)	49
Sirion シリーズ (シリオン シリーズ)	51
Intuis シリーズ (インティス シリーズ)	53
Lotus (ロータス)	55
Pockettio (ポケットティオ) / XCEL COOL EZ (エクセルクールイージー)	56
リモコン	57
スマートフォン用アプリ	62
性能一覧	63
機能比較表	69

Pure
ピュア

binax
micon

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う
- 目立たない補聴器が良い
- アクティブに使いたい
- 長く使い続けたい

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります



Pure binax

Pure micon



デザイン性も兼ね備える、シーメンス史上最高クラスのミニRIC補聴器

耳の後ろにすっぽりと隠れる小さなボディにハイスペック機能を搭載。

心臓部にはシーメンス技術の集大成を搭載し、より自然な聞こえで様々な環境下でも会話が聞き取りやすい補聴器です。ニーズに合わせてお使いいただけます。

① 小さくて目立たない

補聴器本体からレシーバー(スピーカー)を外に出し、より小さく目立たなくなりました。



② ツインマイク

マイクを前向きに配置し、聞こえの性能がアップしました。

③ ロッカースイッチ

音量調節やプログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元で機能を割り合てられます。

④ ナノコート

表面も内部もナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



⑤ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。



* 水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)

⑥ 長く使える

聴力が低下した場合にも、レシーバー交換で幅広い聴力に対応。「1台を長く使い続けたい」そんな方におすすめです。

⑦ ミニレシーバー2.0

耳の奥に入れるタイプのレシーバー。鼓膜に音が直接伝わるので、豊かな音量と音質を得られます。



防水性能のシリコンパッキング

HPモールドは高～重度難聴にも対応
詳しくは25ページへ

⑧ 名前刻印対応

詳しくは16ページへ

全てのiPhoneやAndroid携帯に対応
タッチコントロールアプリ*

Google PlayやApp Storeから無償アプリインストールで、音量調節をスマートフォンの画面上で操作できます。



*binaxのみ。Android Ver.2.3以上、iOS7.0以上に対応

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

Pure binaxは12色、Pure miconは11色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。

全器種共通



Pure binax限定色



製品名	Pure binax / Pure micon				
	難聴レベル	適合聴力	軽 ▶ 中 ▶ 高 ▶ 重		
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7bx	¥846,000	¥470,000	48ch	6	●イージーテックブースト ●イージーポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
5bx	¥594,000	¥330,000	32ch	6	
3bx NEW	¥432,000	¥240,000	24ch	6	
7mi	¥810,000	¥450,000	48ch	6	
5mi	¥522,000	¥290,000	32ch	6	●ミニテック ●イージーポケット
3mi	¥360,000	¥200,000	24ch	6	
使用電池	PR41 312				
電池寿命(連続使用)	[Pure binax]S:約148時間/M・P・HP:約125時間 [Pure micon]S:約160時間/M・P・HP:約135時間				
販売名	[Pure binax]補聴器 binaxシリーズ [Pure micon]補聴器 miconシリーズ				

*本体のロッカースイッチやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です


※補聴器は非課税です

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う
- 目立たない補聴器が良い
- 電池が長持ちして欲しい

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります
※binaxシリーズのみ

子供用アクセサリ

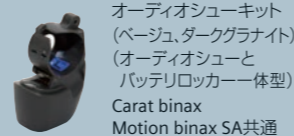

オーディオシューキット
(ベージュ、ダークグラナイト)
(オーディオシューと
バッテリーロッカー一体型)
Carat binax
Motion binax SA共通

本体と同時購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)
*修理として補聴器をお預かりして加工します。



Carat binax



目立たない電池長持ちRIC補聴器

目立たないだけでなく、電池長持ちRIC補聴器。専用のレシーバー・モールドで高～重度難聴にも対応。

① ロッカースイッチ

音量調節やプログラムの切り替えスイッチ。お好みで販売元で機能を割り合てられます。

② ツインマイク

マイクを前向きに配置し、聞こえの性能がアップしました。

③ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)



④ ナノコート

表面のナノレベルのコーティング。

サビや水分による故障から守ります。



⑤ 長く使える

聴力が低下した場合にも、レシーバー交換で幅広い聴力に対応。「1台を長く使い続けたい」そんな方におすすめです。



Carat binax

⑥ ミニレシーバー2.0

耳の奥に入れるタイプのレシーバー。鼓膜に音が直接伝わるので、豊かな音量と音質を得られます。



防水性能のシリコンパッキング

⑦ HPモールド

オーダーメイドのHPモールドを使うと、高～重度難聴にも対応します。高～重度難聴で小型の補聴器をお求めの方におすすめです。

HPモールド (ミニレシーバーHP付き) ¥27,000 (非課税)
※ミニレシーバーHP単体では販売しておりません



HPモールド

⑧ 電池長持ち **ECO**

PR48電池を使用しているので、電池寿命が長く、環境にもお財布にもやさしい補聴器。

※レシーバーによって電池寿命が変わります

電池1粒 ▶ 約**235**時間

人気器種・Pure (PR41電池使用)に比べ約1.6倍も電池長持ち。

※binax Sレシーバーの時

⑨ 名前刻印対応 **名入れ対応**

詳しくは16ページへ

全てのiPhoneやAndroid携帯に対応
タッチコントロールアプリ*

Google PlayやApp Storeから無償アプリインストールで、音量調節をスマートフォンの画面上で操作できます。



*binaxのみ。Android Ver.2.3以上、iOS7.0以上に対応

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Carat binaxは全12色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。

全器種共通



製品名	Carat binax				
難聴レベル	適合聴力				
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7bx	¥846,000	¥470,000	48ch	6	●イージーテックブースト ●イージーポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
5bx	¥594,000	¥330,000	32ch	6	
3bx NEW	¥432,000	¥240,000	24ch	6	
使用電池/電池寿命(連続使用)	PR48 13 [Carat binax] S:約235時間/M・P:HP:約216時間				
販売名	[Carat binax] 補聴器 binaxシリーズ				

*本体のロッカースイッチやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
※Carat binax補聴器の本体、外箱、取扱説明書等は、Carat Aと表記されています。Alは、オーディオシューを意味し、オプションとして付ける事ができます

※補聴器は非課税です

こんな方におすすめ!

- とにかく目立たない
小型補聴器が良い
- スマートフォンを
リモコンとして使いたい
- 長く使い続けたい

TRT ※耳鼻科医の診察が必要になります



Ace binax



サイズにこだわりぬいたシーメンス最小ミニRIC補聴器

専用アプリで、スマートフォンがリモコンに。極小サイズでもラクラク操作。

1 お使いのスマートフォンをリモコン化
スマートフォンをAceのリモコンとして
使えます。

全てのiPhoneやAndroid携帯に対応
タッチコントロールアプリ*

Google PlayやApp Storeから無償アプリ
インストールで、音量調節をスマートフォンの
画面上で操作できます。



*Android Ver.2.3以上、iOS7.0以上に対応

2 小型な電池
最も小型な電池を使用しています。

3 ツインマイク
マイクを前向きに配置し、聞こえの
性能がアップしました。

4 プッシュボタン
プログラムの切り替えスイッチ。お好み
で購入先でプログラム調整できます。



5 ナノコート
表面のナノレベルのコー
ティング。サビや水分に
よる故障から守ります。

6 防水・防塵対応
汗・水・湿気に加え、砂や
ホコリにも強いIP67*
対応の補聴器。
*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)

7 長く使える
聴力が低下した場合にも、レシーバー
交換で幅広い聴力に対応。
「1台を長く使い続けたい」そんな方
におすすめです。

8 ミニレシーバー2.0
耳の奥に入れるタイプ
のレシーバー。鼓膜に音
が直接伝わるので、豊
かな音量と音質を得ら
れます。

9 HPモード
オーダーメイドのHPモ
ードを使うと、90dBHLま
で対応します。高度難聴で
小型の補聴器をお求めの
方におすすめです。
HPモード (ミニレシーバーHP付き) ¥27,000 (非課税)
*ミニレシーバーHP単体では販売していません

豊富なカラーバリエーション

※Aceは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Ace binaxは全10色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。



製品名	Ace binax				
難聴レベル	適合聴力		軽 中 ▶ 高 S:~60dB/M:~70dB/P:~80dB/HP:~90dB ※S・M・P・HPはレシーバーの種類		
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7bx	¥810,000	¥450,000	48ch	6	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
5bx	¥558,000	¥310,000	32ch	6	
3bx NEW	¥432,000	¥240,000	24ch	6	
使用電池/電池寿命(連続使用)	PR536 10A S:約96時間/M・P・HP:約80時間				
販売名	[Ace binax] 補聴器 binaxシリーズ				

*本体のロッカースイッチやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

※補聴器は非課税です

こんな方におすすめ!

- 耳あなが小さい、曲がっている
- こもり感が少ない補聴器が良い
- 耳だれがある

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります



快適な装用感のミニ耳かけ型補聴器

耳かけ型のミニタイプでおしゃれなデザインとmiconテクノロジーを搭載。
耳あなが細い、こもり感がきつい方はLifeチューブで快適にお使いいただけます。

① スリムなデザイン

頑丈で人間工学に基づいたデザインだから耳にやさしく目立たないようにフィットします。

② プッシュボタン

プログラムの切り替えスイッチ。
好みに応じて購入先でプログラム調整できます。

③ ナノコート

表面のナノレベルのコーティング。
サビや水分による故障から守ります。



④ イヤフック

⑤ Lifeチューブ

先端部まで柔軟性があるので、耳あなが小さい方、曲がっている方でも快適にお使いいただけます。

⑥ Lifeチップ

空気穴が大きい音抜けの良い耳栓でこもり感を軽減します。



⑦ 名前刻印対応

詳しくは16ページへ

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

Life miconは全12色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。



製品名	Life micon				
難聴レベル	適合聴力		軽 ▶ 中 チューブ:~60dB/イヤフック:~80dB		
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7mi	¥738,000	¥410,000	48ch	6	●ミニテック ●イージーポケット
5mi	¥468,000	¥260,000	32ch	6	
3mi	¥360,000	¥200,000	24ch	6	
使用電池/電池寿命(連続使用)	PR41 312 約160時間				
販売名	補聴器 miconシリーズ				

*本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

※補聴器は非課税です

Motion P

モーション ピー

binax **NEW**
micon
XCEL

こんな方におすすめ!

- パワーがある
耳かけ型が欲しい
- 使いやすい補聴器が良い

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります
※binax・miconシリーズのみ



Motion binax PX+

Motion micon P

Motion XCEL P



子供用アクセサリ

オーディオシューキット
(子供用バッテリードアを含む)
本体と同時購入 ¥4,000(非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000(非課税)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

子供用バッテリードア単体
本体と同時購入 ¥2,000(非課税) 本体購入後の取付* ¥8,000(非課税)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

※binax・micon専用 XCELには使えません

スモールイヤフック
¥545(税込)

幅広い聴力に対応する万能型の耳かけタイプ

中等度から100dBの重度難聴まで対応するパワータイプ。
使いやすい万能タイプなのでお子様にもおすすめしています。

① スリムなデザイン

頑丈で人間工学に基づいたデザイン
だから耳にやさしく目立たないように
フィットします。



Motion binax PX+
(実物大)

⑤ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強い
IP67*対応の補聴器。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)、
binax・miconシリーズのみ



⑥ 名前刻印対応

詳しくは16ページへ



② ツインマイク

前方向の音にフォーカスし、他の角度
から来る音を抑えるので話し相手との
会話がスムーズになります。

③ 調節ボタン

使いやすいボリューム調節ボタンと
プログラム切り替えボタンを搭載。
簡単に音量など調節することができます。

④ ナノコート

表面のナノレベルのコー
ティング。サビや水分による
故障から守ります。



豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Motion binax PX+は11色、Motion micon Pは9色、Motion XCEL Pは12色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。

binax PX+	●											●				-		-		-	
micon P	●											●		-		-		-			
XCEL P	●											-		●		●		●			
	ベージュ 01	グラナイト 02	グレー 03	ブラック 05	シルバー 06	サンディ ブラウン 31	ダーク グラナイト 66	ブラウン 04	パール ホワイト 07	ゴールド ブロード 30	ダーク シャンパン 37	キャンディ ピンク 60	ギャラクティック ブルー 61	チェス ナット 32	ブラック ホワイト M1★	サハラ ブラウン M2					

製品名	Motion binax PX+ / Motion micon P / Motion XCEL P				
難聴レベル	適合聴力	中 ▶ 高 重 チューブ: ~80dB / イヤフック: ~100dB			
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7bx NEW	¥846,000	¥470,000	48ch	6	●イーージーテックブースト ●イーージーポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール
5bx NEW	¥594,000	¥330,000	32ch	6	●ミニテック ●イーージーポケット
3bx NEW	¥432,000	¥240,000	24ch	6	
7mi	¥756,000	¥420,000	48ch	6	
5mi	¥486,000	¥270,000	32ch	6	
3mi	¥360,000	¥200,000	24ch	6	
501 XCEL	¥288,000	¥160,000	12ch	5	
使用電池 / 電池寿命(連続使用)	PR48 13 [Motion binax PX+]約216時間 [Motion micon P]約230時間 [Motion XCEL P]約250時間				
販売名	[Motion binax PX+]補聴器 binaxシリーズ [Motion micon P]補聴器 miconシリーズ [Motion XCEL P]シーメンス補聴器 MOTION				

*本体の調節ボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

※補聴器は非課税です

Motion S

モーション エス


binax **NEW**
micon
XCEL

こんな方におすすめ!

- 買い替えを検討している
- 使いやすい補聴器が良い

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります
※binax・miconシリーズのみ

子供用アクセサリ

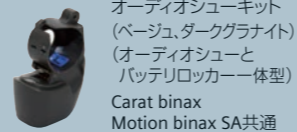

オーディオシューキット
(ベージュ、ダークグラナイト)
(オーディオシューと
バッテリーロッカー一体型)
Carat binax
Motion binax SA共通
本体と同時購入 ¥4,000 (非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000 (非課税)
*修理として補聴器をお預かりして加工します



快適で目立たない小型耳かけ型補聴器

自然な聞こえで会話が聞き取りやすい補聴器です。
操作が簡単で従来品よりも約20%小さく、目立ちにくい補聴器です。

① スリムなデザイン

頑丈で人間工学に基づいたデザイン
だから耳にやさしく目立たないように
フィットします。

② ツインマイク

前方向の音にフォーカスし、他の角度
から来る音を抑えるので話し相手との
会話がスムーズになります。

③ ロッカースイッチ

使いやすいボリューム調節ボタン。
簡単に音量など調節することができます。

*購入先でプログラム切り替えに変更することもできます

④ ナノコート

表面のナノレベルのコー
ティング。サビや水分による
故障から守ります。



⑤ Lifeチューブ / Thinチューブ

Lifeチューブ/Thinチューブに交換す
ると、周囲からより目立ちにくくなりま
す。



⑥ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強い
IP67*対応の補聴器。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)、
binax・miconシリーズのみ



⑦ 名前刻印対応

詳しくは16ページへ

豊富なカラーバリエーション

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Motion binax SAは14色、Motion micon SXは11色、Motion XCEL SXは12色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。

binax SA	●														●			
micon SX	●											●						
XCEL SX	●											●						
	ベージュ 01	グラナイト 02	グレー 03	ブラウン 04	ブラック 05	シルバー 06	ゴールド プロンド 30	サンデー ブラウン 31	ダーク シャンパン 37	ダーク グラナイト 66	キャンディー ピンク 60	キャラテック ブルー 61	エレガンス C12	スピリット C5★	パール ホワイト 07	チェス ナット 32	ブラック ホワイト M1★	サハラ ブラウン M2

製品名	Motion binax SA / Motion micon SX / Motion XCEL SX					
難聴レベル	適合聴力	● 軽 ● 中 ● 高				チューブ: ~65dB / イヤフック: ~85dB
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン	
7bx NEW	¥846,000	¥470,000	48ch	6	● イージーテックブースト ● イージーポケット ◎ スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	
5bx NEW	¥594,000	¥330,000	32ch	6		
3bx NEW	¥432,000	¥240,000	24ch	6		
7mi	¥720,000	¥400,000	48ch	6	● ミニテック	
5mi	¥450,000	¥250,000	32ch	6	● イージーポケット	
3mi	¥360,000	¥200,000	24ch	6		
501 XCEL	¥288,000	¥160,000	12ch	5		
使用電池 / 電池寿命 (連続使用)	PR48 13 [Motion binax SA] 約216時間 [Motion micon SX] 約250時間 [Motion XCEL SX] 約230時間					
販売名	[Motion binax SA] 補聴器 binaxシリーズ [Motion micon SX] 補聴器 miconシリーズ [Motion XCEL SX] シーメンス補聴器 MOTION					

*本体のロッカースイッチやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

※補聴器は非課税です

Aquaris

アクアリス

micon

こんな方におすすめ!

- 汗や湿気に強い補聴器が良い
- アクティブに使える補聴器が良い

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります



汗や湿気に強く壊れにくい防水・防塵補聴器

高温多湿で厳しい夏の日本でテストを繰り返し、防水・防塵の国際保護等級で最高のIP68*を取得した補聴器です。汗、水、湿気はもちろん水没しても水が入らない完全密封構造。砂やホコリにも強く壊れにくいのであらゆるシーンで快適な聞こえをサポートします。

① 防水・防塵対応の国際保護等級で最高のIP68*を取得

汗・水・湿気はもちろん、水没しても水が入らない完全密封構造。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m以上)。



② 防水加工マイク

マイクはゴアテックスで有名なゴア社の素材で防水。音が確実に入るように特殊な素材が採用されています。



④ ソフトタッチラッカー

表面も内部もナノコートよりも撥水力のあるコーティング。サビや水分による故障から守ります。



⑤ レシーバープロテクション

ボディとの接続部は防水ガードで水の浸入を食い止めます。

⑥ ボトルハウジング

ボディは瓶のように隙間がない密閉構造だから、水の浸入を防ぎます。

補聴器を耳に固定し、落ちにくくする Aquarisクリップ



¥3,240(2ヶ入り別売・税込)

豊富なカラーバリエーション

※Aquarisは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Aquaris miconは全5色。ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。



製品名	Aquaris micon				
難聴レベル	適合聴力		● 軽 ● 中 ● 高 チューブ: ~70dB / イヤフック: ~90dB		
クラス	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	対応リモコン
7mi	¥810,000	¥450,000	48ch	6	●ミニテック ●イージーポケット
5mi	¥522,000	¥290,000	32ch	6	
3mi	¥432,000	¥240,000	24ch	6	
使用電池/電池寿命(連続使用)	PR48 13 約216時間				
販売名	補聴器 miconシリーズ				

*リモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

※補聴器は非課税です

メンテナンスについて

Aquaris miconは初期の防水性能を維持するため、日ごろのお手入れと1年ごとの防水パーツの交換を推奨します。
(保証期間中は2回までは無料。それ以降は1回¥9,900(非課税))

こんな方におすすめ!

- 高～重度難聴の方
- 大パワー補聴器をお使いでピーピー音に悩んでいる

TRT ※耳鼻科医の診察が必要になります

子供用アクセサリ

オーディオシューキット
(子供用バッテリードアを含む)
本体と同時購入 ¥6,000(非課税)
本体購入後の取付 ¥12,000(非課税)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

子供用バッテリードア単体

本体と同時購入 ¥2,000(非課税) 本体購入後の取付 ¥8,000(非課税)

*修理として補聴器をお預かりして加工します

※binax・micon専用 ELIには使えません

スモールイヤフック
¥545(税込)



装着イメージ

MC

CT

LS

高～重度難聴対応のシーメンス最高出力 スーパーパワー補聴器

高度・重度難聴の方に対応したスーパーパワー補聴器。従来品より30%小型化しながら頑丈に作られており、壊れにくくお子様にもお使いいただいています。使いやすさと快適な装着感で職場やレジャーで日々の生活をサポートします。

① スリムなデザイン

30%小型化*。人間工学に基づいたデザインで耳にやさしく目立たないようにフィットします。

*従来品との比較

② 調節ボタン

使いやすいボリューム調節ボタンとプログラム切り替えボタンを搭載。簡単に音量など調節することができます。

③ ナノコート

表面も内部もナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



Nitro SP micon (実物大)

④ ツインマイク

前方向の音にフォーカスし、他の角度から来る音を抑えるので話し相手との会話がスムーズになります。

⑤ LEDライト

電源オンやプログラム変更、ロック、解除で赤く点滅してお知らせします。

*購入先で、LEDライトのオン/オフ設定ができます

⑥ 防水・防塵対応

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)



⑦ 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

豊富なカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Nitro SP miconは全6色。ご購入後のカラー変更はできません。



製品名	難聴レベル	適合聴力
	クラス	チャンネル数
7mi	48ch	
3mi	24ch	
最大プログラム数*4		
対応リモコン		
使用電池/電池寿命(連続使用)		
販売名		

SP	
難聴レベル	高 ▶ 重 ~110dB
クラス	両耳価格 片耳価格
7mi	¥774,000 ¥430,000
3mi	¥432,000 ¥240,000
最大プログラム数*4	
6	
対応リモコン	
●ミニテック ●イージーポケット	
使用電池/電池寿命(連続使用)	
PR44 675 約350時間	
販売名	
補聴器 miconシリーズ	

※補聴器は非課税です

Nitro スーパーパワー耳あな型補聴器



MC
耳の奥にフィットする小型タイプ

CT/CT Twin
補聴器の定番カナルタイプ ツインマイク搭載タイプも

LS/LS Twin
重度難聴対応フルサイズ ツインマイク搭載タイプも

- 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ



- 選べるカラーバリエーション

フェイスプレートとシェルでそれぞれ色を選べます。(無料) 詳しくは39ページへ。

- アクアプロテクト NEW



オプション対応です。詳しくは40ページへ。

- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

製品名	MC/CT/LS		CT Twin/LS Twin	
	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格
クラス	中 ▶ 高 重	~100dB	両耳価格	片耳価格
7mi	48ch	¥846,000	¥882,000	¥490,000
3mi	24ch	¥468,000	¥504,000	¥280,000
最大プログラム数*4	6			
対応リモコン	●ミニテック ●イージーポケット (詳細は下記の表をご参照ください)			
使用電池/電池寿命(連続使用)	MC: PR536 10A 約90時間	CT: PR41 312 約130時間	LS: PR48 13 約220時間	
販売名	補聴器 miconシリーズ カスタム			

※補聴器は非課税です

オプション(無料)	MC		CT/CT Twin		LS/LS Twin	
	118/55	130/71	118/55	130/71	123/60	130/71
マトリックス(2cc)	●	●	●	●	●	●
適合聴力	80dBHL	100dBHL	80dBHL	100dBHL	90dBHL	100dBHL
環境スイッチ(メモリー)	●	●	●	●	●	●
ボリュームコントロール	—	—	●*1	●*1	●*1*2	●*1*2
テレコイル/オートフォン	—	—	—	—	●*2*3	●*2*3
リモコン・e2e機能	●	—	●	—	●	●

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります *2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません *3 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります *4 本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です *小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります ※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります ※オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります

匠の技を極めた工房
「アトリエ」
ワンランク上のプレミアムサービス
詳細は40ページをご覧ください。

こんな方におすすめ!

- 目立たない耳あな型補聴器が良い
- メガネをかけている
- 初めて補聴器を使う
- リモコンで操作したい
- 高度難聴でも耳あな型補聴器を使いたい

TRT ※耳鼻科医の診療が必要になります

名前刻印

「名前刻印」で、世界に1つだけのあなたの補聴器にしませんか?
※カタカナ・ひらがなで最大6文字まで刻印可能
※Aqualis及びAceは対象外です
※カラーによっては刻印ができないものもあります

オプション
¥2,160
(税込/1台につき)



※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,640税込)。

アクアプロテクト NEW

汗・水・湿気に強いIP57対応
水やホコリの多い環境でお使いの方や、スポーツなど、汗水に気を遣わないで過ごしたい方におすすめです。

オプション
¥6,000
(非課税/1台につき)
※CIC、CIC 312は対象外です



便利なりモコン

リモコンで音量調節などが手元で簡単にできます。



※対応リモコンの詳細は各器種のページを参照ください

抗菌加工で清潔
簡単お手入れ

表面に抗菌効果のある特殊なコーティングを施しているため、汚れが付着しても簡単にお手入れできます。



多くの方が愛用する耳あな型補聴器の定番

シーメンス補聴器の中でも小型で快適性を追求した耳あな型補聴器。オーダーメイド時にこもり感とピーピー音を最小に抑えるためのベストな形に調整。熟練した匠の手で、小型で快適にお使いいただける補聴器を一つひとつ丁寧に作り上げます。

実寸サイズの比較	シーメンス最小サイズ CIC P.41	小さくても電池長持ち CIC 312 P.41	リモコン対応 MC P.42
ビスタチオ			
特長	目立たない・軽い		
適合聴力	軽 ▶ 中	軽 ▶ 中	軽 ▶ 中
使用電池	10A 約80~90時間	312 約135~150時間	10A 約80~90時間

リモコン対応で電池長持ち MC 312 P.42	耳あな型の定番 CT/CT Twin P.43-P.44	ワンタッチ補聴器 COOL P.45-P.46	高度難聴まで対応 LS / LS Twin P.47-P.48
着脱しやすい・電池長持ち			
軽 ▶ 中	軽 ▶ 中 ▶ 高	軽 ▶ 中 ▶ 高	中 ▶ 高
312 約135~150時間	312 約125~150時間	312 約125~150時間	13 約216~250時間

※耳の大きさに合わせて成形するため、サイズが多少大きくなる場合があります

選べるカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

フェイスプレートとシェルでそれぞれお好きな色を選べます。(無料)

① シェル

耳の中に入る部分



① シェルの色を選ぶ



② フェイスプレート

外側に来る部分



② フェイスプレートの色を選ぶ

	CIC	CIC 312	MC	MC 312	CT/CT Twin	COOL	LS/LS Twin
ベージュ	—	標準	—	標準	標準	標準	標準
モカ	標準	—	標準	—	—	—	—
ダークブラウン	—	—	—	—	—	—	—
ブラック	—	—	—	—	—	—	—
ホワイト	—	—	—	—	—	—	—

Atelier
匠の技を極めた工房「アトリエ」
ワンランク上のプレミアムサービス

対象製品: Inσιο 7bx・Inσιο 7mi・Nitro 7mi

- 1 電池10パックサービス
- 2 再作2年間無料サービス*1
- 3 紛失保証(1年間)*1*2 (補聴器本体のみ)
- 4 アトリエ訪問*3
- 5 スピード修理サービス

*1・2・3の特典を受ける際は、プレミアム保証カードのご提示が必要です
*2 警察などの公的機関へ届出されたことを証明する信憑書類が必要となります *3 販売店での事前予約が必要です

は、アトリエサービス対応製品のマークです。



CIC

シーメンス最小サイズの耳あな型補聴器

パワータイプもございます

スマホアプリで
調節可能!



CIC

CIC 312

電池が1.6倍長持ち。取扱いも簡単です

パワータイプもございます

スマホアプリで
調節可能!



CIC 312

MC

リモコン対応の小型で目立たない補聴器

パワータイプもございます



MC



MC 312

リモコン対応で電池が1.6倍長持ち。取扱いも簡単です

パワータイプもございます



MC 312



製品名			CIC/CIC 312		CIC パワー/CIC 312 パワー	
難聴レベル		適合聴力	軽 ▶ 中 ~65dB		軽 ▶ 中 ~70dB	
クラス	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5bx NEW	32ch		¥594,000	¥330,000	¥612,000	¥340,000
3bx NEW	24ch		¥432,000	¥240,000	¥450,000	¥250,000
7mi	48ch	-	¥810,000	¥450,000	¥828,000	¥460,000
5mi	32ch	-	¥522,000	¥290,000	¥540,000	¥300,000
3mi	24ch	-	¥360,000	¥200,000	¥378,000	¥210,000

最大プログラム数 1 (binaxはタッチコントロールアプリ使用で6)

使用電池/電池寿命(連続使用) CIC : PR536 **10A** [binax]約80時間 [micon]約90時間 CIC 312 : PR41 **312** [binax]約135時間 [micon]約150時間

販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できない場合があります

※補聴器は非課税です

製品名			MC/MC 312		MC パワー/MC 312 パワー	
難聴レベル		適合聴力	軽 ▶ 中 ~65dB		軽 ▶ 中 ~70dB	
クラス	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト ●イージーポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5bx NEW	32ch		¥594,000	¥330,000	¥612,000	¥340,000
3bx NEW	24ch		¥432,000	¥240,000	¥450,000	¥250,000
7mi	48ch	●ミニテック ●イージーポケット	¥810,000	¥450,000	¥828,000	¥460,000
5mi	32ch		¥522,000	¥290,000	¥540,000	¥300,000
3mi	24ch		¥360,000	¥200,000	¥378,000	¥210,000

最大プログラム数** 6

使用電池/電池寿命(連続使用) MC : PR536 **10A** [binax]約80時間 [micon]約90時間 MC 312 : PR41 **312** [binax]約135時間 [micon]約150時間

販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

オプション(無料)

環境スイッチ(メモリー) ●

※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
**本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です



より良いつけ心地の
YOベント

先端がY、外側がOの形のベント(通気穴)。従来よりもこもり感を軽減したつけ心地の良いベントも選択可能です。
*全てのInσιοに対応



CT

多くの方が愛用する耳あな型補聴器の定番



CT パワー

CTのパワータイプです



CT Twin

後ろの雑音を抑えて前方の声をより聞きやすくするタイプ



CT Twin パワー

CT Twinのパワータイプです



製品名			CT		CT パワー	
難聴レベル	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5bx NEW	32ch	●イージーポケット	¥594,000	¥330,000	¥612,000	¥340,000
3bx NEW	24ch	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥432,000	¥240,000	¥450,000	¥250,000
7mi	48ch	●ミニテック	¥810,000	¥450,000	¥828,000	¥460,000
5mi	32ch	●イージーポケット	¥522,000	¥290,000	¥540,000	¥300,000
3mi	24ch		¥360,000	¥200,000	¥378,000	¥210,000

最大プログラム数** 6
使用電池/電池寿命(連続使用) PR41 312 [binax]約125時間 [micon]約150時間
販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

オプション(無料)	
環境スイッチ(メモリー)	●
ボリュームコントロール	●*1

*1ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム ※補聴器は非課税です(ストップエンド)になります
*小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
*耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
*オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります
**本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

製品名			CT Twin		CT Twin パワー	
難聴レベル	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト	¥882,000	¥490,000	¥900,000	¥500,000
5bx NEW	32ch	●イージーポケット	¥630,000	¥350,000	¥648,000	¥360,000
3bx NEW	24ch	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥468,000	¥260,000	¥486,000	¥270,000
7mi	48ch	●ミニテック	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5mi	32ch	●イージーポケット	¥558,000	¥310,000	¥576,000	¥320,000
3mi	24ch		¥396,000	¥220,000	¥414,000	¥230,000

最大プログラム数** 6
使用電池/電池寿命(連続使用) PR41 312 [binax]約125時間 [micon]約150時間
販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

オプション(無料)	
環境スイッチ(メモリー)	●
ボリュームコントロール	●*1

*1ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム ※補聴器は非課税です(ストップエンド)になります
*小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
*耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
*オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります
**本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

NEW COOL パワーアップ
サービス

標準タイプをご購入後、
パワータイプに作り直す
事(再作)ができます。
聴力変動後も安心して
COOLをお使いいただけます。
価格 ¥16,000(非課税/1台につき)
対象器種
binax/miconシリーズ・Orion・Sirionのみ

安心

日本人のアイデアが生んだ「ワンタッチ補聴器」

その斬新でクールなデザインは、耳あな型補聴器のまったく新しいカタチ。*購入者の5人に1人が「50代以下」の方で幅広い世代から支持されています。*また、従来の耳あな型補聴器と比べて、圧倒的に快適なつけ心地を実現。初めて補聴器を使う方や、おしゃれに使いたい方におすすめです。

*1 2014年12月時点、補聴器として(当社調べ)
*2 2012年当社調べ。シーメンス補聴器購入者データ




① ワンタッチで取り付けもつけ外しも簡単

つかみやすい独特のフォルムなので細かい作業が苦手な方でもワンタッチで着ける(外す)ことができます。

② 圧迫感が少なく快適な着け心地

オーダーメイドで、耳にぴったりはまるだけでなく耳の奥まで入らない構造なので、不快な圧迫感やムシがなく、快適な着け心地を実現します。

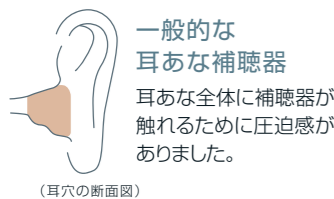

③ 風切り音防止メカニズム

マイクを耳のくぼみに隠すことで不快な風切り音を防止します。

④ ハウリング抑制設計

従来の耳あな型補聴器と違い、マイクとレシーバーを離すことで、不快なハウリング(ピーピー音)をより抑制します。



豊富なカラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる場合があります


COOL binax / micon / Orionはシェル12色。また、フェイスプレートも3色から選べます。(無料)

① シェル

COOL binax/micon/Orion シェルカラー

COOL binax/micon/Orion
フェイスプレートカラー

耳の中に入る部分

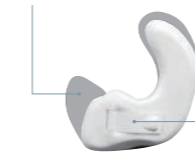

② フェイスプレート

外側に来る部分

※ベージュ以外のカラーをご注文の場合は、通常よりも納品までに時間がかかる場合があります
※ご購入後も¥31,000(非課税)でカラー変更ができます

製品名			COOL		COOL パワー	
難聴レベル	適合聴力		軽 ▶ 中 ~70dB		軽 ▶ 中 ▶ 高 ~80dB	
クラス	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト ●イージーポケット ◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5bx NEW	32ch		¥594,000	¥330,000	¥612,000	¥340,000
3bx NEW	24ch		¥432,000	¥240,000	¥450,000	¥250,000
7mi	48ch	●ミニテック ●イージーポケット	¥810,000	¥450,000	¥828,000	¥460,000
5mi	32ch		¥522,000	¥290,000	¥540,000	¥300,000
3mi	24ch		¥360,000	¥200,000	¥378,000	¥210,000

最大プログラム数*1 6
使用電池/電池寿命(連続使用) PR41 312 [binax]約125時間 [micon]約150時間
販売名 [COOL binaxシリーズ]補聴器 binaxシリーズ カスタム [COOL miconシリーズ]補聴器 miconシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

オプション(無料)	
オートフォン	●
環境スイッチ(メモリー)	○*2
ボリュームコントロール	○*2 *3

*1 リモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
*2 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けはできません
*3 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります



より良いつけ心地の
YOベント

先端がY、外側がOの形のベント(通気穴)。従来よりもこもり感を軽減したつけ心地の良いベントも選択可能です。
*全てのInσιοに対応



LS
高度難聴まで対応の耳あな型補聴器



LS パワー
LSのパワータイプです



LS Twin
高度難聴まで対応の耳あな型補聴器



LS Twin パワー
LS Twinのパワータイプです



製品名			LS		LS パワー	
難聴レベル	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5bx NEW	32ch	●イージーポケット	¥594,000	¥330,000	¥612,000	¥340,000
3bx NEW	24ch	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥432,000	¥240,000	¥450,000	¥250,000
7mi	48ch	●ミニテック	¥810,000	¥450,000	¥828,000	¥460,000
5mi	32ch	●イージーポケット	¥522,000	¥290,000	¥540,000	¥300,000
3mi	24ch		¥360,000	¥200,000	¥378,000	¥210,000

最大プログラム数** 6
使用電池/電池寿命(連続使用) PR48 **13** [binax]約216時間 [micon]約250時間
販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

オプション(無料)	
環境スイッチ(メモリー)	●
ボリュームコントロール	●*1*2
テレコイル	●*2*3
オートフォン	●*2

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム ※補聴器は非課税です(ストップエンド)になります
*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取りつけはできません
*3 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
※オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります
**本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です

製品名			LS Twin		LS Twin パワー	
難聴レベル	チャンネル数	対応リモコン	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格
7bx NEW	48ch	●イージーテックブースト	¥882,000	¥490,000	¥900,000	¥500,000
5bx NEW	32ch	●イージーポケット	¥630,000	¥350,000	¥648,000	¥360,000
3bx NEW	24ch	◎スマートフォン対応アプリ: タッチコントロール	¥468,000	¥260,000	¥486,000	¥270,000
7mi	48ch	●ミニテック	¥846,000	¥470,000	¥864,000	¥480,000
5mi	32ch	●イージーポケット	¥558,000	¥310,000	¥576,000	¥320,000
3mi	24ch		¥396,000	¥220,000	¥414,000	¥230,000

最大プログラム数** 6
使用電池/電池寿命(連続使用) PR48 **13** [binax]約216時間 [micon]約250時間
販売名 [binax]補聴器 binaxシリーズ カスタム [micon]補聴器 miconシリーズ カスタム

オプション(無料)	
環境スイッチ(メモリー)	●
ボリュームコントロール	●*1*2
テレコイル	●*2*3
オートフォン	●*2

*1 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム ※補聴器は非課税です(ストップエンド)になります
*2 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取りつけはできません
*3 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることも可能ですが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
※オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります
**本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です




Orionシリーズ オリオン

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う

TRT ※耳鼻科医の診察が必要になります

子供用アクセサリ (M・P・SP用)

オーディオシューキット	M、P用	SP用(子供用バッテリーアを含む)
	本体と同時に購入 ¥4,000(非課税) 本体購入後の取付* ¥10,000(非課税) *修理として補聴器をお預かりして加工します。	本体と同時に購入 ¥6,000(非課税) 本体購入後の取付* ¥12,000(非課税) *修理として補聴器をお預かりして加工します。
子供用バッテリードア 単体	M、P用	SP用
	本体と同時に購入 ¥600(非課税) 本体購入後の取付* ¥6,600(非課税) *修理として補聴器をお預かりして加工します。	本体と同時に購入 ¥2,000(非課税) 本体購入後の取付* ¥8,000(非課税) *修理として補聴器をお預かりして加工します。
スモールイヤフック		¥545(税込)

お手頃価格で選べるベーシックモデル

- Life チューブ (S/M/Pのみ)
- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ
- ツインマイク (耳あな型はTwinのみ対応)



(耳かけ型のみ) (耳かけ型のみ。Plus RICは除く)



※製品の色と形は印刷と異なる事があります

カラーバリエーション

Plus RIC、RICのみご購入後のカラー変更が可能です(¥6,000非課税)。Plus RIC、RIC以外は、ご購入後のカラー変更はできません。



製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	対応リモコン	使用電池/電池寿命 (連続使用)
Plus RIC <small>NEW</small>	軽 ▶ 中 ▶ 高 重	~100dB	¥306,000	¥170,000	24ch	6	●ミニテック ●イージーポケット	PR41 312 S:約160時間/M・P・HP:約135時間
RIC	軽 ▶ 中 ▶ 高 重	~100dB	¥216,000	¥120,000	16ch	4	●イージーポケット	
ミニ耳かけ型S	軽 ▶ 中	~65dB	¥234,000	¥130,000	16ch	4	●イージーポケット	PR41 312 約160時間
耳かけ型M	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥234,000	¥130,000	16ch	4	●イージーポケット	PR48 13 約255時間
耳かけ型P	中 ▶ 重	~100dB	¥252,000	¥140,000	16ch	4		PR48 13 約235時間
耳かけ型SP	高 ▶ 重	~110dB	¥270,000	¥150,000	16ch	4		PR44 675 約350時間

販売名 [Plus RIC]補聴器 Octiv(形式Octiv R+) [RIC、ミニ耳かけ型S、耳かけ型M、耳かけ型P、耳かけ型SP]耳かけ型:補聴器 ORION

※補聴器は非課税です

NEW 選べるカラーバリエーション 詳しくは46ページへ。



耳の奥にフィットする小型タイプ 補聴器の定番カナルタイプ 補聴器の新しいカタチ 高度難聴対応フルサイズ

装着イメージ

CT

LS

※カラーはベージュのみ
(COOLを除く)

- 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)



- 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

NEW COOL パワーアップ 安心サービス

詳しくは45ページへ。

製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数**	対応リモコン	使用電池/電池寿命 (連続使用)	
CIC / CIC 312	軽 ▶ 中	~65dB	¥270,000	¥150,000	16ch	1	-	CIC/MC PR536 10A 約90時間	
CICパワー / CIC 312パワー	軽 ▶ 中	~70dB	¥288,000	¥160,000	16ch	1	-		
MC / MC 312	軽 ▶ 中	~65dB	¥270,000	¥150,000	16ch	4	●イージーポケット	CIC 312/MC 312 PR41 312 約150時間	
MCパワー / MC 312パワー	軽 ▶ 中	~70dB	¥288,000	¥160,000	16ch	4			
CT	軽 ▶ 中	~70dB	¥270,000	¥150,000	16ch	4	●イージーポケット	PR41 312 約150時間	
CTパワー	軽 ▶ 高	~80dB	¥288,000	¥160,000	16ch	4			
CT Twin	軽 ▶ 中	~70dB	¥306,000	¥170,000	16ch	4			
CT Twinパワー	軽 ▶ 高	~80dB	¥324,000	¥180,000	16ch	4			
COOL	軽 ▶ 中	~70dB	¥270,000	¥150,000	16ch	4	●イージーポケット	PR41 312 約150時間	
COOLパワー	軽 ▶ 高	~80dB	¥288,000	¥160,000	16ch	4			
LS	中 ▶ 高	~80dB	¥270,000	¥150,000	16ch	4	●イージーポケット	PR48 13 約250時間	
LSパワー	中 ▶ 高	~90dB	¥288,000	¥160,000	16ch	4			
LS Twin	中 ▶ 高	~80dB	¥306,000	¥170,000	16ch	4			
LS Twinパワー	中 ▶ 高	~90dB	¥324,000	¥180,000	16ch	4			

販売名

耳あな型:補聴器 ORION カスタム

オプション(非課税):1台¥12,000 両耳¥21,600 両耳購入で片耳のみ¥10,800

	MC/MC 312	CT / CT Twin	COOL	LS / LS Twin
環境スイッチ(メモリー)	●	●*1	○*5	●*1
ボリュームコントロール	-	●*2	○*2*5	●*2*3
テレコイル	-	-	-	●*3*4
オートフォン	-	-	●	●*3

- *1 Twinタイプはご注文時に指定があれば、無料で取り付け可能です ※補聴器は非課税です
- *2 ワイヤレスありの場合はデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスの場合はアナログボリューム(ストップエンド)になります
- *3 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
- *4 リモコンなしでテレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
- *5 環境スイッチとボリュームコントロールは同時に取り付けられません
- **本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
- ※小型化のため、ノンワイヤレス仕様にすることもできますが、e2e(両耳間通信)とリモコン非対応になります
- ※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
- ※オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります

Sirionシリーズ

シリオン

こんな方におすすめ!

- 初めて補聴器を使う
- 価格重視で最新モデルが欲しい



子供用アクセサリ (M・P用)

オーディオシュキット
本体と同時購入 ¥4,000(非課税)
本体購入後の取付* ¥10,000(非課税)
*修理として補聴器をお預かりして加工します。

子供用バッテリードア単体
本体と同時購入 ¥600(非課税)
本体購入後の取付* ¥6,600(非課税)
*修理として補聴器をお預かりして加工します。

スモールイヤフック ¥545(税込)

お手頃価格で選べるバリューモデル

シーメンスのマイコン技術を受け継ぎながら、聞こえの良さも、使い勝手の良さも、お求めやすさもバランスよく兼ねそなえています。軽度から重度まで幅広い聴力に対応。

● Life チューブ

Life チューブに交換すると、周囲からより目立ちにくくなります。



● 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

● ツインマイク (耳かけ型のみ)

前方向の音にフォーカスし、他の角度から来る音を抑えるので話し相手との会話がスムーズになります。

● ナノコート (耳かけ型のみ)

表面も内部もナノレベルのコーティング。サビや水分による故障から守ります。



● 防水・防塵対応 (耳かけ型のみ)

汗・水・湿気に加え、砂やホコリにも強いIP67*対応の補聴器。

*水に浸しても影響がないよう保護(水深1m、30分)



カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

ご購入後のカラー変更はできません。

全機種共通 *03、04、05、06は各色+ダークグラナイトの2トーンカラーです



製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	使用電池/電池寿命(連続使用)
ミニ耳かけ型S	軽 ▶ 中	~65dB	¥180,000	¥100,000	12ch	4	PR41 312 約160時間
耳かけ型M	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥180,000	¥100,000	12ch	4	PR48 13 約255時間
耳かけ型P	中 ▶ 重	~100dB	¥198,000	¥110,000	12ch	4	PR48 13 約235時間
販売名	耳かけ型:補聴器 SIRION						

※補聴器は非課税です



耳の奥にフィットする小型タイプ

補聴器の定番カナルタイプ

補聴器の新しいカタチ

高度難聴対応フルサイズ (実物大)

● 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)



表面に抗菌効果のある特殊なコーティングを施しているため汚れが付着しても簡単にお手入れできます。

● 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

NEW COOL パワーアップ サービス 安心

詳細は45ページをご覧ください。

製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数**	使用電池/電池寿命(連続使用)
CIC / CIC 312	軽 ▶ 中	~65dB	¥216,000	¥120,000	12ch	1	CIC/MC PR536 10A 約90時間
CICパワー / CIC 312パワー	軽 ▶ 中	~70dB	¥234,000	¥130,000	12ch	1	
MC / MC 312	軽 ▶ 中	~65dB	¥237,600	¥132,000	12ch	4	CIC 312/MC 312 PR41 312 約150時間
MCパワー / MC 312パワー	軽 ▶ 中	~70dB	¥255,600	¥142,000	12ch	4	
CT	軽 ▶ 中	~70dB	¥216,000	¥120,000	12ch	4	PR41 312 約150時間
CTパワー	軽 ▶ 高	~80dB	¥234,000	¥130,000	12ch	4	
COOL	軽 ▶ 中	~70dB	¥237,600	¥132,000	12ch	4	PR41 312 約150時間
COOLパワー	軽 ▶ 高	~80dB	¥255,600	¥142,000	12ch	4	
LS	中 ▶ 高	~80dB	¥216,000	¥120,000	12ch	4	PR48 13 約250時間
LSパワー	中 ▶ 高	~90dB	¥234,000	¥130,000	12ch	4	

販売名 耳あな型: SIRION カスタム

オプション(非課税):1台¥12,000 両耳¥21,600 両耳購入で片耳のみ¥10,800

	MC/MC 312	CT	COOL	LS
環境スイッチ(メモリー)	●(標準搭載)	●	●(標準搭載)	●
ボリュームコントロール	-	●*1	-	●*1
テレコイル	-	-	-	●*2
オートフォン	-	-	●	-

*1 アナログボリューム(ストップエンド)になります
*2 同時に環境スイッチ(メモリー)も必要になります
**本体のプッシュボタンを利用した時に得られる最大プログラム数です
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションがつけられない場合があります
※オプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります

※補聴器は非課税です



※カラーはページのみ

こんな方におすすめ!

- 価格重視で基本性能を備えた補聴器が欲しい

基本性能を備えたベーシック対応の補聴器

価格重視で、基本性能を備えた耳かけ型・耳あな型補聴器。
快適な装用感と基本性能が毎日の聞こえをサポートします。



● ナノコート (耳かけ型のみ)

ナノレベルのコーティングが補聴器をサビや水分による故障から守ります。



● 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

※★のカラーは名前刻印対象外です
※製品の色と形は印刷と異なる場合があります

豊富なカラーバリエーション

ご購入後のカラー変更は¥6,000(非課税)です。



*フック部分も本体と同じカラーの場合があります。また、スケルトンカラーのバッテリーロッカーの色はすべてグラナイトとなり、写真と異なります


製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	使用電池/電池寿命(連続使用)
Life	軽 ▶ 中	チューブ: ~50dB イヤフック: ~60dB	¥162,000	¥90,000	4ch	1	PR41 312 約240時間
S Dir	軽 ▶ 中 ▶ 高	~80dB	¥122,400	¥68,000	4ch	4	PR48 13 約400時間
Dir	中 ▶ 高	~90dB	¥140,400	¥78,000	4ch	3	PR48 13 約400時間
SP Dir	高 ▶ 重	~110dB	¥176,400	¥98,000	4ch	3	PR44 675 約600時間

販売名

耳かけ型: シーメンス補聴器 INTUIS

※補聴器は非課税です

装用イメージ

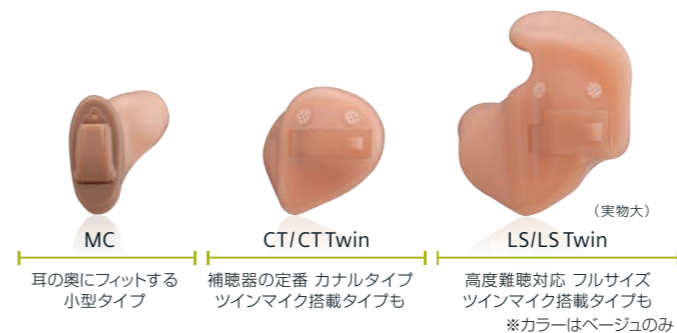

MC: 耳の奥にフィットする小型タイプ
CT/CTTwin: 補聴器の定番 カナルタイプ ツインマイク搭載タイプも
LS/LS Twin: 高度難聴対応 フルサイズ ツインマイク搭載タイプも
※カラーはベージュのみ

● 抗菌加工で清潔・簡単お手入れ (耳あな型のみ)

表面に抗菌効果のある特殊なコーティングを施しているため、汚れが付着しても簡単にお手入れできます。



● 名前刻印対応 名入れ対応 詳しくは16ページへ

製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	使用電池/電池寿命(連続使用)
MC	軽 ▶ 中	~60dB	¥176,400	¥98,000	4ch	1	PR536 10A 約130時間
CT	軽 ▶ 中	~70dB	¥176,400	¥98,000	4ch	4	PR41 312 約240時間
CTパワー	軽 ▶ 中	~75dB	¥194,400	¥108,000	4ch	4	
CT Twin	軽 ▶ 中	~70dB	¥212,400	¥118,000	4ch	4	PR41 312 約240時間
CT Twinパワー	軽 ▶ 中	~75dB	¥230,400	¥128,000	4ch	4	
LS *4	中 ▶ 高	~80dB	¥176,400	¥98,000	4ch	4	PR48 13 約460時間
LSパワー*4	中 ▶ 高	~90dB	¥194,400	¥108,000	4ch	4	
LS Twin*4	中 ▶ 高	~80dB	¥212,400	¥118,000	4ch	4	PR48 13 約460時間
LS Twinパワー*4	中 ▶ 高	~90dB	¥230,400	¥128,000	4ch	4	

販売名

耳あな型: シーメンス補聴器 INTUIS カスタム

※補聴器は非課税です

オプション(非課税): 1台¥12,000 両耳¥21,600 両耳購入で片耳のみ¥10,800

	CT CTパワー	CT Twin CT Twinパワー	LS LSパワー*4	LS Twin LS Twinパワー*4
環境スイッチ(メモリー)	●	● (標準)	●	● (標準)
ボリュームコントロール	● *3	—	● *1*3	● *1*3
テレコイル	—	—	● *1*2	● *1
オートフォン	—	—	● *1	● *1

- *1 テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません
 - *2 テレコイルを使う場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要となります
 - *3 Intuisのボリュームはアナログボリュームです
 - *4 LSはハーフサイズにすることができます。詳しくは販売員にお尋ねください
- ※コントロールオプションを複数取りつけた場合、形状が大きくなる場合があります
※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご希望のオプションがつけられない場合があります
※本体のプッシュボタンを利用した時に得られる最大プログラム数です

こんな方におすすめ!

- 価格重視でお求めやすい補聴器が欲しい

デジタルトリマー補聴器

お手頃価格でデジタルならではの澄んだ透明感のある音質を手に入れます。

① ダイヤル式アナログボリューム

簡単に音量調節ができます。 ※23Mのみ

② プッシュボタン

テレコイルモードに切り替えることができます。

③ ピーピーしにくい

耳障りなピーピー音を軽減するハウリングキャンセラーを搭載しており、より快適な聞こえをサポートします。

④ 名前刻印対応

詳しくは16ページへ



製品名	難聴レベル	適合聴力	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数*	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
23M	軽 ▶ 高	~80dB	¥68,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR48 13 約310時間
23P	中 ▶ 高	~90dB	¥78,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR48 13 約350時間
23SP	高 ▶ 重	~110dB	¥98,000	2ch	3	G.NH.MPO	PR44 675 約700時間

販売名 シーメンス補聴器 LOTUS

*最大プログラム数: 3P(M/T/MT) リモコン: 非対応 プログラムは固定で、マイク・テレコイル・マイク+テレコイル

製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
23MC	軽 ▶ 中	~60dB	¥176,400	¥98,000	2ch	1	NH.SSVC	PR536 10A 約130時間
23CT	軽 ▶ 中	~70dB	¥176,400	¥98,000	2ch	1	NH.NL	PR41 312 約200時間
23CTパワー	軽 ▶ 中	~75dB	¥194,400	¥108,000	2ch	1		
23LS	中 ▶ 高	~80dB	¥176,400	¥98,000	2ch	1	NH.NL.AO	PR48 13 約350時間
23LSパワー	中 ▶ 高	~90dB	¥194,400	¥108,000	2ch	1		

販売名 シーメンス補聴器 LOTUS カスタム

※補聴器は非課税です

こんな方におすすめ!

- スイッチや音量調整など細かい操作が苦手

両耳で聞くためのアクセサリやTV鑑賞用のアクセサリ類(別売)もごさいます

Pockettio用バイノーラルセット
DMP ¥8,640(税込)
DHP ¥10,800(税込)

Pockettio用テレビケーブルセット
¥1,620(税込)

製品名

DMP

DHP

販売名

簡単操作のポケット型補聴器

とにかく操作が簡単で、取扱いやすい補聴器。シーン別で選べる3つのプログラム(標準・騒音下・TV/音楽用)や自動雑音抑制、TV直結端子などでより快適な聞きとりをお手伝いします。

※別売のテレビケーブルセットをお使いください

① プログラム切換えボタン

シーンに合わせて3つのプログラム切り換えることができます。

② 音質調整トリマー

より聞きとりやすく調節することができます。

③ ボリュームつまみ

大きなスイッチやボリュームを手元で見ながらボタンに操作できます。電池は単3形で交換が容易です。



Pockettio

製品名	難聴レベル	適合聴力	価格	音質調整トリマー	使用電池/電池寿命(連続使用)
DMP	軽 ▶ 中 ▶ 高	~85dB	¥44,000	NH.NL.MPO	R6P(単3形) 約700時間
DHP	中 ▶ 高 ▶ 重	~100dB	¥62,000		

販売名 シーメンス補聴器 POCKETTIO

※補聴器は非課税です

SIEMENS XCEL COOLEZ

シーメンスエクセル
クールイージー

こんな方におすすめ!

- 価格重視
- 初めて補聴器を使う
- 補聴器をすぐに使いたい

製品名

SIEMENS XCEL COOL EZ

販売名

その日から使える既製型補聴器

アナログボリューム付き(ストップエンド)



SIEMENS XCEL COOL EZ

製品名	難聴レベル	適合聴力	両耳価格	片耳価格	チャンネル数	最大プログラム数	リモコン対応	使用電池/電池寿命(連続使用)
SIEMENS XCEL COOL EZ	軽 ▶ 中	~60dB	¥198,000	¥99,000	6ch	1	-	PR41 312 約150時間

販売名 シーメンス補聴器 MOTION カスタム

※補聴器は非課税です

テレビや音楽、携帯電話など
全ての接続がボタン1つで実現。
更に操作が簡単に、スマートになりました。



■ ボタンを押すだけ! テレビの音ははっきり聞こえる!

イージーテックブーストやミニテックを経由して、テレビの音声を直接補聴器に届けるので、明瞭な音声で聞くことができます。テレビ本体の音量とは別の音量で聞けるので、ご家族に気がねなく、聞くことができます。



ボタンを押すだけ!
カンタン!

クリアな音声で楽しめる!



イージーテックブースト
テレビバック



■ 電話をかける/受ける がカンタンに!

イージーテックブーストとミニテックは、電話のやり取りが格段に簡単でスマートになりました。着信→通話→終話までの全てをボタン1つでできます。



電話がかかってきたら……

1 補聴器が着信音を出して、電話がかかってきたことをお知らせします。

2 ボタンを押すだけで通話スタート。電話相手と会話ができます。

3 ボタンを押して終話。

携帯電話はポケットに
しまっておいても大丈夫です。

イージーテックブースト &
パイナックス補聴器



リモコン

easyTek boost

イージーテックブースト

かんたん!
イージーテックブーストでできること

映画や音楽、携帯電話の受信を、手元で簡単に。

バイナックス
binax 専用



リモコン

miniTek

ミニテック

かんたん!
ミニテックでできること

映画や音楽、携帯電話の受信などを、手元で簡単に。

マイコン エクセル
miCON XCEL 用



製品名	価格(税込)	サイズ
easyTek boost イージーテックブースト	¥41,040	高さ49 横幅49 奥行き12(ミリ)コードの長さ:約700(ミリ)

製品名	価格(税込)	サイズ
miniTek ミニテック	¥43,200	高さ61 横幅45 奥行き15.5(ミリ) (トランスミッター 1台付属)

テレビ視聴 | イージーテックブーストでテレビの視聴をご希望の際は
テレビの取扱説明書をご確認の上、こちらをお求めください。

イージーテックブーストテレビパック※1
(内容物:イージーテックブースト + ボイスリンク) **¥54,000(税込)**

※1 ヘッドホンとスピーカーから同時に別音量で音が出せるテレビ用(2012年以降の多くのテレビはこちらです)
また、ヘッドホンを押すとスピーカーが止まるか、ヘッドホン端子がないテレビで、光デジタル音声出力があるテレビは別途テレビキットが必要です

※テレビ視聴の際、ヘッドホンを押すとスピーカーが止まるか、ヘッドホン端子がないテレビで、光デジタル音声出力があるテレビは別途テレビキットが必要です

つなぐだけでTVのサウンドを楽しめる!



※2 3.5mmステレオソケットの直接入力により接続

つなぐだけでTVのサウンドを楽しめる!



※2 2.5mmステレオソケットの直接入力により接続

リモコン

easyPocket

イージーポケット

かんたん!
イージーポケットでできること
音量調節やプログラム切替が手元で簡単に。

バイナックス マイコン エクセル
binax **miCON** **XCEL** 用



スマートフォン用 アプリ

全てのiPhone*1と
Android(アンドロイド)携帯に対応

*1 ミニテックリモートアプリを除く



製品名	価格(税込)	サイズ
easyPocket イージーポケット	¥21,600	高さ92.5 横幅42.5 奥行き17.5(ミリ)



全機種共通リモコン対応補聴器一覧(スマートフォン用アプリ含む)

Pure	Carat	Ace	Life	Aquaris	Motion P/S	Insio (耳あな型)						Nitro		Orion	Sirion	XCEL COOL EZ	Intuis	Lotus
						CIC	MC	CT	CTTwin	COOL	LS	LS Twin	耳あな型					
●	●	▲*1	●	●	●	▲*4	●	●	●	●	●	●	●	▲*3	—	—	—	—

*1 タッチコントロールアプリのみ使用可能 *2 マトリックス130/71はLS/LS Twinのみ対応 *3 OrionはeasyPocketのみ対応(miniTek・easyTek boostは非対応) *4 Insio binaxのみ
ご注意 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください。
 *外部機器(テレビ・携帯音楽プレイヤーなど)がステレオ仕様の場合、補聴器を両耳装着することにより、**ステレオ音質でお楽しみいただけます**
 * easyTek boostとminiTekはテレビ2台まで接続できます * easyTek boostとminiTekはFM受信機が接続できます * ④マークはBluetoothによるワイヤレス通信です
 * 固定電話との接続に別売電話アダプターTA12Sが必要です

バイナックス binax 専用

イージーテックアプリ*2

イージーテックアプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンがイージーテックブーストの画面に早がわかります。
このアプリだけでは補聴器を操作できません。別途、イージーテックブーストが必要です。



*2 binaxのみ、Android Ver.2.3以上、iOS7.0以上に対応

タッチコントロールアプリ*3

タッチコントロールアプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンが簡単リモコンになります。
イージーテックブースト無しで使えます。



*3 binaxのみ、Android Ver.2.3以上、iOS7.0以上に対応

マイコン エクセル miCON XCEL 用

ミニテックリモート アプリ

Androidに対応したミニテック専用アプリをインストール(無償)すれば、あなたのスマートフォンがミニテックの画面に早がわかります。
このアプリだけでは補聴器を操作できません。別途、ミニテックが必要です。



できること	プログラム切替	音量調節	音質調節	ミュート	マニュアル指向性	電池残量	ボイスリンク使用
イージーテックアプリ	●	●	●	●	●	●	●
タッチコントロールアプリ	●	●	●	●	×	×	×
ミニテックリモート アプリ	●	●	●	●	×	×	●

■ 性能一覧 [耳かけ型]

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※数値は代表的な仕様によるものです
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※電池寿命は使用状況によって変わります

形式	フィッティングレンジ	最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ボリューム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*5}	適合聴力(平均dBまで)	保証期間(年) ^{*6}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)	
		1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)								
Pure,Carat,Ace 7bx・5bx・3bx 共通性能 7mi・5mi・3mi 共通性能	Pure 7bx(S/M/P/HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108/121/126/136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本,リモ	6	60/75/90/100	2(+1)	PR41	S約148/M・P・HP約125
	Pure 7mi(S/M/P/HP)		43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108/121/126/136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本,リモ	6	60/75/90/100	2(+1)	PR41	S約160/M・P・HP約135
	CARAT 7bx (S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 54 / 63 / 82	53 / 69 / 75 / 83	108/122/126/136	124 / 132 / 136 / 142	74 / 85 / 91 / 100	本,リモ	6	60/75/90/100	2(+1)	PR48	約235/216/216/216
	ACE 7bx (S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高	44 / 50 / 58 / 61 ^{*1}	54 / 63 / 67 / 72	108/114/119/118 ^{*1}	121 / 127 / 130 / 135	—	リモ ^{*7}	6	60/70/80/90	2(+1)	PR536	約96/80/80/80
Life 7mi・5mi・3mi 共通性能	LIFE 7mi	軽 ▶ 中	52(56) ^{*3}	65(57) ^{*3}	126(114) ^{*3}	135(130) ^{*3}	—	本*,リモ *両耳装用時	6	60(チューブ) 80(フック)	2(+1)	PR41	約160
Motion 7bx・5bx・3bx 7mi・5mi・3mi 501XCL 共通性能	MOTION 7bx PX+	中 ▶ 高 重	65(57)	76(68)	127(117)	143(135)	98(86)	本,リモ	6	80(チューブ) 100(フック)	2(+1)	PR48	約216
	MOTION 7mi P		66(59) ^{*3}	76(70) ^{*3}	127(117) ^{*3}	143(135) ^{*3}	98(87) ^{*3}	本,リモ	6	80(チューブ) 100(フック)	2(+1)	PR48	約230
	MOTION 501 XCL P+	中 ▶ 重	69(52) ^{*3}	76(67) ^{*3}	128(117) ^{*3}	140(134) ^{*3}	98(81) ^{*3}	本,リモ(7/5/3)	5	100	2(+1)	PR48	約250
	MOTION 7bx SA		60(55)	67(63)	134(121)	142(134)	85(76)	本,リモ	6	65(チューブ) 85(フック)	2(+1)	PR48	約216
	MOTION 7mi SX+	軽 中 ▶ 高	60(53) ^{*3}	67(60) ^{*3}	132(120) ^{*3}	142(134) ^{*3}	92(81) ^{*3}	本,リモ	6	65(チューブ) 85(フック)	2(+1)	PR48	約250
	MOTION 501 XCL SX		60(56) ^{*1*3}	65(61) ^{*3}	133(125) ^{*1*3}	142(135) ^{*3}	89(80) ^{*3}	本,リモ(7/5/3)	5	85	2(+1)	PR48	約230
Aquaris 7mi・5mi・3mi 共通性能	AQUARIS 7mi	軽 中 ▶ 高	66(56) ^{*3}	74(58) ^{*3}	130(116) ^{*3}	142(132) ^{*3}	—	リモ	6	70(チューブ) 90(フック)	2(+1)	PR48	約216
Orion Orion Plus 共通機能	ORION RIC ^{*9} (S / M / P / HP)	軽 中 ▶ 高 重	43 / 55 / 62 / 82	54 / 69 / 73 / 84	108 / 121 / 126 / 136	122 / 132 / 136 / 142	72 / 83 / 96 / 115	本,リモ *Sはリモコンのみ	4 ^{*8}	60 / 75 / 90 / 100	2(+1)	PR41 / PR48 / PR48 / PR44	S約160 / M・P・HP約135
	ORION (S / M / P / SP)		49 / 59 / 68 / 74	63 / 66 / 74 / 82	129 / 133 / 129 / 136	133 / 142 / 143 / 150	— / 88 / 96 / 105			65 / 85 / 100 / 110			約160/255/235/350
Sirion	SIRION (S / M / P)	軽 中 ▶ 高 重	49 / 59 / 68	63 / 66 / 74	129 / 133 / 129	133 / 142 / 143	— / 88 / 96	本(M/P)	4	65 / 85 / 100	2(+1)	PR41 / PR48 / PR48	約160 / 255 / 235
Intuis	INTUIS S DIR	軽 中 ▶ 高	63 ^{*1}	64	132 ^{*1}	137	92	—	4	80	2(+1)	PR48	約400
	INTUIS DIR	中 ▶ 高	70 ^{*1}	70	138 ^{*1}	143	101	本	3	90	2(+1)	PR48	約400
	INTUIS SP DIR	高 ▶ 重	77 ^{*1}	83	135 ^{*1}	146	104	本	3	110	2(+1)	PR44	約600
	INTUIS LIFE	軽 ▶ 中	51(43) ^{*1*3}	57(47) ^{*3}	126(117) ^{*1*3}	132(125) ^{*3}	—	—	1	50(チューブ) 60(フック)	2(+1)	PR41	約240
Lotus	LOTUS 23 M	軽 ▶ 中	58	66	132	143	88	本	M/T/MT	80	2(+1)	PR48	約310
	LOTUS 23 P	中 ▶ 高	63	72	130	141	97	本	M/T/MT	90	2(+1)	PR48	約350
	LOTUS 23 SP	高 ▶ 重	69	80	136	146	103	本	M/T/MT	110	2(+1)	PR44	約700
Nitro 7mi・3mi 共通性能	NITRO 7mi SP	高 ▶ 重	74	82	136	150	105	本,リモ	6	110	2(+1)	PR44	約350

*1 規準周波数は2500Hzです *2 Pオプション付きの性能を表示しています *3 ()はライフチューブでの数値です
 *4 ボリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オプ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能

*5 最大プログラム数:本体のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
 *6 保証期間:(+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください
 *7 タッチコントロールアプリのみ
 *8 Orion Plus RICは6です
 *9 Orion Plus RICの形式はOctiv R+です

■ 性能一覧 [耳あな型]

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※数値は代表的な仕様によるものです
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※電池寿命は使用状況によって変わります

形式	フィッティングレンジ	最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ボリューム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*5}	適合聴力(平均dBまで)	保証期間(年) ^{*6}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)	
		1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)								
Insio 7bx・5bx・3bx 7mi・5mi・3mi 共通性能 Orion Sirion	INSIO 7bx CIC ^{*2} INSIO 7mi CIC ^{*2} Orion/Sirion CIC ^{*2}	軽 ▶ 中	52	60	116	128	—	—	1 ^{*8}	70	2(+1)	PR536	約90 約80(binax)
	INSIO 7bx CIC 312 ^{*2} INSIO 7mi CIC 312 ^{*2} Orion/Sirion CIC 312 ^{*2}	軽 ▶ 中	43	54	118	130	—	—	1 ^{*8}	70	2(+1)	PR41	約150 約135(binax)
	INSIO 7bx MC ^{*2} INSIO 7mi MC ^{*2} Orion/Sirion MC ^{*2}	軽 ▶ 中	52	60	116	128	—	リモ ^{*7} (7/5/3/Orion)	6 4(Orion/Sirion)	70	2(+1)	PR536	約90 約80(binax)
	INSIO 7bx MC 312 ^{*2} INSIO 7mi MC 312 ^{*2} Orion MC 312 ^{*2} Sirion MC 312 ^{*2}	軽 ▶ 中	43	54	118	130	—	リモ ^{*7} (7/5/3/Orion)	6 4(Orion/Sirion)	70	2(+1)	PR41	約150 約135(binax)
	INSIO 7bx CT ^{*2} INSIO 7mi CT ^{*2} Orion/Sirion CT ^{*2}	軽 ▶ 中	52	64	118	130	—	オフ、 リモ(7/5/3/Orion)	6 4(Orion/Sirion)	80	2(+1)	PR41	約150 約125(binax)
	INSIO 7bx CT TWIN ^{*2} INSIO 7mi CT TWIN ^{*2} Orion CT TWIN ^{*2}	軽 ▶ 中	52	64	118	130	—	オフ、 リモ(7/5/3/Orion)	6 4(Orion)	80	2(+1)	PR41	約150 約125(binax)
	COOL INSIO 7bx COOL ^{*2} INSIO 7mi COOL ^{*2} Orion/Sirion COOL ^{*2}	軽 ▶ 中	52	64	118	130	80	オフ、 リモ ^{*7} (7/5/3/Orion)	6 4(Orion/Sirion)	80	2(+1)	PR41	約150 約125(binax)
	INSIO 7bx LS ^{*2} INSIO 7mi LS ^{*2} Orion/Sirion LS ^{*2}	中 ▶ 高	62	69	127	136	91	オフ、 リモ(7/5/3/Orion)	6 4(Orion/Sirion)	90	2(+1)	PR48	約250 約216(binax)
	INSIO 7bx LS TWIN ^{*2} INSIO 7mi LS TWIN ^{*2} Orion LS TWIN ^{*2}	中 ▶ 高	62	69	127	136	91	オフ、 リモ(7/5/3/Orion)	6 4(Orion)	90	2(+1)	PR48	約250 約216(binax)

*1 規準周波数は2500Hzです *2 Pオプション付きの性能を表示しています *3 ()はライフチューブでの数値です
 *4 ボリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オフ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能

*5 最大プログラム数: 本社のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
 *6 保証期間: (+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください *7 Sirionは不可 *8 binaxはタッチコントロールアプリ使用で6

■ 性能一覧 [耳あな型]

※このデータはJIS C 5512:2000に基づいて測定されています ※数値は代表的な仕様によるものです
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※電池寿命は使用状況によって変わります

形式	フィッティングレンジ	最大音響利得		最大出力音圧レベル(dB)		誘導コイル感度(dB)	ボリューム ^{*4}	最大プログラム数 ^{*5}	適合聴力(平均dBまで)	保証期間(年) ^{*6}	使用電池	電池寿命(連続使用)(h)	
		1600Hz	ピーク	1600Hz	ピーク(以下)								
Intuis	INTUIS CT(TWIN)	軽 ▶ 中	50 ^{*1}	55	127 ^{*1}	134	—	オブ ^{*8}	4	70	2(+1)	PR41	約240
	INTUIS CTP(TWIN)	軽 ▶ 中	56 ^{*1}	61	127 ^{*1}	134	—	オブ ^{*8}	4	75	2(+1)	PR41	約240
	INTUIS LS(TWIN)	中 ▶ 高	62 ^{*1}	66	130 ^{*1}	137	—	オブ	4	80	2(+1)	PR48	約460
	INTUIS LSP(TWIN)	中 ▶ 高	66 ^{*1}	70	130 ^{*1}	137	—	オブ	4	90	2(+1)	PR48	約460
	INTUIS MC	軽 ▶ 中	54 ^{*1}	57	122 ^{*1}	129	—	—	1	60	2(+1)	PR536	約130
Lotus	LOTUS CT	軽 ▶ 高	47	58	121	133	—	本	1	70	2(+1)	PR41	約200
	LOTUS LS	中 ▶ 高	60	68	128	138	—	本	1	80	2(+1)	PR48	約350
	LOTUS MC	軽 ▶ 中	42	48	114	125	—	本	1	60	2(+1)	PR536	約130
Nitro micon 7mi・3mi 共通性能	NITRO 7mi MC	中 ▶ 高 重	74	76	135	142	—	—	6	100	2(+1)	PR536	約90
	NITRO 7mi CT (TWIN)	中 ▶ 高 重	74	78	137	142	—	オブ	6	100	2(+1)	PR41	約130
	NITRO 7mi LS (TWIN)	中 ▶ 高 重	78	78	137	142	—	オブ、リモ	6	100	2(+1)	PR48	約220
Pockettio	Pockettio DMP	軽 中 ▶ 高	58 ^{*1}	62	124 ^{*1}	138	—	本	3	85	2(+1)	R6P(単3形)	約700 ^{*7}
	Pockettio DHP	中 高 ▶ 重	78 ^{*1}	83	133 ^{*1}	146	—	本	3	100	2(+1)	R6P(単3形)	約700 ^{*7}

*1 規準周波数は2500Hzです *2 Pオプション付きの性能を表示しています *3 ()はライフチューブでの数値です
 *4 ボリューム 本:補聴器本体にボリューム付き/オブ:本体オプションでボリューム取付可能/リモ:リモコンでボリューム利用可能

*5 最大プログラム数: 本社のプッシュボタンやリモコンを利用した時に得られる最大プログラム数です
 *6 保証期間: (+1)は弊社の「1年安心修理サービス」です。詳細は裏表紙をご覧ください *7 アルカリ電池 *8 Twinにはオプションが付けられません

■ 機能比較表 [Pure / Carat / Ace / Life / Aquaris / Motion P / Motion S / Insiol / Motion (耳あな型) / Orion / Sirion / Nitro / Intuis / Lotus / COOL EZ共通]

	機能	機能説明	binax シリーズ <small>NEW</small>			micon シリーズ			501 XCEL	Orion Plus RIC <small>NEW</small>	Orion	Sirion	Intuis	Lotus	COOL EZ
			7bx	5bx	3bx	7mi	5mi	3mi							
聞こえ	マルチチャンネル方式	聞こえの帯域を複数に分割、より細かい調整が可能	48ch	32ch	24ch	48ch	32ch	24ch	12ch	24ch	16ch	12ch	4ch	2ch	6ch
	自動音量調節	環境に応じ、自動で音量を心地よい大きさに調節	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	スピーチ&ノイズマネージメント	言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
	eスピーチ処理システム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
雑音抑制	サウンドスムージング	突発的に響くような衝撃音を抑制	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	eウィンドスクリーン	風雑音を抑制	■	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○ ^{※15}	—	○
	ハウリングストッパー	不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	—	—	○
	ハウリングキャンセラー		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—
指向性	ビーム指向性	両耳装用で正面の音だけフォーカス	○ ^{※12}	○ ^{※12}	○ ^{※12}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ワンマイク指向性	両耳装用で正面の音にフォーカス	○ ^{※20}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	スピーチフォーカス	前後左右、声の方向に自動的にフォーカス	■ ^{※1}	○ ^{※1}	—	○ ^{※1}	○ ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—	—
	トゥルーイヤール	耳介効果で裸耳に近い臨場感	○	○	○	○ ^{※1}	○ ^{※1}	—	○	—	—	—	—	—	—
	アダプティブ	移動する雑音も抑制して、より静かに	○ ^{※1} アダプティブ48バンド	○ ^{※1} アダプティブ32バンド	○ ^{※1} アダプティブ24バンド	○ ^{※1} アダプティブ48バンド	○ ^{※1} アダプティブ32バンド	○ ^{※1} アダプティブ24バンド	○ アダプティブ4バンド	○ アダプティブ11バンド	○ ^{※1} 自動1バンド	—	—	—	—
	マニュアル指向性(幅)	両耳使用時に指向性の幅を手動で調節	○ ^{※12}	○ ^{※12}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	マニュアル指向性(方向)	両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要easyTek boost)	■ ^{※12}	○ ^{※12}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	パワーエンハンス	後ろの雑音を抑えて静かに	○ ^{※1}	○ ^{※1}	—	○ ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	固定指向性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ ^{※15}	—	—
	高機能	12kHz広帯域	12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	○	—	—	○ ^{※13}	—	—	—	—	—	—	—	—
周波数圧縮		高い音を聴野に入れて聞き取りやすくする	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
e2eワイヤレス		両耳が常に通信しあい、聞きやすくする	◎ ^{※2}	◎ ^{※2}	◎ ^{※2}	◎ ^{※2}	◎ ^{※2}	◎ ^{※2}	○	○	○ ^{※2}	—	—	—	—
プログラム数		利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	6	6	6	6	6	5	6	4	4	4 ^{※3}	3 ^{※18}	1
サウンドイコライザー		数パターンの音環境で最適な音質に自動切替	6環境	3環境	—	6環境	3環境	—	—	—	—	—	—	—	—
学習機能	サウンドラーニング 3	環境別に好みの音を記憶、自動再現	○ ^{※7}	—	—	○ ^{※7}	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	サウンドラーニング 2	・サウンドラーニング3 : 18個の環境で再現	—	○ ^{※7}	—	—	○ ^{※7}	—	—	—	—	—	—	—	—
	サウンドラーニング	・サウンドラーニング2 : 9つの環境で再現 ・サウンドラーニング : 3つの環境で再現	—	—	○ ^{※7}	—	—	○ ^{※7}	—	—	—	—	—	—	—
	データラーニング	・データラーニング : ボリューム操作を自動再現	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	データロギング	・データロギング : 記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
利便さ	オートフォン™	受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※14}	—	○ ^{※19}	—	—
	テレコイル	ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○ ^{※8}	○	○ ^{※8}	○ ^{※11}	○ ^{※10}	○ ^{※21}	○ ^{※17}	—
	オーディオインプット	テレビ、ラジオ、聴覚機器などをつなぐ端子 ※ 別売のオーディオシュー、オーディオコードが必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ ^{※16}	○ ^{※17}	—
リモコン	easyTek boost	binax専用。小型で簡単操作。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	miniTek	micon・XCEL専用。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	—	—	—	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○	○	—	—	—	—	—
	easyPocket	大きなボタンと液晶表示で使いやすい	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○ ^{※2}	○	○	○ ^{※2}	—	—	—	—

※1 シングルマイクの耳あな型には非搭載
 ※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICとACEには搭載できません
 ※3 タイプによって異なります
 ※4 Pure・Life・Aquarisには非搭載/耳あな型はオプションで取付可能(LSのみ)
 ※5 Pure・Lifeには非搭載/耳あな型はオプションで取付可能(LSのみ)
 ※6 オプションで取付可能(LSのみ)

※7 リモコンまたは本体ボリュームが必要(耳あな型はオプションで取付可能)
 ※8 PureとCarat、Orion Plus RIC、Motionは標準。Insiolはオプションで取付可能(LSのみ)。AquarisとLifeは非搭載
 ※9 ベーシックモードでのみ使用可能
 ※10 耳かけ型MとPは標準。LSはオプション
 ※11 RICと耳かけ型MとPは標準。LSはオプション
 ※12 リモコン対応のTwinマイク商品を両耳使用した場合のみ

※13 Nitroを除く
 ※14 耳かけ型は非搭載。耳あな型のLSとCOOLにのみオプション対応
 ※15 Lifeおよびシングルマイクの耳あな型には非搭載
 ※16 耳かけ型(Life/Sを除く)に搭載
 ※17 耳かけ型のみ搭載
 ※18 プログラムは固定で、マイク、テレコイル、マイク+テレコイル/耳かけ型のみ

※19 耳あな型はオプションで取付可能(LSのみ)
 ※20 シングルマイクの耳あな型のみ
 ※21 Lifeには非搭載/耳あな型はオプションで取付可能(LSのみ)
 ■ リモコン対応の指向性マイク(Twinマイク)商品を両耳使用するとより強力な両耳eウィンドスクリーン、スピーチフォーカス360°になります(Aceを除く)