


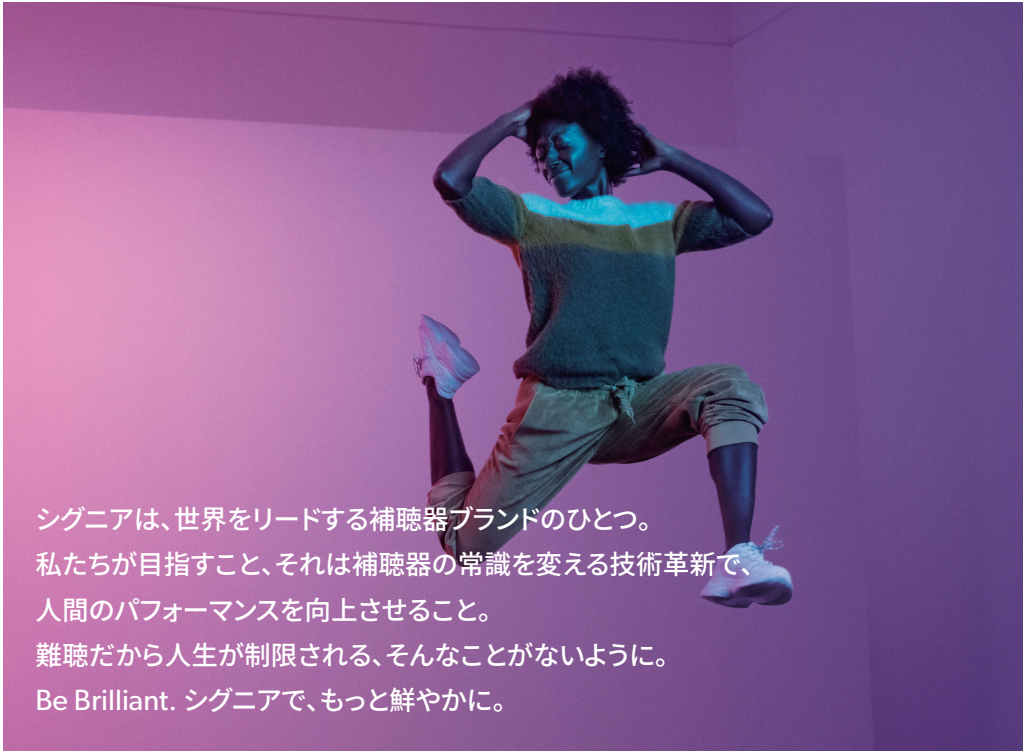

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。
私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、
人間のパフォーマンスを向上させること。
難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。
Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。

なぜ人々は今日の目まぐるしく変化する世界で快適さを探し求めるのか。
スマートフォンからスポーツシューズまで、
最適なアクセサリーを見つけることで、最高のパフォーマンスを発揮できる。

聞こえも同じ。最適な選択があなたを輝かせる。

革新的なイヤフォン型補聴器Signia Active ProとActiveは、
ノイズをカットし、より高いレベルの聞こえを実現。
会話を聞き漏らすかもという心配は、もう必要ない。



iFデザインアワード2021
受賞デザイン



<販売名>補聴器 Signia Active

シバントス株式会社 〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

■ 個人のお客様専用窓口
「シグニア補聴器」お客様コールセンター
営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)
Tel: 0800-888-0303
Tel: 046-289-0303 Fax: 046-407-1133

■ 販売店様専用問合せ窓口
カスタマーサービス
営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)
Tel: 0800-222-4133 Fax: 0800-888-4133
Tel: 046-409-4133 Fax: 046-407-1133
販促物注文専用Fax: 050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。その場合は通常の電話番号までお問い合わせください

シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

個人のお客様向けサイト
www.signia.net/ja-jp

個人のお客様向けメールマガジン
www.signia.net/ja-jp/service/newsletter

www.facebook.com/SigniaHearingJapan/

公式YouTube シグニアTV

www.instagram.com/signiahearingjapan

6.6
6月6日は補聴器の日

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2021年6月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。21.06.JP.17001303


AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi (チー) は、Wireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



signia

イヤフォン型補聴器
Signia Active Pro/Active



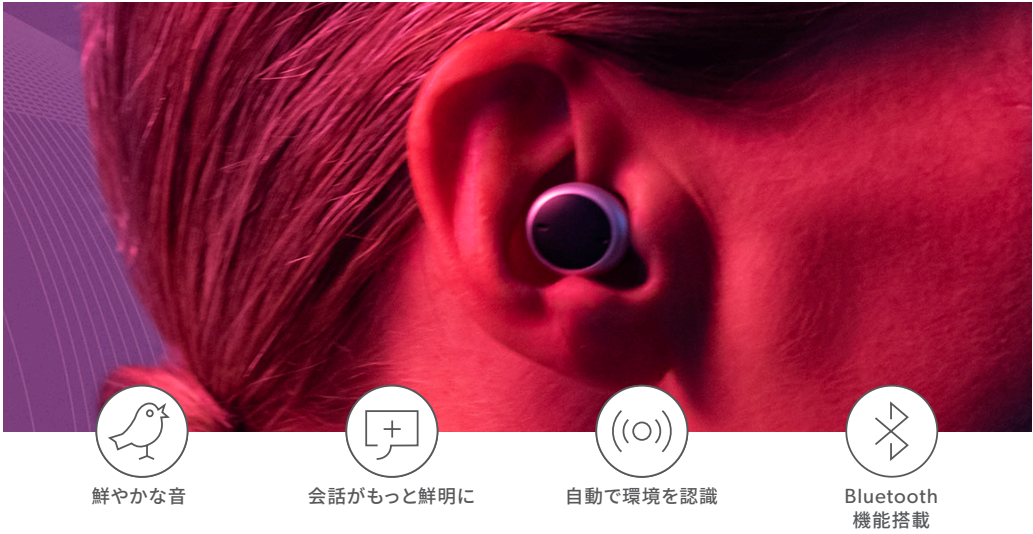

鮮やかな音
シグニア補聴器最先端テクノロジー搭載。
聴力に合わせて周波数帯ごとに音を細かく調整し、
あなたの聞こえに最適な音声処理を実現。

会話がもっと鮮明に
雑音をしっかりカットし、360°の音をよりクリアに
よりリアルに。

自動で環境を認識
超広角の音響センサーが周囲の環境を把握し、
自動的に最適な音に調整。
50シーン対応であなたのチャレンジをサポート。

Bluetooth接続
スマホの通話・音楽・テレビ※1の音声を直接Bluetoothで耳にお届け。※2
聞き取りづらい環境でより高いレベルの聞こえを実現。



※1 TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。アンドロイドスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります
※2 リモコンやアプリによるプログラム切り替えが必要です



シグニア アプリ
Signia appでスマートフォンがリモコンに
シグニア提供の無料アプリで、
スマートフォンが補聴器リモコンに早変わり、
さりげなく音量調節や補聴器の状態の確認ができる。
マスクモードをONにすれば、マスク越しの会話もさらに聞きやすく。

シグニア アシスタント
Signia Assistantでいつでも聞こえをAIサポート
世界初!人工知能(AI)技術を活用した補聴器使用支援システム。
Signia appを開き、Signia Assistantと対話形式でやり取り
するだけで、あなたの好みや環境に合った音に調節可能。
24時間、365日自動対応でいつでも使えるから安心。

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。
補聴器を購入した販売店にご相談ください
※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします

取り扱いやすい充電式

補聴器をQi規格対応充電ケースに入れて、
ケースごとQi充電パッドに置くだけで充電可能。
もちろんUSBケーブルでの充電も可能。
蓄電機能付きのポータブル充電ケースだから、
外出先でもケースだけでらくらく充電。

※3 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります
※4 市販のQi規格対応の充電パッドをご使用ください。充電パッドをご使用の場合、ケースの充電時間の目安は5時間ですが、ご使用の充電パッドの種類により異なる場合があります



- 充電・使用時間の目安**※3
- 補聴器の**フル充電**
充電時間 4時間
使用可能時間 26時間
 - 補聴器の**スピード充電**
充電時間 30分
使用可能時間 5時間
 - 充電ケース**の充電
USB充電 3時間
ワイヤレス充電 5時間※4



すぐにフィット
軟らかい素材のスリーブで快適なつけ心地。
どんな耳でもフィットしやすい4サイズから選べる。
耳あなに沿ったカーブ形状でつけ心地抜群。

性能一覧
※このデータはJIS C 5512:2015 (2ccカブラで測定)で表示しています
※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

形 式	性 能			使用電池	電池寿命※6 (連続使用) (h)
	最大音響利得 (dB) HFA-FOG (±5dB以内)	90dB入力最大出力音圧レベル (dB) 最大値 (+3dB以下)	適応聴力 (平均dBまで)		
Signia Active Pro Signia Active	39	118	70	充電	フル充電約26

搭載機能

機 能	機能説明	Active Pro	Active
超広角センサー	超広角音響センサーはより多種多様な環境音を収集する	■■■■■	■■■■■
チャンネル数	高いチャンネル数ほど静かではっきりとした音質に	48	16
プログラム数	利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用 等)	6	4
12kHz広帯域	12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	✓	—
エコーシールド※2	ワンワン響く反響音をしっかり抑える	✓	—
ハイレゾ音楽※2	カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード	—
eウィンドスクリーン	風雑音を抑制	✓	—
スピーチ&ノイズマネジメント	言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化	✓	✓
サウンドスムージング	突発的に響くような衝撃音を抑制	✓	—
ハウリングストッパー	不快なビービー音(ハウリング)を抑制	✓	✓
耳鳴り治療機能 TRT ※7		✓	—
保証	修理保証期間中は無料で修理※8 保証期間後は定額修理スマートリペアプラン	2年 修理保証 + イヤホン・ヘッドホン 保証※9	2年 修理保証 + イヤホン・ヘッドホン 保証※9

※5 完全防水ではありません。 ※6 電池寿命は使用状況によって変わります
※7 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず耳鼻科専門医にご相談ください
※8 補聴器本体に自然故障が生じた場合