

# Be Brilliant™

シグニア補聴器 総合カタログ

2022年3月版



signia

# Be Brilliant™

シグニアは、世界をリードする補聴器ブランドのひとつ。

私たちが目指すこと、それは補聴器の常識を変える技術革新で、人間のパフォーマンスを向上させること。

難聴だから人生が制限される、そんなことがないように。

Be Brilliant. シグニアで、もっと鮮やかに。



The succession of 140 years

1878

Phonophor

ベルナー・フォン・  
シーメンスが  
難聴者向けの特別な  
電話受信器を發明

1913

シーメンス最初の補聴器  
最初は難聴の従業員と  
家族向けに製造



1951

Phonophor Alpha  
真空管アンプを使用した  
ポケットサイズの補聴器



1959

Auriculina 326  
シーメンス初の  
耳かけ型補聴器

1966

Siretta 339  
シーメンス初の  
耳あな型補聴器



2011

Aquaris  
シーメンス初の  
防水・防塵補聴器



SIEMENS COOL  
補聴器の  
新しいカタチ





## シグニア補聴器 難聴への取り組み

2022

シグニア エーエックス

**Signia AX**

世界初<sup>※</sup>、2つの頭脳で  
言葉と環境音を別々に処理する  
ダブルプロセッサ補聴器。  
賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。  
※2021年4月、WSオーディオロジー  
グループ調べ

2020

シグニア エクスぺリエンス

**Signia Xperience**

世界初<sup>※</sup>、Xセンサー搭載。  
超広角センサーと  
モーションセンサーの両方を備えた、  
いつでもどこでもその場に適した  
音をお届けする補聴器。  
※2019年10月、シバントスグループ調べ

2018

シグニア エヌエックス

**Signia Nx**

追求したのは会話の楽しさ。  
補聴器は「聞く」から  
「会話を楽しむ」ツールへ。

2016

プライマックス

**primax<sup>★</sup>**

シグニアブランド初の補聴器。  
「日本語をしっかりと。楽に。」  
日本を元気にする  
プライマックス。

Stylettoシリーズ

もう補聴器と呼ばない。  
数々のデザイン賞を受賞した  
革新的なスリム充電式登場。



Motion Charge&Go SPX  
世界初<sup>※</sup>、重度難聴対応の  
スーパーパワータイプ  
充電式耳かけ型補聴器。  
※2021年1月、WSオーディオロジー  
グループ調べ



## 業界をリードする 豊富な充電式補聴器 ラインナップ

Insio Charge&Go AX  
シグニア初の充電式オーダーメイド  
耳あな型補聴器。  
ワイヤレス充電で取り扱い簡単。



ワイヤレス充電式補聴器

**Cellion**

リチウムイオン充電電池の  
Cellionの登場で、  
充電式補聴器が  
一気にメインストリームに。



シグニア補聴器は、シーメンスの140年以上の歴史を継承しています。  
革新的な技術の積み重ねは、信頼の証。  
確かな品質と共に、お客様に寄り添う誠実なブランドであり続けます。

## INDEX

○ 補聴器を選ぶ前に	
140年以上の歴史	1
聞こえること・難聴のこと	3
補聴器のこと	5
補聴器の種類	7
補聴器のシリーズ、クラスと機能	9
おすすめ補聴器	11
○ Signia AX	
Signia AX テクノロジー	17
Signia AX 7AX	19
Signia AX 5AX	21
Signia AX 3AX	23
AX用充電器とアクセサリ	25
○ Signia Xperience	
Signia Xperience テクノロジー	27
Signia Xperience 7X	29
Signia Xperience 5X	31
Signia Xperience 3X	33
Signia Xperience 2X・1X	35
○ Signia Nx	
Signia Nx 7Nx・5Nx・3Nx	37
Signia Nx 2Nx・1Nx	39
○ その他補聴器ラインナップ	
primax <sup>*</sup>	41
Intuis3	42
Prompt/Fun	43
○ アプリ・アクセサリなど	
アクセサリ・補修パーツ	44
アプリ・リモコン	45
ケアソリューション	47
イヤモールド	48
CROS/BICROS補聴システム	49
○ 性能一覧・カラーバリエーション	
RIC型・耳かけ型カラーバリエーション	51
RIC型・耳かけ型性能一覧	53
耳あな型性能一覧・オプション	55
機能比較表	57
おすすめラインナップ性能表	59
安心保証とスマートリペアプラン	60

補聴器の種類

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション・  
性能一覧

# 聞こえのこと 難聴のこと

## 聞こえのチェック

● こんなことありませんか？


- 自動車の中での話が、よく聞き取れない
- 人の話し声が小さいように感じる
- 周りの人から、テレビの音が大きいと言われる
- 携帯電話の呼び出し音に気付かないことがある
- 人と会話をするのが面倒に感じる

● こんな聞き間違いありませんか？

- しちじ(7時)      —>      いちじ(1時)
- しろい(白い)    —>      ひろい(広い)
- たかな(高菜)    —>      さかな(魚)

該当する場合は  
聴力が低下しているかもしれません

## 耳の構造と役割

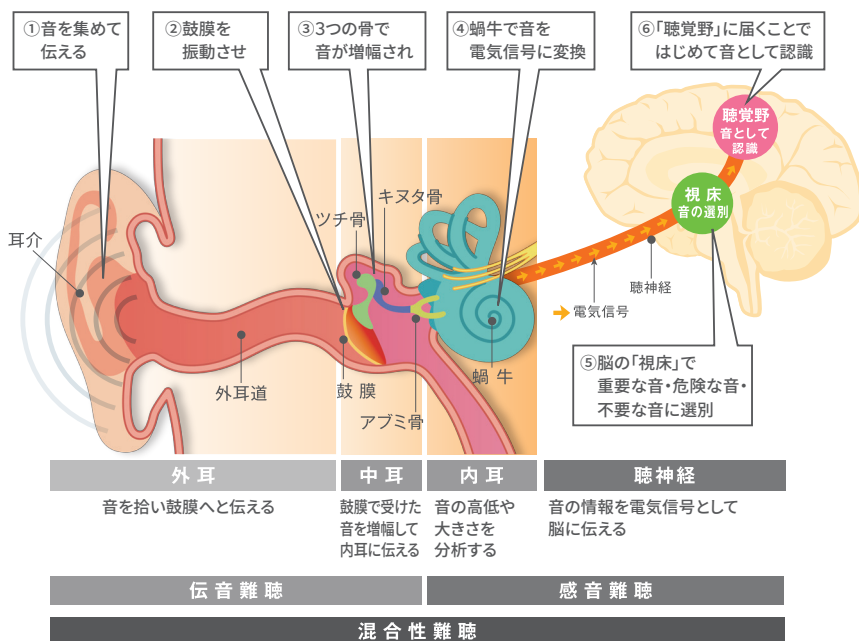


難聴の種類	解説	
伝音難聴	中耳炎や鼓膜の損傷・病気などが原因で、音が伝わりにくくなることによる難聴。	医学的に治療できるケースも。難聴が残る場合は補聴器を使う事もある。
感音難聴	加齢や病気、長時間騒音下にいることなどが原因の難聴。	医学的治療では治らず、補聴器を使うケースも。難聴レベルや周りの状況によっては、補聴器を装着しても聞き取りが困難なケースもある。
混合性難聴	伝音難聴と感音難聴の両方が同時に起こる難聴。	



# 加齢による聴力低下

- 難聴は年を重ねるにつれ、誰にでも起こりうるもの。
- 聴力の低下は30代からすでに始まっている。
- 難聴が進むと高い音から聞きづらくなり、聞こえる音が減っていく。
- 加齢性難聴は自分では気付きにくい。

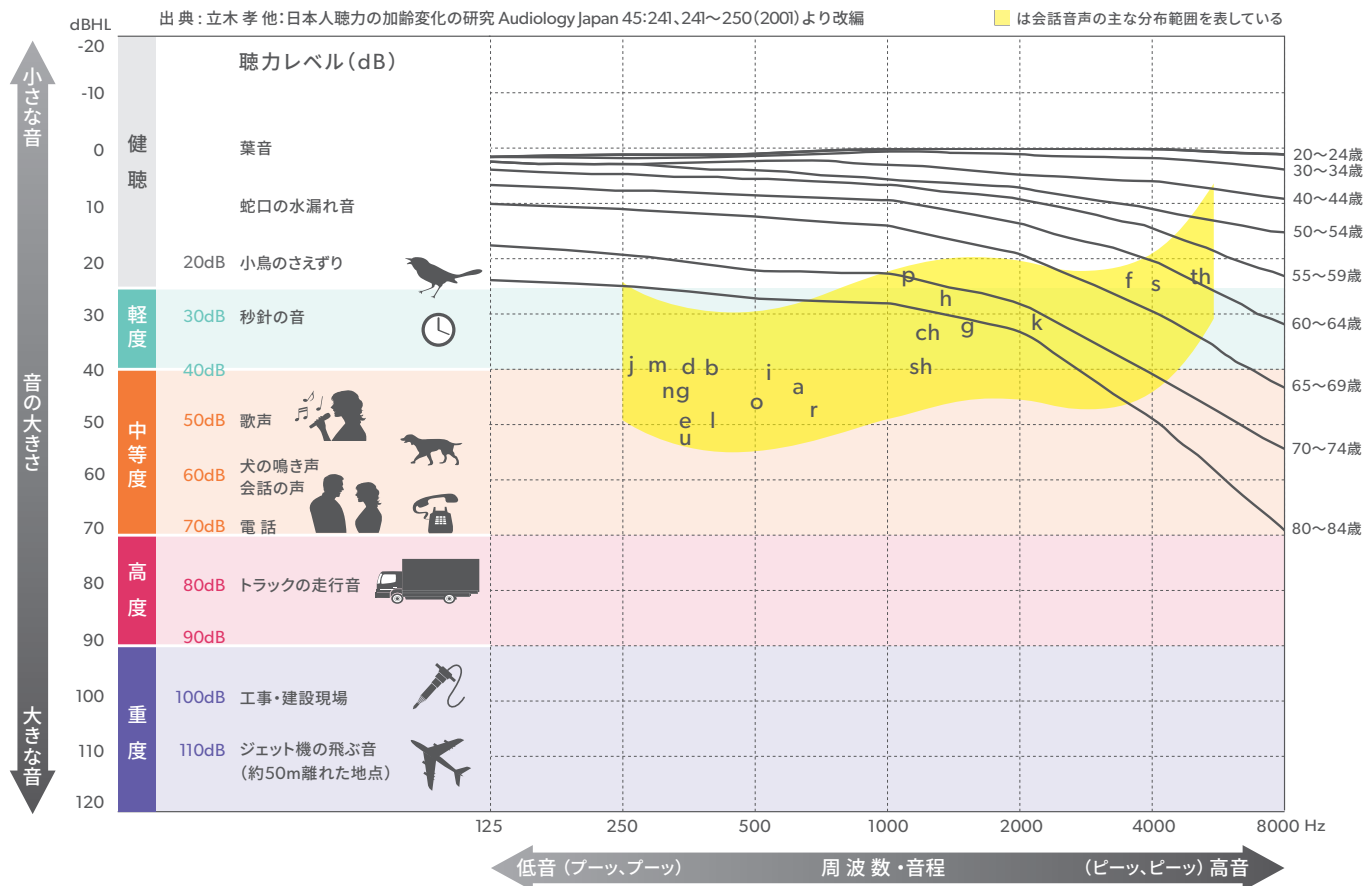

## ● 聞こえの目安

軽度	中等度	高度	重度
25dBHL~40dBHL	40dBHL~70dBHL	70dBHL~90dBHL	90dBHL以上
<ul style="list-style-type: none"> <li>・小さな声やささやき声が聞き取りにくい</li> <li>・テレビの音が大きいと言われる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通の会話が聞きづらい</li> <li>・自動車がそばに来て初めて気づく</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大きな声でも聞きづらい</li> <li>・大きな声でも聞き間違いが多い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・耳元での大きな声も聞きづらい</li> </ul>

# 補聴器のこと

## 補聴器はなぜ必要？

難聴の場合、早いタイミングで適切な補聴器をつけると、いろいろなメリットがある。

### ● より良い コミュニケーション

音がよく聞こえるようになると、家族や友人と話をすることが楽しくなる。



### ● 人間関係と 心の健康

人生100年時代。コミュニケーション不足によって人間関係が疎遠になるのを防ぎ、あなたの新しい挑戦を応援する。



### ● 生活上の 危険の回避

音で周囲の状況を把握し、危険を未然に防ぐのを助けてくれる。



### ● 音で脳に良い 刺激を与える

聴覚刺激を増やすことで、「楽しい」「うれしい」などの情動を引き起こし脳機能を活性化できるといわれている。




## 補聴器購入の流れ




聞こえの状態や悩み、生活スタイルを確認



聴力のレベルを測定

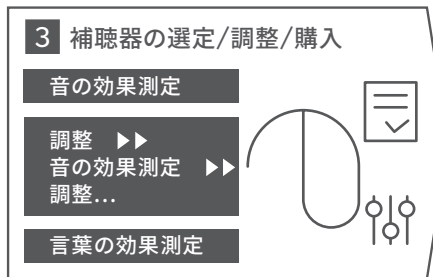

聴力測定の結果を元に、一人ひとりの聴力や希望に合うように補聴器を調整

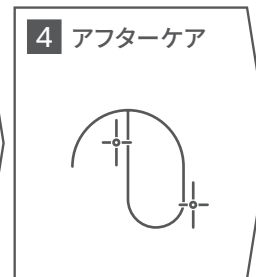

購入後も定期的に補聴器の調整や点検を行う



## 両耳装用のすすめ

●音の方向がわかりやすい



●騒音下での聞きとりが良い



●疲れにくいから長く使える



## 使いこなすにはトレーニングと調整が重要



補聴器で再び聞こえ出した音に脳が慣れるまでには時間がかかる。



最初の数ヶ月間<sup>※</sup>は聞こえ方が変化。



毎日つけてトレーニングすることが大事。



定期的にお店に通い、その時の聞こえに一番合うように調整してもらう。



補聴器使用開始

補聴器を調整しながら徐々に慣れていく




補聴器使用前

トレーニング期間

数ヶ月後<sup>※</sup>

聞こえのイメージ

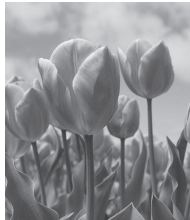

脳は聞こえない状態に慣れてしまったため、静かな環境が当たり前と感じている。

いままで気にしてなかった音が急に聞こえるようになるので、うるさく感じることもある。

毎日いろいろな場所で音を聞き、少しずつ脳が音に慣れていく。

補聴器を使いこなしてコミュニケーションを楽しめるようになる。

※3～6ヶ月が目安

# 補聴器の種類

## 補聴器の形状による分類



RIC型・耳かけ型



耳あな型





## 使用電池による分類

- 充電式補聴器
- ・取り扱い簡単
- ・電池交換の手間不要

形状	SLIM RIC型	RIC型	耳かけ型				
特徴		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 取り扱いカンタンな充電タイプも!</li> <li>● 機能が豊富でオールインワン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 幅広い聴力に対応し聴力が低下しても安心</li> <li>● 多彩なカラーバリエーションで楽しめる</li> </ul>				
装着イメージ	チュープが細く目立ちにくい		持ちやすく着け外しが簡単				
使用電池	充電	充電	電池	充電			電池
作り方	既製品						
対応シリーズ	Signia <b>X</b> perience Signia <b>Nx</b>	Signia <b>AX</b> Signia <b>X</b> perience Signia <b>Nx</b>	Signia <b>X</b> perience Signia <b>Nx</b>	Signia <b>X</b> perience Signia <b>Nx</b>			Signia <b>Nx</b>
代表機種	Styletto X	<b>NEW</b> Pure Charge&Go AX	Pure 312 X	Motion Charge&Go X	Motion Charge&Go P X (パワー)	Motion Charge&Go SP X (スーパーパー)	Motion 13 Nx Motion 13P Nx (パワー)
適応聴力	<p>聴力範囲: 30 (軽度) ~ 110 (重度) dBHL</p> <p>対応機種: Sレシーバー, Mレシーバー, Pレシーバー, チューブ, イヤフック</p>						






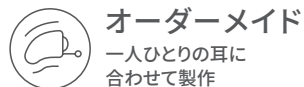
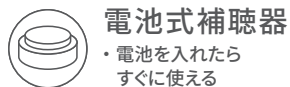


## 作り方による分類



### 耳あな型

- 小型器種はより小さく、目立ちにくい
- 耳あなに挿れるので外れにくく、汗に強い
- マスクやメガネ、帽子の邪魔にならない

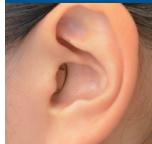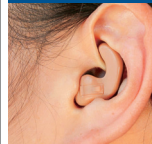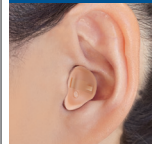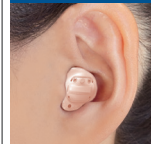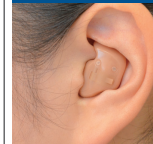
<b>ワイヤレス充電ITC</b>  フルスペックのワイヤレス充電式耳あな型	<b>ワイヤレス充電ITE</b> 	<b>Silk・IIC・CIC</b>  目立たない	<b>COOL</b>  ワンタッチで 着け心地快適	<b>ITC</b>  定番サイズ	<b>ITC TWIN</b>  Bluetooth搭載 選択可能	<b>ITE</b>  高度難聴対応
---	--	---	--	--	---	---

充電

電池

オーダーメイド	既製品	オーダーメイド
<b>Signia AX</b>	Signia Xperience	<b>Signia Nx</b>

<b>NEW</b> Insio Charge&Go AX  ワイヤレス充電ITC    ワイヤレス充電ITE	Insio NX  Silk X    IIC    CIC	 COOL  ITC  ITC TWIN  ITE TWIN
---	--	--

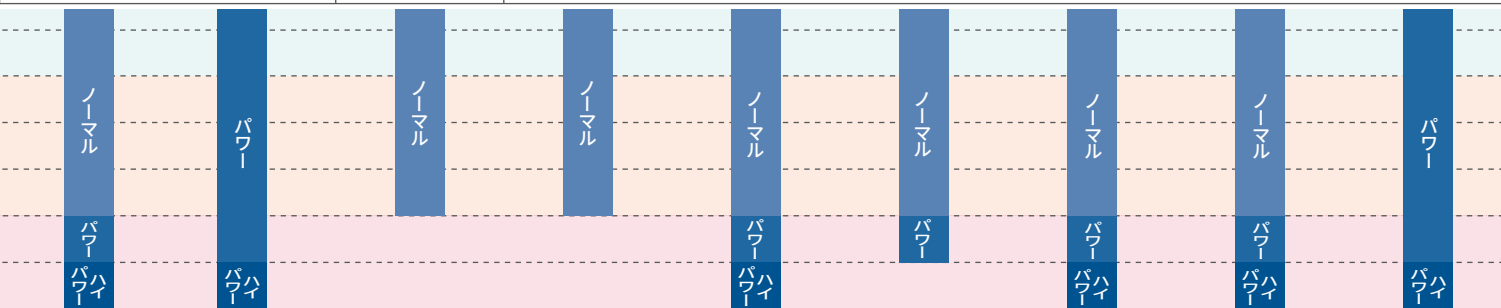

平均聴力+10dB程度の余裕がある形状をお選びください  
※個人差があるため当てはまらない場合があります

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

性能一覧・  
カラーバリエーション

# 補聴器のシリーズ クラスと機能

## シリーズ

基本性能の違いにより2大シリーズに分かれています。  
あなたに合う最適なシリーズを選びましょう。

シグニアが誇る最上位機種

























シグニア エーエックス

Signia AX

世界初<sup>\*</sup>、2つの頭脳で言葉と環境音を  
別々に処理するダブルプロセッサー補聴器。  
※2021年4月、WSオーディオロジックグループ調べ

シグニア エクスぺリエンス  
Signia Xperience

世界初<sup>\*</sup>、Xセンサー搭載。どこにいても、  
何をしても、最適な音をあなたに。  
※2019年10月、シバントスグループ調べ

各シリーズの対応クラス	故障や紛失時に	きめ細かい 聞こえ	テレビ・スマホ <input checked="" type="checkbox"/>	屋内 <input checked="" type="checkbox"/>	屋外 <input checked="" type="checkbox"/>	グループ活動・買い物 <input checked="" type="checkbox"/>
 Signia Xperience	保証 <sup>*1</sup>	チャンネル <sup>*2</sup>	 Bluetooth <sup>*3</sup>	 突発音抑制	 風雑音抑制	  Xセンサー（環境・動き認識） 超広角センサー <sup>*6</sup> モーションセンサー <sup>*6</sup>
<b>7</b> プレミアム シグニア補聴器の最上位クラス	3年 修理保証  2年 紛失保証	48ch				 
<b>5</b> アドバンス ワンランク上の聞こえを実感	3年 修理保証  2年 紛失保証	32ch				 
<b>3</b> スタンダード テレビや電話もクリアに聞こえる	2年 修理保証  1年 紛失保証  <small>3AX、3Xのみ1年紛失保証に対応</small>	24ch				 
<b>2</b> ベーシック 基本性能を重視	2年 修理保証	16ch				 
<b>1</b> バリュー 基本性能を搭載	2年 修理保証	16ch				 

\*1 詳しくは60ページに記載 \*2 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch

\*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要



# クラス


搭載機能の違いにより5つのクラスに分かれています。  
高いクラスほど活用できる場面がひろがります。

7      5      3      2      1  
 プレミアム   アドバンス   スタンダード   ベーシック   バリュー

## Signia AX

# 各シリーズの共通性能

● きめ細かい聞こえ チャンネル数が多いほど、より静かでハッキリとした音質に近づきます。

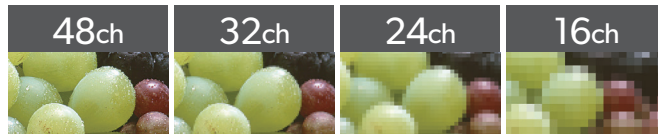

● 日本語がしっかり・楽に聞こえる

楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
<b>ダブルプロセッサー</b>	<b>ライブサウンド</b> <sup>*4</sup>	<b>OVP</b> <sup>*5 *6</sup> <small>両耳</small>	<b>ビーム指向性</b> <sup>*6</sup> <small>両耳</small>	<b>パワーエンハンス</b> <sup>*7</sup>	<b>スピーチフォーカス</b> <sup>*6</sup>	<b>反響音抑制</b> <sup>*8</sup>	<b>スピーチフォーカス360</b> <sup>*6</sup> <small>両耳</small>	<b>12kHz</b> <b>12kHz帯域対応</b> <sup>*9</sup>

\*4 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください  
 \*5 Insio Charge&Go AXは非対応 \*6 Silk Xは非対応 \*7 Silk Xは両耳装着で対応  
 \*8 Signia Xperienceの5クラスは非対応  
 \*9 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応

※各機能の詳細は巻末の機能比較表をご参照ください

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧



# おすすめ 充電式補聴器



シングニア最先端ダブルプロセッサー搭載  
フルスペック充電式耳あな型補聴器



## インシオ チャージ&ゴー Insio Charge&Go AX

実寸大



ワイヤレス充電ITC

軽 中 高

ノーマル：113/50~70dB

パワー：118/55~80dB

ハイパワー：124/65~90dB



ワイヤレス充電ITE

軽 中 高

パワー：118/55~80dB

ハイパワー：124/65~90dB



HS (ハーフサイズ)

ITEを可能な範囲で  
小さく製作

オプション



あなたの耳にあわせて丁寧に製作、  
オーダーメイドだから抜群のフィット感。



扱いやすいサイズで着け外し簡単。  
マスクやメガネの邪魔にもなりにくい。



充電器にポンと置いたら充電できる、  
ワイヤレス充電で扱いがラクラク。



本体の操作だけでテレビの音声を聞いたり、\*1  
プログラム切替ができるので便利。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、  
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。\*2



耳あな型最高の防水性能IP68搭載、  
汗かきや水仕事でも安心。

充電器



充電器の詳細については25ページをご確認ください。カラーバリエーションは55ページをご確認ください。

クラス	保証	チャンネル	Xセンサー(環境・動き認識)					
			Bluetooth*2	突発音抑制	風雑音抑制	超広角センサー	モーションセンサー	ダブルプロセッサー
7AX	3年 修理保証 2年 聴力保証	48ch	○	○	○	○	○	○
5AX	3年 修理保証 2年 聴力保証	32ch	○	○	○	○	○	○
3AX	2年 修理保証 1年 聴力保証	24ch	○	○	○	○	○	○

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

\*1 TV視聴は別途StreamLine TVが必要 \*2 iPhoneは直接音声を送受信することが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声を送受信することが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声送受信するには別途StreamLine Micが必要



## 電池交換不要で手間いらず

- わずらわしい電池交換が不要
- 電池の買い忘れ心配なし



## 汗水に安心

- 高い防水性と防塵性
  - 国際保護等級最高位のIP68
- ※完全防水ではありません





## シェル形状選択の目安

### 内部部品ユニット:

高速演算やワイヤレス充電を司る、補聴器内部で大きな容積を占めるパーツです。内部部品ユニットが耳のくぼみに収まるかを確認することにより、製作するシェル形状の目安となります。

実寸大

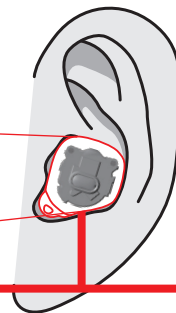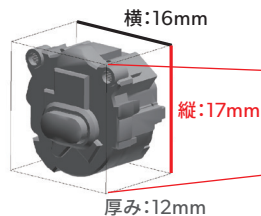

## 従来の電池式ITC



内部部品ユニットが耳のくぼみに収まる場合


## ワイヤレス充電ITC



※耳の形状によっては、仕上がりがくぼみに収まりきらない場合があります

内部部品ユニットが耳のくぼみに収まらない場合

## ワイヤレス充電ITE

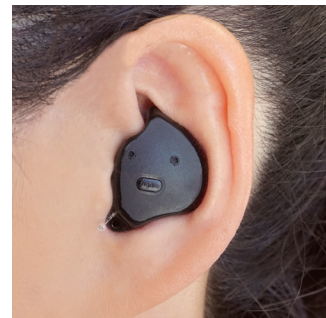

※可能な範囲で小さく製作するHS(ハーフサイズ)もあります

## 機能

	両耳	両耳				両耳	12 kHz	両耳価格*	片耳価格*
ライブサウンド	OVP	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応	¥1,144,000	¥594,000
○	—	○	○	○	○	○	○	¥824,000	¥434,000
○	—	○	○	○	○	—	—	¥564,000	¥304,000
○	—	○	—	—	—	—	—		

〈販売名〉補聴器 AXシリーズ カスタム

採寸ゲージ  
内部部品ユニット  
サイズの目安

縦17mm

横16mm





シグニア最先端のテクノロジー Signia **AX** 搭載  
ダブルプロセッサーでより楽な聞こえを実現

**New** ピュア チャージ&ゴー  
**Pure Charge&Go AX**



Bluetooth  
軽 中 高 重  
S: ~60dB M: ~75dB  
P: ~90dB HP: ~100dB

コンパクトなのにフル充電で28時間も使用可能。

iPhoneもAndroidスマートフォンも、  
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。<sup>\*2</sup>  
Signia app対応、スマートフォンが補聴器のリモコンに。

選べる充電器でさらに取り扱いが簡単。  
ーポータブル充電ケースは蓄電機能付きで両耳4回フル充電できる。  
ー乾燥・除菌機能付きドライ&クリーン充電器も選択可能。

選べる充電器



ポータブル充電ケース



ドライ&クリーン充電器



充電器、充電ケースの詳細については25ページをご確認ください。カラーバリエーションは51ページをご確認ください。

〈販売名〉補聴器 AXシリーズ

クラス	保証	チャンネル	機能							
			Bluetooth <sup>*2</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識)	Signia <b>AX</b> のみ対応	両耳		
			Bluetooth <sup>*2</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	超広角センサー	モーションセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP
7AX/7X	3年 2年	48ch	○	○	○	○	○	○	○	○
5AX/5X	3年 2年	32ch	○	○	○	○	○	○	○	○
3AX/3X	2年 1年	24ch	○	○	○	○	○	○	○	○
2X	2年	16ch	○	○	○	○	—	—	—	—
1X	2年	16ch	○	—	—	○	—	—	—	—

\*1 2021年1月、WSオーディオロジーグループ調べ \*2 Bluetooth搭載機種はTV・スマートフォンの音声を補聴器に転送して聞くことが可能。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ。AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要





充電式耳かけ型 Motion Xシリーズ  
世界初\*1、110dBまでの重度難聴に対応する  
充電式スーパーパワータイプも含む3器種

モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go X



モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go P X



モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go SP X



[カラー バリエーション] 3器種とも6色展開



充電時間	30分 スピード充電		4時間 フル充電	
	X	6時間	24時間	
P X	7時間	30時間		
SP X	4時間	61時間		

使用可能時間の目安



〈販売名〉補聴器 Xシリーズ

						Pure Charge&Go AX		Motion Xシリーズ	
両耳	両耳	両耳	両耳	両耳	12 kHz	両耳 価格*	片耳 価格*	両耳 価格*	片耳 価格*
ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応 <sup>*5</sup>	¥1,144,000	¥594,000	¥1,064,000	¥554,000
○	○	○	○	○	○	¥824,000	¥434,000	¥764,000	¥404,000
○	○	○	○*6	—	—	¥564,000	¥304,000	¥544,000	¥294,000
○	—	—	—	—	—	—	—	¥444,000	¥244,000
—	—	—	—	—	—	—	—	¥344,000	¥194,000

\*3 HPLレシーバーは別途費用がかかります \*4 Motion Charge&Go XとPXはThinチューブ3.0とイヤフック両方利用可能 \*5 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch. 12kHz帯域非対応 \*6 Motion Xの5クラスは非対応

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

補聴器や難聴対応

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アクセサリなど

カラーバリエーション

性能一覧

# マスクと相性抜群 種類豊富な耳あな型



より小さく、  
より目立ちにくい



マスクやメガネの  
邪魔にならない

## 既製の軟らかい耳せんで優しいつけ心地

シルク  
Silk X



軽 中  
~70dB

カラー  
フェイスプレートカラー：ブラックのみ



左：スケルトンブルー




右：スケルトンレッド





- 超広角センサーで360°の音を自動でよりクリアによりリアルに。
- Signia Xperienceシリーズの中で一番小型。より自然な見た目を実現。
- 左右色違いで識別しやすく、つけ方も簡単。
- どんな耳でもフィットしやすい4サイズの耳せんから選べる、  
軟らかい素材と楕円形の耳せんはつけ心地が良い。
- Signia app対応、スマートフォンが補聴器のリモコンに。\*1

クリックスリーブ2.0

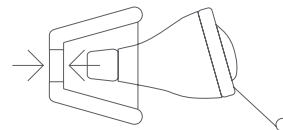

※その他クリックドームが利用可能。詳細は44ページをご確認ください

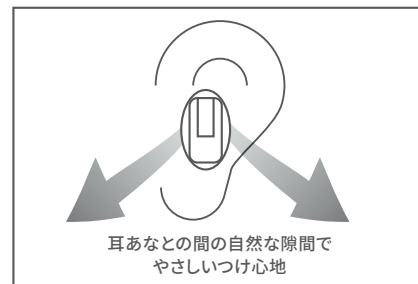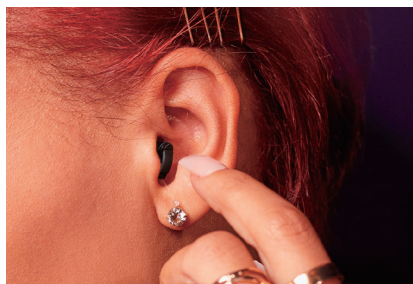

クラス	保証	チャンネル	機能						両耳価格	片耳価格
			超広角センサー	突発音抑制	風雑音抑制	両耳 パワー エンハンス	反響音抑制	12 kHz 12kHz帯域 対応		
7X	3年 修理保証 2年 初次保証	48ch	○	○	○	○	○	○	¥1,020,000	¥510,000
5X	3年 修理保証 2年 初次保証	32ch	○	○	○	○	—	—	¥720,000	¥360,000
3X	2年 修理保証 1年 初次保証	24ch	○	○	○	—	—	—	¥500,000	¥250,000
2X	2年 修理保証	16ch	○	○	○	—	—	—	¥400,000	¥200,000
1X	2年 修理保証	16ch	○	—	—	—	—	—	¥300,000	¥150,000

\*1 詳しくは45ページをご確認ください。マスクモードは非対応

〈販売名〉補聴器 Silk X

## 一人ひとりの耳に合わせて作るオーダーメイド

インシオ  
Insio Nx最小  
アイアイシー  
IIC

ノーマル：113/50~70dB

小型  
シーアイシー  
CICノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dBスタイリッシュ  
耳あな型  
クール  
COOLノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB耳あな型の定番  
アイティーシー  
ITCノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dB耳あな型の定番  
アイティーシー ツイン  
ITE TWIN

\*Bluetooth有り・無しを選択可能

パワータイプ  
アイティーシー ツイン  
ITE TWIN

\*Bluetooth有り・無しを選択可能

パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dB

## 特徴

- オーダーメイドなので、耳あなにぴったりフィット。
- 最小サイズのIICからパワータイプまで、ラインナップが豊富。
- Bluetooth対応器種は、テレビやスマホと連携可能。

## [カラー バリエーション]

## フェイスプレートカラー



## シェルカラー



※カラーの選び方は55ページをご参照ください

クラス	保証	チャンネル	機能	両耳価格	片耳価格
インシオ Insio Nx	7Nx	48ch ■■■■	各器種の対応機能は 37~40ページを ご参照ください	¥1,020,000	¥510,000
	5Nx	32ch ■■■■		¥580,000	¥290,000
	3Nx	24ch ■■■■		¥440,000	¥220,000
	2Nx	16ch ■■■■		¥360,000	¥180,000
	1Nx	16ch ■■■■		¥240,000	¥120,000

〈販売名〉補聴器 Nxシリーズ カスタム




シグニア エーエックス  
**Signia AX**

世界初※、2つの頭  
 別々に処理するダブ

※ 2021年4月、WSオーディオロジーグループ調

いままで

1つのプロセッサーでは言葉と環境音の分別に  
 限界があった。

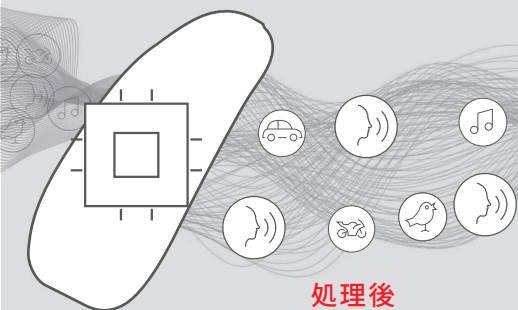

処理後



Signia AX




処理前



「ライブサウンド」で、まるで生音

シグニア音声技術の集大成!様々な革新的な技術がさらに進化して、これまでにない聴覚体験を実現。  
 まるで生音のような、人間の耳に近い明瞭で自然な聞こえをあなたに。

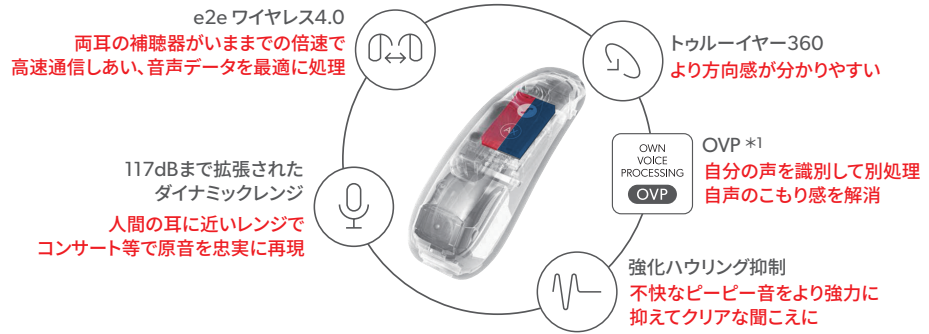




# 脳で言葉と環境音を ルプロセッサー補聴器



CES 2022  
イノベーション  
アワード受賞



2つのプロセッサーが言葉と環境音を別々に処理。  
賢さ2倍でよりくっきり、すっきり聞こえる。

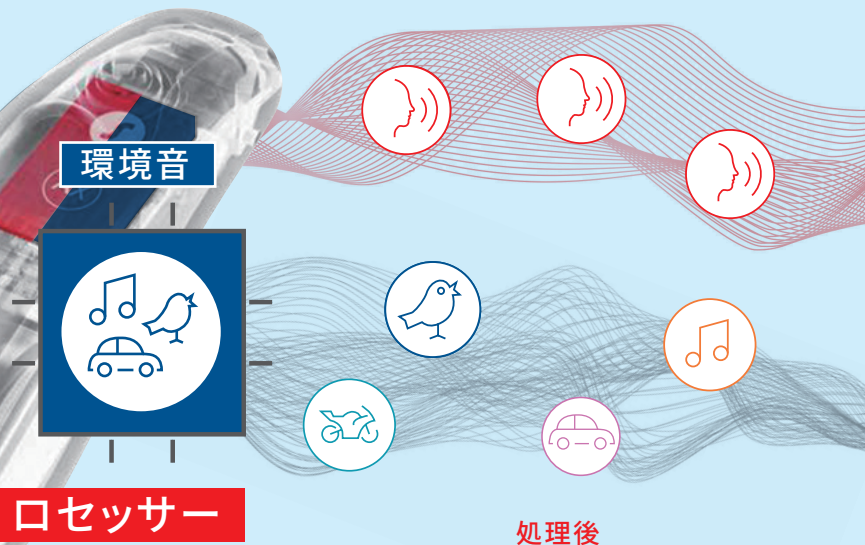

言葉がよりくっきり



環境音がよりすっきり

## 優れた機能で補聴器ライフをさらに便利に



100シーン自動対応のXセンサー搭載。<sup>\*2</sup>  
どこにいても、何をしても最適な音をあなたに。



iPhoneもAndroidスマートフォンも、  
通話・音楽が直接補聴器に届いて聞ける。<sup>\*3</sup>  
テレビも自分の音量で楽しめる。



マスクモード搭載でマスク越しの会話も聞きやすい。  
スマホアプリでワンクリックONにすればすぐに使える。



世界初の人工知能補聴器支援システム  
Signia Assistantがいつでもあなたをサポート。



さらに長い電池持ち時間で  
いつでも安心。

\*1 Insio Charge&Go AXは非対応 \*2 詳しくは27ページをご確認ください \*3 iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ直接音声ストリーミングすることが可能。(ただしメーカーや機種によって利用できない場合があります) それ以外のAndroidスマートフォンの場合、音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要



12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現

プレミアム

12kHz周波数帯


スピーチフォーカス360°

Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth <sup>*2</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識)	ダブルプロセッサー	ライブサウンド <sup>*3</sup>	OVP <sup>*4</sup>	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
7AX	48ch													

\*1 詳しくは60ページに記載 \*2 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 \*3 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください  
\*4 Insio Charge&Go AXは非対応 \*5 HPLレーザーは別途費用がかかります

機能

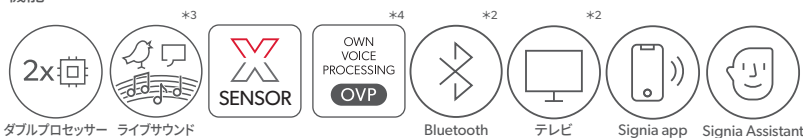

ダブルプロセッサー ライブサウンド



SENSOR



OWN VOICE PROCESSING  
OVP



Bluetooth



テレビ



Signia app



Signia Assistant

コーティング  
RIC型・耳かけ型



防水・防塵  
IP68



ナノコート  
で撥水

耳あな型



防水・防塵  
IP68

安心保証\*1



3年  
修理保証



スマートリペア  
プラン  
保証期間以降も安心



2年  
紛失保証

TRT 詳しくは40ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは55ページをご覧ください

選べる充電器



充電式RIC型  
ピュアチャージ&ゴー  
Pure Charge&Go AX

充電



ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電式耳あな型  
インシオチャージ&ゴー  
Insio Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については25ページをご確認ください

両耳価格 7AX	¥1,144,000		
	片耳価格	¥594,000	
適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

リモコン

周辺機器

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型(販売名)補聴器 AXシリーズ  
耳あな型(販売名)補聴器 AXシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧





スピーチフォーカスが聞きたい事を逃さない

アドバンス

スピーチフォーカス

反響音抑制


Signia AX

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
5AX	32ch													

\*1 詳しくは60ページに記載 \*2 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声ストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OSバージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声ストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングするには別途StreamLine Micが必要 \*3 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください  
\*4 Insio Charge&Go AXは非対応 \*5 HPLレーザーは別途費用がかかります



機能

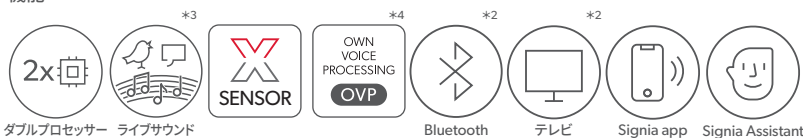

ダブルプロセッサ ライブサウンド



SENSOR



OWN VOICE PROCESSING  
OVP



Bluetooth



テレビ



Signia app



Signia Assistant

コーティング  
RIC型・耳かけ型



防水・防塵  
IP68



ナノコート  
で撥水

耳あな型



防水・防塵  
IP68

安心保証\*1



3年  
修理保証



スマートリペア  
プラン  
保証期間以降も安心



2年  
紛失保証

TRT 詳しくは40ページをご覧ください

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは55ページをご覧ください

選べる充電器



充電式RIC型  
ピュアチャージ&ゴー  
Pure Charge&Go AX

充電



ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電式耳あな型  
インシオチャージ&ゴー  
Insio Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については25ページをご確認ください

両耳価格	¥824,000		
	片耳価格		
5AX	¥434,000		
適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

リモコン

周辺機器

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型(販売名)補聴器 AXシリーズ  
耳あな型(販売名)補聴器 AXシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧



世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

スタンダード\*

ダブルプロセッサー


ライブサウンド

Signia AX


搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP	ビーム指向性	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°	12kHz帯域対応
3AX	24ch										—	—	—	—

\*1 詳しくは60ページに記載 \*2 TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングをするには別途StreamLine Micが必要 \*3 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください  
\*4 Insio Charge&Go AXは非対応 \*5 HPLレシーバーは別途費用がかかります

機能

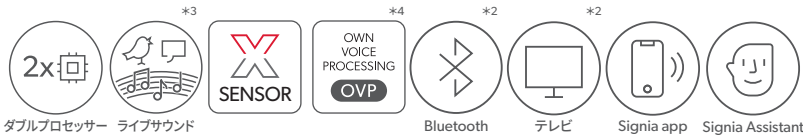

コーティング  
RIC型・耳かけ型

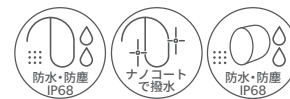

耳あな型

安心保証\*1



充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください

充電式 耳あな型 ※カラーは55ページをご覧ください

選べる充電器



充電式RIC型  
ピュアチャージ&ゴー  
Pure Charge&Go AX

充電



ワイヤレス充電ITC

ワイヤレス充電ITE

充電式耳あな型  
インシオチャージ&ゴー  
Insio Charge&Go AX

充電

充電器、充電ケースの詳細については25ページをご確認ください

両耳価格	3AX	¥564,000
	片耳価格	¥304,000
適応聴力	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB<sup>*5</sup></p>	<p>軽 中 高</p> <p>ノーマル: 113/50~70dB パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>
		<p>軽 中 高</p> <p>パワー: 118/55~80dB ハイパワー: 124/65~90dB</p>

※補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

リモコン

周辺機器

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800(税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800(税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000(税込)



● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型(販売名)補聴器 AXシリーズ  
耳あな型(販売名)補聴器 AXシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

AX

# 充電器と アクセサリ



## 多種多様な充電器で あなたのスタイルにフィット

### 充電器の機能


※全器種統一価格、1台44,000円(課税・税込)

器種	選べる 充電器	Qiワイヤレス 充電	ポータブル充電 (蓄電機能)	除菌・ 乾燥機能	イヤモード 収納可否	充電・使用 時間目安*1
 Pure Charge&Go AX	 ポータブル 充電ケース	—	○ 両耳を4回 フル充電可能	—	△ クリックモードのクリック/ カナルサイズのみ収納可能 HPモード収納不可	<b>補聴器の充電</b> 充電時間 <b>30分</b> <b>4時間</b> <b>スピード充電</b> <b>フル充電</b> 使用可能時間 <b>6時間</b> <b>28時間</b>
	 ドライ&クリーン 充電器	—	—	○ 99% UV除菌	○ 99% UV除菌	○ クリックモード全サイズ、 HPモード収納可能
 ワイヤレス充電ITE   ワイヤレス充電ITC Insio Charge&Go AX	 充電器	—	—	—	—	<b>補聴器の充電</b> 充電時間 <b>30分</b> <b>4時間</b> <b>スピード充電</b> <b>フル充電</b> 使用可能時間 <b>6時間</b> <b>28時間</b>


\*1 Bluetooth機能を利用して音楽等を聞く場合(ストリーミング)、使用可能時間はより短くなります



## 充電器のサイズ

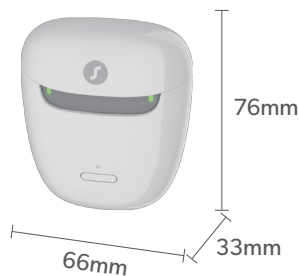

Pure Charge&Go AX用  
ポータブル充電ケース

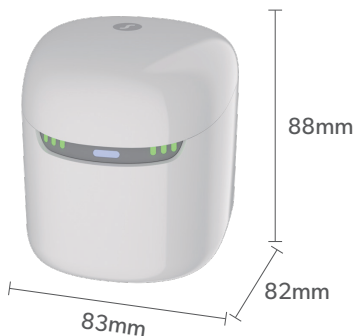

Pure Charge&Go AX用  
ドライ&クリーン充電器




Insio Charge&Go AX用  
充電器

## Signia AX用アクセサリ

Signia AXシリーズはより高いフィット感を提供する新世代ミニレシーバーを使用。

- 強化構造で耐久性に優れている。
- レシーバーにはいろいろな長さがあり、使用者の耳に合わせやすい。
- イヤチップ3.0、スリーブ3.0、クリックモールドと組み合わせて利用することが可能。  
様々な形状と種類から選択可能でどんな方でも合わせやすい。


### 3.0 ミニレシーバー

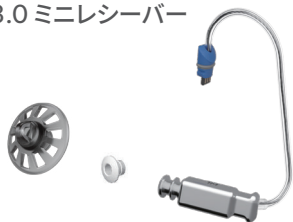

¥11,000 (税込) 1本

※3.0ミニレシーバーの長さ寸法は従来の2.0と異なります。  
注文時は「アクセサリ・補修パーツカタログ」の測り方・  
注意点をご確認ください

### HPモールド3(ミニレシーバーHP付き)

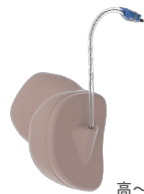

高〜重度難聴向け

¥27,000 (非課税)

### クリックモールド3.0



¥10,500 (非課税)

※クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が  
異なり、互換性はありません。注文時は「アクセサリ・  
補修パーツカタログ」をご確認ください

### イヤチップ3.0 ¥2,200 (税込) 同サイズ6個入り

オープン



5mm



7mm



10mm

チューリップ



8mm



12mm

### スリーブ3.0 ¥2,200 (税込) 同サイズ6個入り

ベント



クローズ



パワー



XS

L

M

L

世界初<sup>\*1</sup>、Xセンサー搭載補聴器。  
どこにいても、何をしても、最適な音をあなたに。

**超広角センサー**

周囲360°の声や物音を常に分析、  
400パターンの中から最適な  
音質に自動で変化。



**モーションセンサー**

座れば前方フォーカス、  
散歩中はワイドに、  
聞こえを自動で最大化。

周りの環境

あなたの動き

**X**  
SENSOR

**100シーン自動対応** <sup>\*2</sup>

これまで基本シーンは2つでした



静かな会話




騒がしい会話

\*1 2019年10月、シバントスグループ調べ

\*2 RIC型・耳かけ型7AX/5AX/3AX、7X/5X/3Xは100シーン対応。RIC型・耳かけ型2X/1X、Silk X全クラスは超広角センサーのみ搭載、50シーン対応

## このようなシーンで力を発揮します

### 360°の音

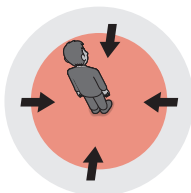

呼び込みの声や臨場感のあるシーンに、360°の音を自動でよりクリアによりリアルに。



テレビ



買い物

### 一対一の会話



騒がしくても、聞きづらいこもった声も、より聞こえやすい。




仕事



こもった声

### 複数人の会話

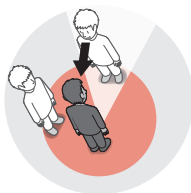

360°の声をクリアに捉えながら雑音は自動でしっかり抑える。



会議



食事

### 動いている時<sup>\*3</sup>



動いている時も、今まで難しかった隣同士の会話や車の通る音がよりはっきりわかるように自動調整。




散歩



ジョギング

## シグニア アシスタント Signia Assistant<sup>\*4</sup> でいつでも聞こえをAIサポート

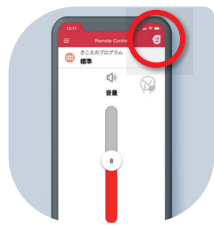

世界初!人工知能(AI)技術を活用した補聴器使用支援システム

- Signia app (シグニアアプリ) を開き、Signia Assistant と対話形式でやり取りするだけで、あなたの好みや環境に合った音に調節可能。
- 24時間、365日自動対応でいつでも使えるから安心。

\*3 RIC型・耳かけ型7AX/5AX/3AX、7X/5X/3Xのみ対応

\*4 Signia AX、Signia XperienceシリーズのBluetooth搭載補聴器に対応。詳細は45ページをご確認ください。

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式  
スタイレット  
Styiletto X

充電



充電式RIC型  
ピュア チャージ&ゴー  
Pure Charge&Go X

充電

充電式 耳かけ型 ※カラーは51ページをご覧ください



充電式耳かけ型  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go X

充電

7X	両耳価格			¥1,064,000 <sup>*2</sup>
	片耳価格			¥554,000 <sup>*2</sup>
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB<sup>*3</sup></p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ:~70dB イヤフック:~90dB</p>	

Signia Xperience

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のごもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル <sup>*6</sup>	Bluetooth <sup>*1</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセグ <sup>*4</sup>	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP <sup>*4</sup> (両耳)	ビーム指向性 <sup>*4</sup> (両耳)	パワーエンハンス <sup>*5</sup>	スピーチフォーカス <sup>*4</sup>	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳) <sup>*4</sup>	12kHz帯域対応 <sup>*7</sup>
7X	48ch					—	—							


\*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります

\*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

\*3 HPLレシーバーは別途費用がかかります \*4 Silk Xは非対応 \*5 Silk Xは両耳装用で対応 \*6 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch \*7 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応




機能

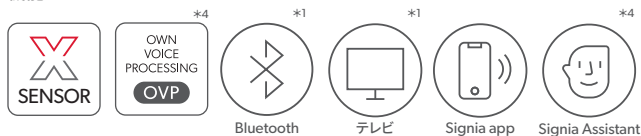

TRT 詳しくは40ページをご覧ください

コーティング  
RIC型・耳かけ型

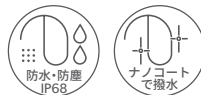


安心保証



電池式 RIC型 ※カラーは51ページ  
をご覧ください

電池式 耳あな型 ※カラーは15ページ  
をご覧ください

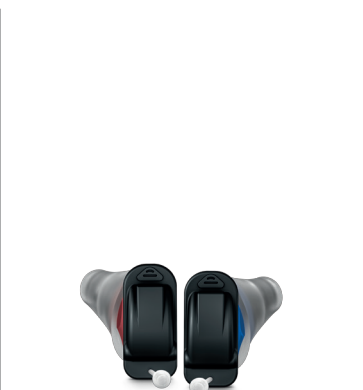

充電式パワータイプ  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go P X

充電

充電式スーパーパワー  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go SP X

充電

RIC型の定番  
ピュア  
Pure 312 X

312

既製耳あな型  
シルク  
Silk X

10A

¥1,020,000

¥510,000

中高重

チューブ: ~80dB  
イヤフック: ~100dB

中高重

イヤフック: ~110dB

軽中高重

S: ~60dB M: ~75dB  
P: ~90dB HP: ~100dB

軽中

~70dB

リモコン

周辺機器 \*4

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)



● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Xシリーズ  
耳あな型 (販売名) 補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覽

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式  
スタイレット  
Styiletto X

充電



充電式RIC型  
ピュア チャージ&ゴー  
Pure Charge&Go X

充電

充電式 耳かけ型 ※カラーは51ページをご覧ください



充電式耳かけ型  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go X

充電

5X	両耳価格	¥764,000 <sup>*2</sup>	
	片耳価格	¥404,000 <sup>*2</sup>	
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB<sup>*3</sup></p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ:~70dB イヤフック:~90dB</p>

Signia Xperience


搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth <sup>*1</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー <sup>*4</sup> モーションセンサー <sup>*4</sup>	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP <sup>*4</sup> (両耳)	ビーム指向性 (両耳) <sup>*4</sup>	パワーエンハンス <sup>*5</sup>	スピーチフォーカス <sup>*4</sup>	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
5X	32ch													

\*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります

\*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります


\*3 HPLレーザーは別途費用がかかります \*4 Silk Xは非対応 \*5 Silk Xは両耳装用で対応

機能

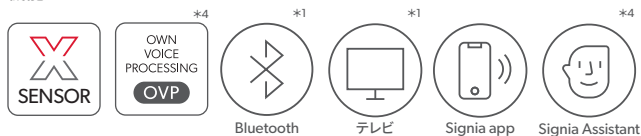

TRT 詳しくは40ページをご覧ください

コーティング  
RIC型・耳かけ型

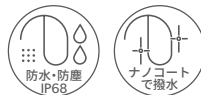

安心保証



電池式 RIC 型

※カラーは51ページ  
をご覧ください

電池式 耳あな型

※カラーは15ページ  
をご覧ください



充電式パワータイプ  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go P X

充電

充電式スーパーパワー  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go SP X

充電

RIC型の定番  
ピュア  
Pure 312 X

312

既製耳あな型  
シルク  
Silk X

10A

¥720,000

¥360,000

中高重

チューブ: ~80dB  
イヤフック: ~100dB

中高重

イヤフック: ~110dB

軽中高重

S: ~60dB M: ~75dB  
P: ~90dB HP: ~100dB

軽中

~70dB

リモコン

周辺機器 \*4

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Xシリーズ  
耳あな型 (販売名) 補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式  
スタイレット  
Styiletto X

充電



充電式RIC型  
ピュア チャージ&ゴー  
Pure Charge&Go X

充電

充電式 耳かけ型 ※カラーは51ページをご覧ください



充電式耳かけ型  
モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go X

充電

3X	両耳価格	¥544,000 <sup>*2</sup>		
	片耳価格	¥294,000 <sup>*2</sup>		
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB<sup>*3</sup></p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ:~70dB イヤフック:~90dB</p>	

Signia Xperience

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth <sup>*1</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー <sup>*4</sup>	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP <sup>*4</sup> (両耳)	ビーム指向性 (両耳) <sup>*4</sup>	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応	
3X	24ch													


\*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります

\*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります

\*3 HPLレーザーは別途費用がかかります \*4 Silk Xは非対応




機能

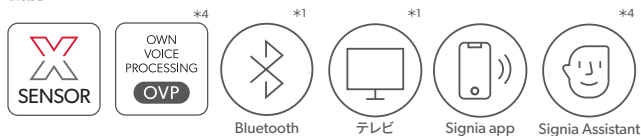

TRT 詳しくは40ページをご覧ください

コーティング  
RIC型・耳かけ型

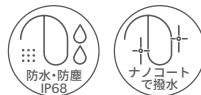


安心保証



電池式 RIC型 ※カラーは51ページ  
をご覧ください

電池式 耳あな型 ※カラーは15ページ  
をご覧ください

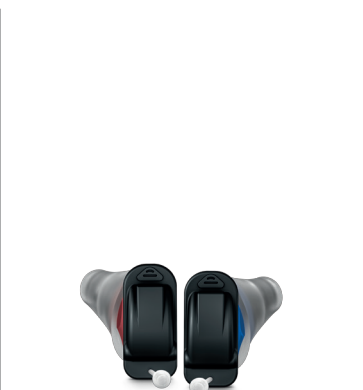

充電式パワータイプ  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go P X

充電

充電式スーパーパワー  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go SP X

充電

RIC型の定番  
ピュア  
Pure 312 X

312

既製耳あな型  
シルク  
Silk X

10A

¥500,000

¥250,000

中高重

チューブ: ~80dB  
イヤフック: ~100dB

中高重

イヤフック: ~110dB

軽中高重

S: ~60dB M: ~75dB  
P: ~90dB HP: ~100dB

軽中

~70dB

リモコン

周辺機器 \*4

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 Xシリーズ  
耳あな型 (販売名) 補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

充電式 RIC 型 ※カラーは51ページをご覧ください



充電式 耳かけ型 ※カラーは51ページをご覧ください



2X	両耳	¥444,000 <sup>*2</sup>	
	片耳	¥244,000 <sup>*2</sup>	
1X	両耳	¥344,000 <sup>*2</sup>	
	片耳	¥194,000 <sup>*2</sup>	
適応聴力	<p>軽 中 高</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:<sup>*3</sup>~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ:~70dB イヤフック:~90dB</p>

Signia Xperience


搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth <sup>*1</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
2X	16ch					—	—	—	—	—	—	—	—	—
1X			—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*1 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります

\*2 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります


\*3 HPLレシーバーは別途費用がかかります \*4 Silk Xは非対応

機能

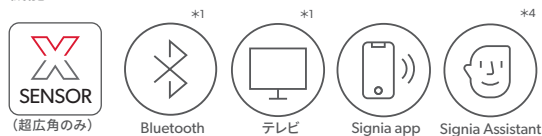

**TRT** 詳しくは40ページをご覧ください ※2Xのみ搭載

コーティング  
RIC型・耳かけ型

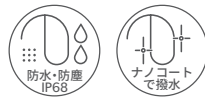

安心保証



電池式 RIC型 ※カラーは51ページ  
をご覧ください

電池式 耳あな型 ※カラーは15ページ  
をご覧ください



充電式パワータイプ モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X 充電	充電式スーパーパワー モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X 充電	RIC型の定番 ピュア Pure 312 X 312	既製耳あな型 シルク Silk X 10A
		¥400,000	
		¥200,000	
		¥300,000	
		¥150,000	
<p>中高重</p> <p>チューブ: ~80dB イヤフック: ~100dB</p>	<p>中高重</p> <p>イヤフック: ~110dB</p>	<p>軽中高重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB<sup>*3</sup></p>	<p>軽中</p> <p>~70dB</p>

リモコン

周辺機器 \*4

スマートフォン対応アプリ



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
◀こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名)補聴器 Xシリーズ  
耳あな型 (販売名)補聴器 Silk X

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

**充電式** ※カラーは52ページをご覧ください



スタイリッシュ充電式  
スタイレットコネク  
Styletto Connect

充電

充電式RIC型  
ピュアチャージ&ゴー  
Pure Charge&Go Nx

充電

充電式耳かけ型  
モーションチャージ&ゴー  
Motion Charge&Go Nx

充電

**電池式 RIC型・耳かけ型** ※カラーは52ページをご覧ください



Nx最小サイズ  
ピュア  
Pure 10 Nx

10A

RIC型の定番  
ピュア  
Pure 312 Nx

312

電池長持ち  
ピュア  
Pure 13 Nx [T]

13


7Nx	両耳	¥1,064,000 <sup>*1</sup>	¥1,020,000	
	片耳	¥554,000 <sup>*1</sup>		¥510,000
5Nx	両耳	¥624,000 <sup>*1</sup>	¥580,000	
	片耳	¥334,000 <sup>*1</sup>		¥290,000
3Nx	両耳	¥484,000 <sup>*1</sup>	¥440,000	
	片耳	¥264,000 <sup>*1</sup>		¥220,000
適応聴力	<p>軽 中</p> <p>M: ~75dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP<sup>*2</sup>: ~100dB</p>	<p>軽 中 高</p> <p>チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB</p>	<p>軽 中 高 重</p> <p>S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP<sup>*2</sup>: ~100dB P: ~85dB HP<sup>*2</sup>: ~90dB</p>

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth <sup>*3</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP <sup>*4</sup> (両耳)	ビーム指向性 <sup>*5</sup> (両耳)	パワーエンハンス <sup>*6</sup>	スピーチフォーカス <sup>*7</sup>	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
7Nx	48ch	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
5Nx	32ch	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
3Nx	24ch	○	○	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—

\*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります \*2 HPLレーザーは別途費用がかかります  
\*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります \*4 Pure10、耳あな型を除く  
\*5 Pure10を除く。耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応 \*6 耳あな型はITC TWIN, ITE TWINに対応。IIC、CIC、COOL、ITCは両耳装用で対応 \*7 IIC、CIC、COOL、ITCを除く




機能

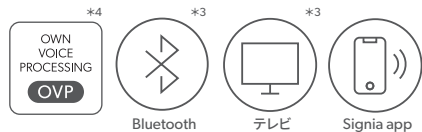

**TRT** 詳しくは40ページをご覧ください

コーティング・カラー

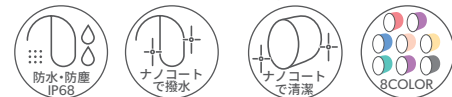

安心保証



**電池式 耳あな型** ※オプションやカラー、名前刻印などは55ページをご覧ください

インシオ

Insio

多彩なオプション  
モーション  
Motion 13 Nx

13

パワータイプ  
モーション  
Motion 13P Nx

13

最小  
アイアイシー  
IIC

10A

小型  
シーアイシー  
CIC

10A

スタイリッシュ  
耳あな型  
クール  
COOL

312

耳あな型の定番  
アイティイーシー  
ITC

312

耳あな型の定番  
アイティイーシー ツイン  
ITC TWIN

312

パワータイプ  
アイティイーシー ツイン  
ITE TWIN

312

¥1,020,000

¥510,000

¥580,000

¥290,000

¥440,000

¥220,000

軽 中 高  
チューブ：~70dB  
イヤフック：~90dB

中 高 重  
チューブ：~80dB  
イヤフック：~100dB

軽 中  
ノーマル：113/50~70dB

軽 中 高  
ノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dB

軽 中 高  
ノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB

軽 中 高  
ノーマル：113/50~70dB  
パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dB

軽 中 高  
パワー：118/55~80dB  
ハイパワー：124/65~90dB

リモコン

周辺機器 ※Bluetooth非搭載機種は非対応

スマートフォン対応アプリ

ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)

ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)

ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください

RIC型・耳かけ型 (販売名) 補聴器 N xシリーズ 耳あな型 (販売名) 補聴器 N xシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience


Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ！  
アクセサリなど

カラーバリエーション

性能一覽

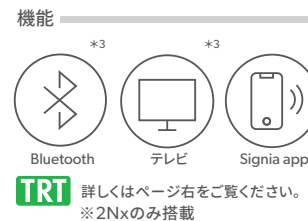

**充電式** ※カラーは52ページをご覧ください



2022年6月販売終了予定  
スタイリッシュ充電式  
スタイレット エssenシャル  
Styiletto Essential

充電



充電式RIC型  
ピュア チャージ&ゴー  
Pure Charge&Go Nx

充電



充電式耳かけ型  
モーション チャージ&ゴー  
Motion Charge&Go Nx

充電

**電池式 RIC型・耳かけ型** ※カラーは52ページ



RIC型の定番  
ピュア  
Pure 312 Nx

312



電池長持ち  
ピュア  
Pure 13 Nx[T]

13

両耳 2Nx	¥404,000 <sup>*1</sup>		¥360,000	
	片耳	¥224,000 <sup>*1</sup>	片耳	¥180,000
両耳 1Nx	¥284,000 <sup>*1</sup>		¥240,000	
	片耳	¥164,000 <sup>*1</sup>	片耳	¥120,000
適応聴力	 M: ~75dB	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB <sup>*2</sup>	 チューブ: ~70dB イヤフック: ~90dB	 S: ~60dB M: ~75dB P: ~90dB HP: ~100dB <sup>*2</sup>

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物		楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のこもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	チャンネル	Bluetooth <sup>*3</sup>	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識)	超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP 両耳	ビーム指向性 両耳	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° 両耳	12kHz帯域対応
2Nx	16ch	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1Nx	16ch	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*1 補聴器本体(非課税)、充電器1台¥44,000(課税・税込)を一式にした価格です。両耳同時に購入の場合は、充電器は1台となります \*2 HPレシーバーは別途費用がかかります  
\*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴には別途StreamLine TVが必要になります。Androidスマートフォンは別途StreamLine Micが必要になります

コーティング

RIC型・耳かけ型



耳あな型



安心保証



Signia AX, Signia Xperience, Signia Nx  
primaxは耳鳴り治療器機能を搭載

マークが目印です。

8割の方に効果があったと報告されている\*1TRT(耳鳴り再訓練法)用の治療音(音響的ノイズ)を発生させることができます。

\*1 耳鳴りの治療及び本機能の使用については、必ず先に耳鼻科専門医にご相談ください。

\*TRT: Tinnitus Retraining Therapy

\*1 関谷芳正、松田太志、高橋真理子他、耳鳴りに対する新しい治療法・TRT(療法)耳鼻臨床95:6;639~646、2002

ページをご覧ください

電池式 耳あな型 ※オプションやカラー、名前刻印などは55ページをご覧ください

インシオ

Insio



多彩なオプション  
モーション  
Motion 13 Nx

13

パワータイプ  
モーション  
Motion 13P Nx

13



最小  
アイアイシー  
IIC

10A



小型  
シーアイシー  
CIC

10A



スタイリッシュ  
耳あな型  
クール  
COOL

312



耳あな型の定番  
アイティーシー  
ITC

312



耳あな型の定番  
アイティーシー ツイン  
ITC TWIN

\*Bluetooth有り/無しを選択可能

312



パワータイプ  
アイティーイー ツイン  
ITE TWIN

\*Bluetooth有り/無しを選択可能

312

¥360,000

¥180,000

¥240,000

¥120,000

軽 中 高

チューブ: ~70dB  
イヤフック: ~90dB

中 高 重

チューブ: ~80dB  
イヤフック: ~100dB

軽 中

ノーマル: 113/50~70dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB  
パワー: 118/55~80dB  
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB  
パワー: 118/55~80dB

軽 中 高

ノーマル: 113/50~70dB  
パワー: 118/55~80dB  
ハイパワー: 124/65~90dB

軽 中 高

パワー: 118/55~80dB  
ハイパワー: 124/65~90dB

リモコン

周辺機器 ※Bluetooth非搭載器種は非対応

スマートフォン対応アプリ

● Signia app (シグニア アプリ)



インストールは  
こちら  
詳しくは  
45ページを  
ご覧ください



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

RIC型・耳かけ型(販売名) 補聴器 N xシリーズ 耳あな型(販売名) 補聴器 N xシリーズ カスタム

※補聴器は非課税です

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ!  
アクセサリなど

カラーバリエーション

性能一覧



Signia app



※オプション対応(CIC、CIC312、2px、1pxを除く)



※7px、5pxのみ

**TRT** 詳しくは40ページをご覧ください

**電池式 耳かけ型** ※カラーは52ページをご覧ください

**電池式 耳あな型** ※オプションやカラー、名前刻印などは55ページをご覧ください



スーパーパワー  
モーション  
Motion SP

675

インシオ  
Insio



小型  
シーアイシー  
CIC / CIC312

10A 312



幅広い聴力に対応  
エムシー  
MC / MC312

10A 312




スタイリッシュ耳あな型  
クール  
COOL / COOL13

312 13



耳あな型の定番  
アイティイー  
ITC / ITC TWIN

312

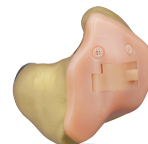

電池長持ちパワータイプ  
アイティイー  
ITE / ITE TWIN

13

クラス	両耳価格	片耳価格	両耳価格	片耳価格		
7px	¥980,000	¥490,000	¥1,020,000	¥510,000		
5px	¥580,000	¥290,000	¥620,000	¥310,000		
3px	¥400,000	¥200,000	¥440,000	¥220,000		
2px	¥320,000	¥160,000	¥360,000	¥180,000		
1px	¥240,000	¥120,000	¥280,000	¥140,000		
適応聴力	<p>中 高 重 イヤフック：～110dB</p>		<p>軽 中 ノーマル：113/50～70dB パワー：118/55～80dB ハイパワー：124/65～90dB</p>	<p>軽 中 高 ノーマル*6：113/50～70dB パワー：118/55～80dB</p>	<p>軽 中 高 ノーマル：113/50～70dB パワー：118/55～80dB ハイパワー：124/65～90dB</p>	<p>軽 中 高 パワー：118/55～80dB ハイパワー：124/65～90dB</p>

販売名 補聴器 primaxシリーズ

補聴器 primaxシリーズ カスタム

搭載機能	きめ細かい聞こえ	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のような自然な聞こえ	自声のごもりを解消	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
チャンネル	Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制	Xセンサー(環境・動き認識) 超広角センサー モーションセンサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	OVP(両耳)	ビーム指向性(両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360°(両耳)	12kHz帯域対応	
7px	48ch* 7</td <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td>	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
5px	32ch* 7</td <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td>	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
3px	24ch	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
2px	16ch	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1px	16ch	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[周辺機器]



テレビパック2\*1  
¥55,000(税込)

その他、対応リモコン  
・周辺機器は46ページをご参照ください

※補聴器は非課税です

\*1 CIC、CIC312を除く。テレビパック2が必要 \*2 耳あな型は、ITC TWIN、ITE TWINに対応 \*3 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINとMC/MC312(7クラス両耳装着)に対応 \*4 シングルマイクには非搭載 \*5 Motion SPを除く \*6 COOL13はパワーのみ対応 \*7 Motion SPは7/5クラスとも24ch



インテイス3  
Intuis3



RIC型 ミニ耳かけ型S 耳かけ型M 耳かけ型P 耳かけ型SP

機能 ——— 安心保証

Signia app


2年 修理保証 + スマートリペアプラン  
保証期間以降も安心

コーティング・カラー

防水・防塵 IP67 ナノコートで撥水

(P・SP除く)

※カラーは43ページをご覧ください

製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	対応リモコン/周辺機器/アプリ
RIC型	12ch	¥180,000	¥90,000	軽 中 高 重 S:~60dB M:~75dB P:~90dB HP:~100dB*	312	[リモコン]
ミニ耳かけ型S				チューブ:~50dB イヤフック:~65dB	312	 ミニポケット miniPocket ¥19,800(税込)
耳かけ型M				チューブ:~65dB イヤフック:~85dB	13	
耳かけ型P				イヤフック:~100dB	13	
耳かけ型SP		イヤフック:~110dB	675			
販売名	補聴器 Intuis3					

\*HPLレシーバーは別途費用がかかります ※補聴器は非課税です



CIC/ CIC 312 MC / MC 312 ITC ITE

機能 ——— コーティング・カラー ——— 安心保証

Signia app

ナノコートで清潔 8COLOR

2年 修理保証 + スマートリペアプラン  
保証期間以降も安心

※オプションやカラー、名前刻印などは55ページをご覧ください

形状	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池	対応リモコン/周辺機器/アプリ
CIC	12ch	¥220,000	¥110,000	軽 中 ノーマル:113/50~70dB	10A	[リモコン]
CIC312				312	 ミニポケット miniPocket ¥19,800(税込)	
MC				10A		
MC312				312		
ITC				軽 中 高 ノーマル:113/50~70dB パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB		
ITE				軽 中 高 パワー:118/55~80dB ハイパワー:124/65~90dB		13
販売名	補聴器 Intuis3 カスタム					

※補聴器は非課税です

※耳の形状によっては、ご希望の補聴器が製作できないことや、ご指定のオプションが取り付けられない場合があります  
※オプションを複数取り付けた場合、形状が大きくなる場合があります

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Experience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

プロンプト ファン  
Prompt/Fun

プロンプト  
Prompt 基本性能を備えた補聴器



- Lifeチューブ (Sのみ) (別売)
- ツインマイク
- プッシュボタン
- ボリューム付 (MPのみ)

コーティング・カラー ——— 安心保証



製品名	チャンネル数	両耳価格	片耳価格	適応聴力	電池
S	8ch	¥100,000	¥50,000	軽 中 チューブ: ~50dB イヤフック: ~65dB	312
MP				中 高 重 ~100dB	13
販売名		補聴器 Prompt			

\*Prompt MPの形式はPrompt Pです \*miniPocketとSignia app対応

※補聴器は非課税です

ファン  
Fun 簡易デジタル補聴器



- ボリューム付
- 4つのプリセットプログラム
- ピーピーしにくい

コーティング・カラー ——— 安心保証



製品名	チャンネル数	片耳価格	適応聴力	電池
P	6ch	¥98,000	中 高 ~90dB	13
SP			高 重 ~110dB	675
販売名		補聴器 Fun		

\*リモコン:非対応 プログラムは固定

※補聴器は非課税です

● カラーバリエーション

※製品の色と形は印刷と異なる事があります

Intuis3	カラーバリエーション						
	ベージュ	グレー	ブラウン	ブラック	シルバー	ダーク グラナイト	ディープ ブラウン
インテイス Intuis3 RIC			—				
インテイス Intuis3 S		*1	—	*1	*1		*1
インテイス Intuis3 M			—				
インテイス Intuis3 P			—	—	—	—	
インテイス Intuis3 SP			—	—	—	—	

P, SPはご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

\*1 ダークグラナイトとの2トーンカラーとなります

Prompt	カラーバリエーション			
	ベージュ	グレー	ブラウン	ディープ ブラウン
プロンプト Prompt S		*1	*1	—
プロンプト Prompt MP			—	

MPのみ、ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です。

Fun	カラーバリエーション		
	ベージュ	グレー	ディープ ブラウン
ファン Fun P			
ファン Fun SP			

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)が可能です

# アクセサリ 補修パーツ

## RIC型/耳かけ型用

RIC型/耳かけ型はレシーバーやイヤフック、チップ・ドーム(耳せん)などにより、適応聴力が変更できます

■Signia AX用アクセサリは26ページをご確認ください

### ● ミニレシーバー用クリックドーム 対応: Signia AX以外のRIC型、Silk X




¥2,200 (税込)  
同サイズ6個入り

### ● クリックスリーブ2.0 対応: Signia AX以外のRIC型、Silk X



¥2,200 (税込)  
同サイズ6個入り

### ● Lifeチップ 対応: 耳かけ型 (Thinチューブ/Lifeチューブ)

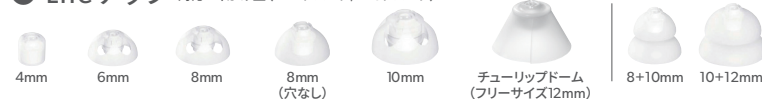

¥2,200 (税込)  
同サイズ10個入り

### ● イヤチップ3.0 対応: Signia AXのRIC型、Motion Charge&Go X/P X (Thinチューブ3.0使用時)



¥2,200 (税込)  
同サイズ6個入り

### ● スリーブ3.0 対応: Signia AXのRIC型、Motion Charge&Go X/P X (Thinチューブ3.0使用時)



¥2,200 (税込)  
同サイズ6個入り

## 子供用アクセサリ

### ● オーディオシューキット

対応: Motion SP px



(子供用バッテリーロッカーを含む)  
本体と同時購入 ¥6,000 (非課税)  
本体購入後の取付 \* ¥12,000 (非課税)

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥4,000 (非課税)  
本体購入後の取付 \* ¥10,000 (非課税)

対応: Intuis3 SP



¥4,000 (非課税)

対応: Intuis3P / Prompt MP



¥4,000 (非課税)

### ● スモールイヤフック

対応: Motion Charge&Go X / P X / SP X  
Motion Charge&Go Nx / Motion 13 Nx / Motion 13P Nx  
Intuis3 S / Intuis3 M / Intuis3 SP / Prompt S

¥550 (税込) 一部 ¥1,100 (税込)  
1本 同サイズ10個入り



\*器種により個数が異なります

### ● 子供用バッテリーロッカー単体

対応: Motion SP px



本体と同時購入 ¥2,000 (非課税)  
本体購入後の取付 \* ¥8,000 (非課税)

対応: Intuis3 M



本体と同時購入 ¥600 (非課税)  
本体購入後の取付 \* ¥6,600 (非課税)

対応: Motion 13Nx, Motion 13P Nx, Pure 13 Nx[T] (全色)



テレコイル入りバッテリーロッカー  
本体と同時購入 ¥6,000 (非課税)  
本体購入後の取付 \* ¥12,000 (非課税)

\*修理として補聴器をお預かりして加工します

## 耳あな型用

### ● クイックガード

¥1,100 (税込)  
8個入り/交換ツール入り

### ● クリネット ダイヤルパック (HF3:φ3.0mm) (赤/青)

¥2,200 (税込)  
16個入り/交換ツール入り

### ● ノーワックス


¥1,100 (税込)  
6個入り/交換ツール入り

### ● 2.0ミニレシーバー 対応: Signia AX以外のRIC型



¥11,000 (税込) 1本

### ● HPモールド2 (ミニレシーバーHP付き) 対応: Signia AX以外のRIC型

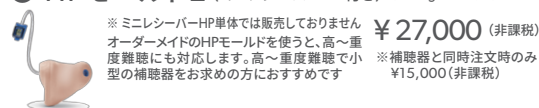

\*ミニレシーバーHP単体では販売しておりません  
オーダーメイドのHPモールドを使うと、高~重  
度難聴にも対応します。高~重度難聴で小  
型の補聴器をお求めの方におすすめです

¥27,000 (非課税)  
\*補聴器と同時注文時のみ  
¥15,000 (非課税)

# アプリ リモコン

## スマートフォン用アプリ **Signia app**




- 手元のスマートフォンで補聴器を操作できるから、気づかれない。
- 様々な機能が1つのアプリに。
- 無料でダウンロード・使用可能。

音量の調節  
気づかれずに  
音量を調節可能



マスクモード※  
マスク越しの声も  
聞きやすく

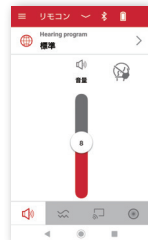

補聴器の状態の確認  
電池の残量などが  
確認できるから、安心



※お使いの補聴器の機種、装用の条件などにより、使える機能が異なります。アプリの機能、画面デザインは予告なく変更されることがあります。新しい機能が追加されることがありますので、アプリを定期的にアップデートしてください


※Signia AX、Signia Xperience Bluetooth搭載機種のみ利用可能。CROS/BiCROSシステムを使用する場合、マスクモード利用不可

## 補聴器使用支援AIシステム **Signia Assistant**

Signia appに入っている、人工知能搭載のSignia Assistantは、あなたが補聴器の設定を調節したいと思ったとき、すぐにあなたをサポート。Signia Assistantはまるで補聴器を使うための、ポケットの中の小さな助手のよう。だから、いつでもどこでもあなたは輝ける。



- Signia AX、Signia Xperience Bluetooth搭載機種対応

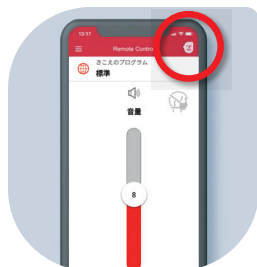

スマートフォンでSignia appを開き、右上にある顔のアイコンをタップするだけで起動。



Signia Assistantが自動的に補聴器を最適化するための選択肢を提供。その中から解決したい問題を選択。



Signia Assistantの質問に何度か答えることで、Signia Assistantが問題解決のお手伝いをしてくれる。

※Signia Assistantを使い始めるには、補聴器販売店で機能をONにする必要があります。補聴器を購入した販売店にご相談ください  
※定期的に販売店で聴力に合わせて補聴器を調整することをお勧めします ※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、Signia Assistantは利用不可



- 左記のアプリは今後使用できなくなります
- 左記のアプリはより使いやすいSignia appに置き換わります
- Signia appではこれまでと同じ機能をご利用いただけますので、左記のアプリをご使用の方はSignia appをダウンロードしてください

## アプリのインストール方法

- ① お使いのスマートフォンでApp Store/Playストアを開く
- ② 検索窓に「シグニア」(または「signia»)と入力
- ③ アプリをインストール



必要なOSバージョンやスマートフォンの要件は各ストアのアプリインストールページの説明をご確認ください

※ 端末・OS要件を満たしていても、組み合わせによっては本アプリが正常に動作しない場合があります

※ 特にアンドロイド端末に関しては、端末の種類によっては本アプリが正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください



## リモコン



ミニポケット  
miniPocket  
¥19,800 (税込)

対象:  
Signia AX  
Signia Xperience  
Signia Nx  
primax\* Intuis3  
Prompt



スマートリモート  
Smart Remote  
¥22,000 (税込)

対象:  
primax\*  
※CIC、CIC312除く



スマートコネク  
Smart Connect  
¥41,800 (税込)

対象:  
primax\*  
※CIC、CIC312除く



ストリームラインマイク  
StreamLine Mic  
¥55,000 (税込)

対象:  
Signia AX  
Signia Xperience  
Signia Nx  
※Bluetooth非搭載器種を除く



ストリームラインTV  
StreamLine TV  
¥30,800 (税込)

対象:  
Signia AX  
Signia Xperience  
Signia Nx  
※Bluetooth非搭載器種を除く

## アプリ・リモコンでできること

		Signia Assistant 対応*3	プログラム切り替え	音量調節	音質調節	ミュート	マニュアル指向性	電池残量	マイク機能
アプリ	Signia app	●	●	●	●	—	●*1	●	—*2
	miniPocket	—	●	●	—	●	—	—	—
リモコン	Smart Remote	—	●	●	●	●	—	—	—
	Smart Connect	—	●	●	—	●	—	—	—
リモートマイク	StreamLine Mic	—	●	●	—	●	—	—	●

**ご注意** 心臓ペースメーカーを使用している方は、リモコンを使用しないでください。スマートフォン専用アプリをご使用の場合、スマートフォンとの距離はスマートフォンの取扱説明書に従ってください  
\*1 7クラス、5クラスのTWINマイク補聴器を両耳に装着した場合のみ有効 \*2 iPhoneを使用する場合、iPhoneに搭載されたマイク機能は利用可能  
\*3 Signia AX、Signia XperienceのBluetooth搭載器種のみ対応

## 周辺機器

# ケアソリューション

補聴器は、毎日身につける体の一部だから、お手入れもしっかりと



## UV除菌・乾燥機

### パーフェクトドライ ラックス



希望小売価格: ¥9,900(税込)

特殊製の四角形状UVランプが  
全方向から紫外線を照射し、  
補聴器をしっかり除菌。  
ヒーター採用、30分間温風で  
急速乾燥。  
本体サイズ: W93×H48×D76mm

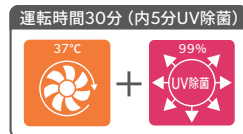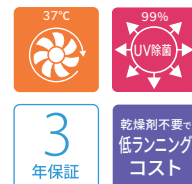

### ドライキャップ UV2



希望小売価格: ¥8,800(税込)

#### 充電式補聴器ユーザーにおすすめ!


対流エアフロー採用でしっかり乾燥。  
充電器ごとに入れて充電しながら乾燥・  
除菌ができる。  
様々なUV除菌可能な小物にも使える  
特大サイズ。  
本体サイズ: W127×H115×D127mm



2種類の運転モードから選択可能

夜寝る前に...  
ドライ&クリーンモード

ちょっとした時間に...  
クリーンモード

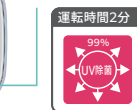

## その他のお手入れ用品

### 補聴器乾燥カップ シリカゲル入

しっかり乾燥!  
乾燥用の密閉式カップ。  
(大サイズ乾燥剤 1個付)



1個入り  
希望小売価格: ¥990(税込)

### 詰め替え用 乾燥シリカゲル

補聴器用大サイズ乾燥剤(個包装)。  
補聴器乾燥カップ(別売)に入れて  
使用。



2個入り  
希望小売価格: ¥1,100(税込)

### クリーニングシート

アルコール除菌で毎日きれいに。  
個包装だから外出時にも便利。



30枚入り、個包装  
希望小売価格: ¥990(税込)

### スターターセット

初めてご利用の方に!  
旅行にも便利。



#### [セット内容]

1. クリーニングシート 5枚
2. 補聴器乾燥カップ 1個
3. 乾燥シリカゲル(サイズ:小) 2個
4. 掃除用ブラシ 2種類 各1本

希望小売価格: ¥2,200(税込)

# RIC型・耳かけ型用 イヤモールド

## イヤモールド

一人ひとりの耳の形に合わせて作るオーダーメイドの耳せん

- 聞こえに適した音質に調整が可能。
- 音漏れによるハウリング(ピーピー音)を防ぐ。
- 補聴器の脱落を防止し、安定した装着が可能。

## 装着イメージ



クリック/カナル

COOL

スタンダード

	RIC型用		耳かけ型用			適応聴力	特徴
	3.0ミレシーパー用 2.0ミレシーパー用	Thinチューブ3.0用	イヤフック用				
名称	クリックモールド	Thinチューブ3.0モールド	硬質アクリル	軟質アクリル	ポップフィット		
	素材	アクリル製	アクリル製	アクリル製	アクリル製	シリコン製	
色	クリア	クリア	クリア	クリア	17色		
形状	クリック/カナル						最小サイズ、外から見える部分が少ない
	カナルロック						クリック/カナルにストッパーが付いたもの クリック/カナルでは外れやすい人向け
	COOL						当社オリジナルの着け心地重視モデル
	ハーフシェル						外から見える部分をなるべく小さくし、 薄く削ったもの(旧カナルサイズ)
	スケルトン						安定感に目立たなさをプラス
	スタンダード						安定感重視でハウリングしにくく、 高度以上の方に標準の形状
	¥10,500 (非課税)		¥9,000 (非課税)				

### クリックモールド\*

### Thinチューブ3.0モールド

(クリアのみ)



※クリックモールドはレシーバーの世代によって形状が異なり、互換性はありません。注文時は「アクセサリ・補修パーツカタログ」をご確認ください

### アクリル (クリアのみ)

クリック



スタンダード



### ポップフィット (17色)

クリアカラー



ビビットカラー



クロス バイクロス  
CROS/BiCROS  
補聴システム




片方の耳が聞こえない方へ  
聞こえない側の音も、しっかりキャッチ

### CROS / BiCROS システムの仕組み


CROS/BiCROSシステムは一側性難聴の方をサポート。

聞き取りができない耳にCROSを装着すると、聞こえる耳に装着した補聴器で左右両側の音を聞くことが可能。

CROS送信器なし

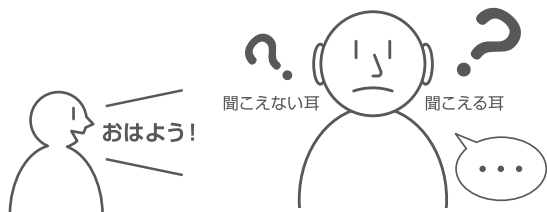

CROS送信器あり

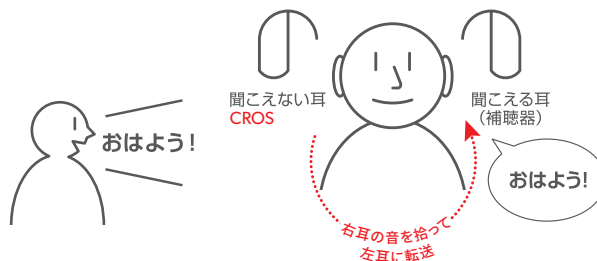

Signia AX



防水・防塵  
IP68

選べる  
充電器



ポータブル  
充電ケース



ドライ&クリーン  
充電器



対象器種: Pure Charge&Go AX  
Insio Charge&Go AX

対応クラス: 7AX・5AX・3AX



防水・防塵  
IP68



対象器種: Pure Charge&Go X  
Pure 312 X  
Motion Charge&Go X  
Motion Charge&Go P X  
Motion Charge&Go SP X

対応クラス: 7X・5X・3X

Signia Xperience



防水・防塵  
IP68



対象器種: Pure Charge&Go X  
Pure 312 X  
Motion Charge&Go X  
Motion Charge&Go P X  
Motion Charge&Go SP X

対応クラス: 7X・5X・3X

販売名	CROS Pure Charge&Go AX	CROS Pure Charge&Go X	CROS Pure 312 X
価格 (税込)	¥110,000 <sup>*1</sup> (充電器を除く)	¥110,000 <sup>*1</sup> (充電器を除く)	¥99,000
使用電池 電池寿命 (連続使用)	<b>充電</b> 約28時間	<b>充電</b> 約23時間	<b>312</b> 約60時間
カラー バリエーション			


\*1 別売の充電器¥44,000(課税・税込)が必要です \*2 CROS Pure Charge&Go Nx限定 ※CROS各器種の保証期間は1年です



## CROS

片耳がほぼ健聴の場合


補聴器からはCROS送信器から転送された音が聞こえ、同時に耳せんを通して外界の音も聞こえる。

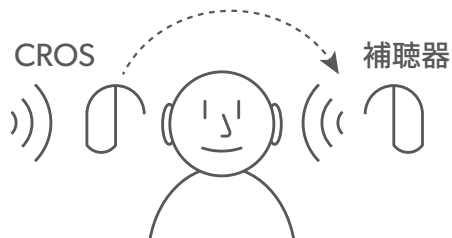

## BiCROS

いい方の耳にも難聴がある場合

補聴器はCROS送信器から転送された音と外界の音をミックスし、増幅して届ける。

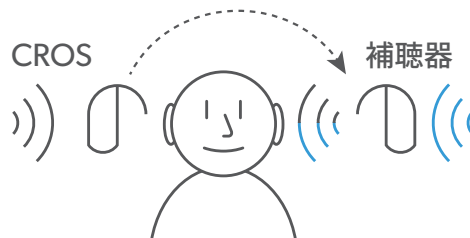

※CROS/BiCROSシステムを使用する場合、Signia Assistantとマスクモードは利用不可



対象器種: Pure Charge&Go Nx  
Motion Charge&Go Nx

対応クラス: 7Nx・5Nx・3Nx

Signia Nx



対象器種: Pure Charge&Go Nx / Motion Charge&Go Nx  
Pure 312 Nx / Pure 13 Nx[T] / Motion 13 Nx  
Motion 13P Nx  
Insio Nx ITC TWIN (Bluetooth有り)  
Insio Nx ITE TWIN (Bluetooth有り)

対応クラス: 7Nx・5Nx・3Nx



primax\*



対象器種: Motion SP px / Insio px  
(CIC, CIC 312除く)

対応クラス: 7px・5px・3px

CROS Pure Charge&Go Nx

¥110,000\*1 (充電器を除く)

充電 約21時間

CROS Pure 312 Nx


¥99,000

312 約110時間

CROS Pure

¥99,000

312 約110時間

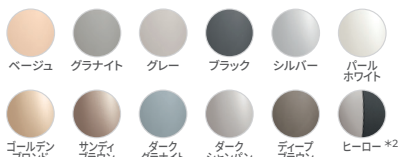

# RIC型・耳かけ型 カラーバリエーション

※ボタン等のカラーや形状は機種により異なります

## Signia AX

	ベージュ	ブラック	パール ホワイト	サンディ ブラウン	ダーク シャンパン	ディープ ブラウン	ローズ ゴールド	シルバー ヒーロー	グラファイト	ファイン ゴールド
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go AX										

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

## Signia Xperience

	ブラック/シルバー	コスミックブルー/ローズゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック	ホワイト
スタイレット Styletto X	 7X.5X.3Xのみ	 7X.5X.3Xのみ	 7X.5X.3Xのみ		

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	パール ホワイト	サンディ ブラウン	ダーク シャンパン	ディープ ブラウン	ローズ ゴールド	シルバー ヒーロー
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go X										
ピュア Pure 312X										

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	サンディ ブラウン	シルバーヒーロー
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go X						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go P X						
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go SP X						

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

※ボタン等のカラーや形状は機種により異なります

## Signia Nx

	ブラック/シルバー	コスミックブルー/ローズゴールド	スノーホワイト/ローズゴールド	ブラック	ホワイト
スタイルット コネクト Styletto Connect				—	—
スタイルット エssenシャル Styletto Essential	—	—	—		
2022年6月販売終了予定					

Stylettoは購入後のカラー変更はできません。

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	シルバー	パール ホワイト	ゴールデン ブロード	サンディ ブラウン	ダーク グラナイト	ダーク シャンパン	ディープ ブラウン	ヒーロー <sup>*1</sup>
ピュアチャージ&ゴー Pure Charge&Go Nx												
モーションチャージ&ゴー Motion Charge&Go Nx						—	—		—	—	—	
ピュア Pure 312 Nx ピュア Pure 13 Nx [T] ピュア Pure 10 Nx モーション Motion 13 Nx												—
モーション Motion 13P Nx												

ご購入後のカラー変更が¥9,000(非課税)で可能です。

\*1 Charge&Go2器種のヒーローカラーはダークシャンパンとブラックの2トーンカラー。Motion 13Pのヒーローカラーはサンディブラウンとブラックの2トーンカラー

\*2 カラーによっては、シリアル番号とクラスが本体に刻印がなく調整ソフトで読み取りとなります

## primax<sup>★</sup>

	ベージュ	グラナイト	グレー	ブラック	ダークグラナイト	ディープブラウン
モーション Motion SP						

Motion SPは購入後のカラー変更はできません。

# 機能一覧

	形式		性能				
			最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧レベル (dB)		誘導コイル感度 (dB)
	シリーズ	タイプ	HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-MASL (±6dB以内)
耳 か け 型	Pure AX	Pure Charge&Go AX(S/M/P/HP)	35 / 51 / 61 / 69	46 / 60 / 65 / 75	103 / 115 / 120 / 124	110 / 119 / 122 / 130	—
	Styletto X(S/M/P)		37 / 50 / 63	45 / 60 / 70	101 / 113 / 119	108 / 119 / 124	—
	Pure X	Pure Charge&Go X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 312 X(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101 / 113 / 119 / 123	108 / 119 / 124 / 130	—
	Motion X	Motion Charge&Go X	53(50)*1	60(60)*1	125(116)*1	133(125)*1	—
		Motion Charge&Go P X	71(56)*1	77(66)*1	130(117)*1	135(130)*1	100(85)*1
		Motion Charge&Go SP X	74	82	133	140	104
	Styletto Nx	Styletto Connect	50	60	113	119	—
		Styletto Essential	50	60	113	119	—
	Pure Nx	Pure Charge&Go Nx(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 10 Nx(S/M/P/HP)	37 / 44 / 51 / 58	44 / 55 / 60 / 65	102/107/112/115	108 / 113 / 118 / 123	—
		Pure 312 Nx(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	—
		Pure 13 Nx[T](S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	101/113/119/123	108 / 119 / 124 / 130	67 / 81 / 94 / 99
	Motion Nx	Motion Charge&Go Nx	55(48)*1	63(56)*1	128(117)*1	134(126)*1	—
		Motion 13 Nx	55(48)*1	63(56)*1	128(117)*1	134(126)*1	86(79)*1
		Motion 13P Nx	70(55)*1	77(65)*1	129(118)*1	135(130)*1	99(85)*1
	Motion px	Motion SP px	72	82	130	140	100
	Intuis3	Intuis3 RIC(S/M/P/HP)	37 / 50 / 63 / 68	45 / 60 / 70 / 75	102 / 114 / 120 / 124	108 / 119 / 124 / 130	68 / 80 / 91 / 99
		Intuis3 S	42(41)*1	55(45)*1	121(113)*1	124(124)*1	—
		Intuis3 M	53(46)*1	60(53)*1	126(116)*1	130(125)*1	82(74)*1
		Intuis3 P	64	70	127	134	93
		Intuis3 SP	72	80	133	140	102
	Prompt	Prompt S	42(41)*1	55(45)*1	121(113)*1	124(124)*1	—
Prompt P		64	70	127	134	93	
Fun	Fun P	64	70	126	132	—	
	Fun SP	72	79	133	140	—	

\*1 ( )はLifeチューブ/Thinチューブでの数値です

\*2 右記の略名を記載しています。本→補聴器本体にボリューム付き / SC→Smart Connect / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia appでボリューム調節可能

\*3 電池寿命は使用状況によって変わります



※このデータはJIS C 5512:2015(2cmカブラで測定)で表示しています  
 ※仕様は予告なく変更される場合があります ※数値は代表的な仕様によるものです

リモコン・アプリ <sup>*2</sup>	適応聴力(平均dBまで)	使用電池	電池寿命(連続使用)(h) <sup>*3</sup>
本、mP、app	60/75/90/100	充電	フル充電約28
mP、app	60/75/90	充電	フル充電約19
本、mP、app	60/75/90/100	充電	フル充電約23
本、mP、app	60/75/90/100	312	約80~90
本、mP、app	70(チューブ)90(フック)	充電	フル充電約24
本、mP、app	80(チューブ)100(フック)	充電	フル充電約30
本、mP、app	110	充電	フル充電約61
mP、app	75	充電	フル充電約19
mP、app	75	充電	フル充電約19
本、mP、app	60/75/90/100	充電	フル充電約21
mP、app	60/70/80/90	10A	約70~75
本、mP、app	60/75/90/100	312	約105~120
本、mP、app	60/75/90/100	13	約175~200
本、mP、app	70(チューブ)90(フック)	充電	フル充電約21
本、mP、app	70(チューブ)90(フック)	13	約190
本、mP、app	80(チューブ)100(フック)	13	約130
本、SC、SR、mP、app	110	675	約300
本、mP、app	60/75/90/100	312	約140~175
mP、app	50(チューブ)65(フック)	312	約175
本、mP、app	65(チューブ)85(フック)	13	約260
本、mP、app	100	13	約190
本、mP、app	110	675	約260
mP、app	50(チューブ)65(フック)	312	約175
本、mP、app	100	13	約190
本	90	13	約220
本	110	675	約285

# オーダーメイド耳あな型補聴器の選び方

※Silk Xはカラーを選ぶことはできません。オプション刻印などは非対応



**シェルカラーを選ぶ**

カラーバリエーション

Signia AX  
ブラック

Signia AX 以外  
スケルトンレッド スケルトンブルー パープル ベージュ  
ゴールド グリーン マゼンタ ブラック

**フェイスプレートを選ぶ**

Insio Charge&Go AXはフェイスプレートとシェルが同色になります

ベージュ モカ  
ブラック

※IICは左がスケルトンブルー、右がスケルトンレッドとなります ※一部の製品のみ、フェイスプレートを選択できます

Signia Nxシリーズ	ベージュ	モカ	ブラック
	IIC	—	—
CIC	—	●	—
COOL	●	—	●
ITC	●	—	—
ITC TWIN	●	—	—
ITE TWIN	●	—	—

primaxシリーズ	ベージュ	モカ	ブラック
	CIC	—	●
CIC 312	●	—	—
MC	—	●	—
MC 312	●	—	—
COOL	●	—	●
COOL13	●	—	—
ITC/ITC TWIN	●	—	—
ITE/ITE TWIN	●	—	—

\* 2px、1pxは選択不可(モカ)

## 性能一覧 耳あな型 Insio Charge&Go AX、Silk X、Insio Nx、Insio primax、Intuis3 (各項目の数値は、斜体:ノーマルタイプ)

形式	性能								
	シリーズ	タイプ	マイク	最大音響利得 (dB)		90dB入力最大出力音圧 レベル (dB)		リモコン・アプリ <sup>*1</sup>	誘導コイル感度 (dB) HFA-MASL (±6dB以内)
				HFA-FOG (±5dB以内)	最大値 (+3dB以下)	HFA-OSPL90 (±4dB以内)	最大値 (+3dB以下)		
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC	ツイン		44 / 60	55 / 65	109 / 119	118 / 124	mP、app	—
			ワイヤレス充電ITE	47 / 60	55 / 65	109 / 120	118 / 124	mP、app	—
Silk X	既製耳あな型	シングル		45	50	108	114	mP、app	—
Insio Nx	IIC	シングル		46	50	109	113	mP、app	—
			CIC	48 / 59	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP、app	—
			COOL	47	55	111	118	mP、app	79
			ITC	47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP、app	—
	ITC TWIN	ツイン		47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP、app	79 / 91
			ITC TWIN BT有り	47 / 60	55 / 65	111 / 119	118 / 124	mP、app	—
			ITE TWIN	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP、app	79 / 90
			ITE TWIN BT有り	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP、app	—
Insio px	CIC	シングル		45	50	109	113	mP、app	—
			CIC 312	44	50	108	113	mP、app	—
			MC	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	SC、SR、mP、app	—
			MC 312	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC、SR、mP、app	—
			COOL	47	55	112	118	SC、SR、mP、app	77
			COOL 13	47	55	112	118	SC、SR、mP、app	77
	ITC	ツイン		47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC、SR、mP、app	—
			ITE	48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	SC、SR、mP、app	78 / 89
			ITC TWIN	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	SC、SR、mP、app	—
			ITE TWIN	48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	SC、SR、mP、app	78 / 89
Intuis3	シングル		45	50	109	113	mP、app	—	
		CIC 312	45	50	109	113	mP、app	—	
		MC	48 / 60	55 / 65	112 / 119	118 / 124	mP、app	—	
		MC 312	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	mP、app	—	
		ITC	47 / 60	55 / 65	112 / 120	118 / 124	mP、app	—	
		ITE	48 / 60	55 / 65	113 / 120	118 / 124	mP、app	78 / 89	

\*1 右記の略名を記載しています。SC→Smart Connect / SR→Smart Remote / mP→miniPocket / app→Signia app

\*2 最大プログラム数: 本体のプッシュボタンやリモコンアプリを利用した時に得られる最大プログラム数です

\*3 電池寿命は使用状況によって変わります

\*4 Silk 2X、1X、Insio 2Nx、1Nx、2px、1pxのプログラム数は4です

※保証期間はカタログ48ページをご覧ください

※このデータはJIS C 5512:2015 (2cmカブラで測定) で表示しています

※仕様は予告なく変更される場合があります

Intuis3シリーズ			
	ページ	モカ	ブラック
CIC	-		-
CIC312		-	-
MC	-		-
MC312		-	-
ITC		-	-
ITE		-	-

### オプションを選ぶ

- 環境スイッチ
- ボリュームコントロール
- オートフォン
- テレコイル
- ノンワイヤレス など

### 名入れ対応 名前刻印

全てのオーダーメイド補聴器に無料でお入れできます。



※カタカナで最大6文字まで  
※本体購入後の刻印は、修理扱い(¥8,800税込)

### アクアプロテクト

汗・水に強いIP57対応

オプション/ ¥6,000 (非課税/1台につき)  
対象機種: 7px・5px・3pxシリーズ (CIC, CIC 312除く)



### シェルグリップ

シェルの表面に加工を施すことで耳の中でずれにくくなります。



オプション/ 無料  
対象機種: 耳あな型 (COOL, COOL 13除く)

### カナルロック

耳から抜けないようにするためのストッパー。目立ちにくい透明。



オプション/ 無料  
対象機種: 耳あな型 (IIC, COOL, COOL 13, ITE, Insio Charge&Go AX除く)

のみ)

通常文字: パワータイプ、赤字: ハイパワータイプの値です)

## オプション一覧 (無料)

シリーズ	タイプ	環境スイッチ (メモリー)	ボリュームコントロール <sup>*A</sup>	テレコイル <sup>*A</sup>	オートフォン <sup>*A</sup>	ノンワイヤレス	
Insio Charge&Go AX	ワイヤレス充電ITC/ITE	標準装備	-	-	-	-	
	Insio Nx	IIC	-	-	-	-	-
		CIC	標準装備 <sup>*B</sup>	-	-	-	選択可
		COOL	選択可 <sup>*C</sup>	選択可 <sup>*C-1</sup>	選択可 <sup>*F</sup>	-	選択可
		ITC	選択可	選択可 <sup>*I</sup>	-	-	選択可
		ITC TWIN	選択可	選択可 <sup>*I</sup>	-	-	選択可
		ITC TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
		ITE TWIN	選択可	選択可 <sup>*I</sup>	選択可 <sup>*F</sup>	-	選択可
		ITE TWIN BT有り	標準装備	-	-	-	-
		Insio px	CIC / CIC312	-	-	-	-
MC / MC312			選択可	-	-	-	選択可
ITC / ITC TWIN	選択可		選択可 <sup>*D</sup>	-	-	選択可	
ITE / ITE TWIN	選択可		選択可 <sup>*D</sup>	選択可 <sup>*F</sup>	選択可 <sup>*G-H</sup>	選択可	
COOL / COOL13	選択可 <sup>*C</sup>		選択可 <sup>*C-D</sup>	-	選択可 <sup>*G-H</sup>	選択可	
Intuis3	CIC / CIC312		-	-	-	-	標準装備
	MC / MC312	標準装備	-	-	-	標準装備	
	ITC	選択可	選択可 <sup>*E</sup>	-	-	標準装備	
	ITE	選択可	選択可 <sup>*E</sup>	選択可 <sup>*F</sup>	-	標準装備	

\*A テレコイルとボリュームコントロールは、オートフォンとの同時取り付けはできません

\*B バッテリーロッカーが環境スイッチを兼ねます

\*C 補聴器1台に、環境スイッチとボリュームコントロールの同時取り付けはできません。両耳装用の場合、左右別々に付けることは可能です。

\*D ワイヤレスはデジタルボリューム(エンドレス)、ノンワイヤレスはアナログボリューム(ストップエンド)になります

\*E アナログボリューム(ストップエンド)になります

\*F リモコンまたはアプリ無しでテレコイルを使用する場合は、同時に環境スイッチ(メモリー)も必要です

\*G ツインフォン機能を利用する場合、両耳にオートフォン、ワイヤレスが必要で

\*H 2px、1px は、取り付けできません

\*I ワイヤレス / ノンワイヤレスともにデジタルボリューム(エンドレス)のみになります

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ・  
アクセサリなど

カラーバリエーション  
性能一覧

# 機能比較表

	機能		機能説明	Signia AX シリーズ			Signia Xperience		
				7AX	5AX	3AX	7X	5X	3X
聞こえ	ダブルプロセッサー		言葉と環境音を別々に処理、楽に聞き取れる	●	●	●	—	—	—
	ライブサウンド		音をリアルに再現し、生音のような自然な聞こえ	●	●	●	—	—	—
	Xセンサー	超広角センサー	周囲360°の音や物音を常に分析	●	●	●	●	●	●
		モーションセンサー	モーションセンサーがユーザーの状態(運動・静止等)を判別する	●	●	●	●※18	●※18	●※18
	OWN VOICE PROCESSING (画)		「自分の声」と「周囲の声」を判別し「自分の声」を快適にする	●※24	●※24	●※24	●※18	●※18	●※18
	全自動ダブルピント調整 (画)		相手の声がより聞きやすい	●	●	●	●※23	●※23	●※23
	マルチチャンネル方式		聞こえの帯域を複数に分割、より細かい調整が可能	48ch	32ch	24ch	48ch※19	32ch	24ch
	自動音量調整		音の大きさに応じ、自動で音量を心地よい大きさに調整	●	●	●	●	●	●
スピーチ&ノイズマネージメント		言葉を聞き取りやすくするように、周囲環境に応じて設定が自動で変化	●	●	●	●	●	●	
雑音抑制	サウンドスムージング		突発的に響くような衝撃音を抑制	●	●	●	●	●	
	eウィンドスクリーン		風雑音を抑制	●両	●	●	●両	●	
	ハウリングストッパー		不快なピーピー音(ハウリング)を抑制	●両	●両	●両	●	●	
指向性	ビーム指向性 (画)		両耳装着で正面の音だけフォーカス	●	●	●	●※18	●※18	●※18
	ワンマイク指向性 (画)		両耳装着で正面の音にフォーカス	—	—	—	●※14	●※14	●※14
	スピーチフォーカス 360° (画)		前後左右、声の方向に自動的にフォーカス	●	—	—	●※8	—	—
	スピーチフォーカス		前後の声の方向に自動的にフォーカス	●	●	—	●※1	●※1	—
	トゥルーイヤール		耳介効果で裸耳に近い臨場感	●	●	●	●	●	●
	マニュアル指向性 (画)		両耳使用時に指向性の向きを手動調節(要Smart Connect、またはアプリ)	●	●※12	—	●※18	●※12※18	—
	パワーエンハンス		後ろの雑音を抑えて静かに	●	●	—	●※17	●※17	—
	アダプティブ		雑音の方向以外の周囲360°を聞く	●	●	●	●※18※19	●※18	●※18
	固定指向性		後ろの雑音を抑えて静かに	—	—	—	—	—	—
高機能	e2eワイヤレス (画)		両耳が常に通信しあい、聞きやすくする	●4.0	●4.0	●4.0	●	●	●
	エコーシールド		ワンワン響く反響音をしっかり抑える	●	●	—	●	—	—
	ハイレゾ音楽		カラオケや、コンサートや、CD・レコードが、より聞きやすい	3モード	3モード	1モード	3モード	3モード	1モード
	12kHz広帯域		12kHzまでの高音域を出力、より豊かな音色を実現	●	—	—	●※20	—	—
	周波数圧縮		高い音を圧縮。聴野に入れて聞き取りやすくする	●	●	●	●	●	●
	プログラム数		利用できる最大メモリー数(標準音、テレビ用等)	6	6	6	6	6	6
利便性	ツインフォン (画)		受話器を補聴器に近づけると両耳で電話を聞くことができる	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
	オートフォン™		受話器を補聴器に近づけると自動で電話用の聞こえに切り替え	—	—	—	—	—	—
	テレコイル		ループシステムに対応し、マイクを介さずに直接音声を受信	—	—	—	●※22	●※22	●※22
オーディオインプット		FM補聴システムなどで利用可能 ※ 別売のオーディオシューが必要	—	—	—	—	—	—	
リモコン・通信機器	ダイレクトストリーミング(iPhone)		iPhoneの音声が入直接補聴器から聞こえる	●	●	●	●※18	●※18	●※18
	ダイレクトストリーミング(Android)		Androidスマートフォンの音声が入直接補聴器から聞こえる※25	●	●	●	—	—	—
	Smart Connect		小型で簡単操作。TVや携帯とつながる(2台設定可)、FM接続可能	—	—	—	—	—	—
	Smart Remote		大きなボタンと液晶表示で使いやすい	—	—	—	—	—	—
	miniPocket		超小型の簡単リモコン	●	●	●	●	●	●
	StreamLine TV		TVの音をダイレクトに補聴器へ届ける	●	●	●	●※18	●※18	●※18
	StreamLine Mic		スマートフォン(アンドロイド)通話に。遠距離マイクとしても使えます	●	●	●	●※18	●※18	●※18
CROS送信器		CROS送信器のマイクで音をとらえ、逆側の補聴器に音声を届ける	●	●	●	●※4※18	●※4※18	●※4※18	

● AXチップでより強力に機能が働く ● 強力に機能が働く ○ 機能搭載 (画) : 両耳装着時の専用機能 画 : TWINマイク商品は両耳装着でより強力に

※1 シングルマイクの器種には非搭載 ※2 ノンワイヤレス(小型)オプションとCICには搭載できません ※3 AX、X、Nxシリーズは手動切替のみ、primaxシリーズは同梱オートフォンマグネットを使用すると自動で切り替わります ※4 Stylettoシリーズは非対応 ※5 PureとMotionは標準、COOL、ITEはオプションで取付可能 ※6 耳かけ型M、P、SPは標準、ITEはオプションで取付可能 ※7 耳あな型はITC TWIN、ITE TWINのBluetooth有りのみ対応 ※8 TWINマイク商品を両耳使用した場合のみ ※9 Motion SPを除く ※10 Pure 13 Nx[T]、Motion 13 Nx、Motion 13P Nxが対象。バッテリーロッカーを交換した時のみ使用可。COOL、ITE/ITE TWINは取付可能 ※11 耳かけ型(Sを除く)に搭載 ※12 5AX、5X、5Nx、5pxは前後にフォーカス



※耳あな型の機能は56ページの【オプション一覧】も併せてご確認ください

シリーズ		Signia Nx シリーズ					primax* シリーズ					Intuis3	Prompt	Fun
2X	1X	7Nx	5Nx	3Nx	2Nx	1Nx	7px	5px	3px	2px	1px			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	● ※8 ※15 ※16	● ※8 ※15 ※16	● ※8 ※15 ※16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
○ ※13 ※18	○ ※13 ※18	● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	○ ※13	○ ※13	● ※8	● ※8	● ※8	○ ※13	○ ※13	—	—	—
16ch	16ch	48ch	32ch	24ch	16ch	16ch	48ch ※21	32ch ※21	24ch	16ch	16ch	12ch	8ch	6ch
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
●	—	● 両	●	●	●	●	● 両	●	●	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
—	—	● ※8 ※15	● ※8 ※15	● ※8 ※15	—	—	● ※8	● ※8	● ※8	—	—	—	—	—
—	—	● ※14	● ※14	● ※14	—	—	● ※14	—	—	—	—	—	—	—
—	—	● ※8 ※15	—	—	—	—	● ※8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	● ※1	● ※1	—	—	—	● ※1	● ※1	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
—	—	● ※8 ※15	● ※8 ※12 ※15	—	—	—	● ※8	● ※8 ※12	—	—	—	—	—	—
—	—	● ※1 ※17	● ※1 ※17	—	—	—	● ※1 ※17	● ※1	—	—	—	—	—	—
● ※18	● ※18	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	—	—	—
アダプティブ6バンド	アダプティブ6バンド	アダプティブ48バンド	アダプティブ32バンド	アダプティブ24バンド	アダプティブ16バンド	アダプティブ16バンド	アダプティブ48バンド	アダプティブ32バンド	アダプティブ24バンド	アダプティブ16バンド	アダプティブ16バンド	● ※1 自動	●	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	● ※15	● ※15	● ※15	●	●	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
1モード	—	3モード	1モード	1モード	—	—	3モード	1モード	1モード	—	—	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—	● ※9	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
4	4	6	6	6	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4
—	—	● ※3 ※15	● ※3 ※15	● ※3 ※15	—	—	● ※3 ※5	● ※3 ※5	● ※3 ※5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	● ※5	● ※5	● ※5	—	—	—	—	—
● ※22	● ※22	● ※10	● ※10	● ※10	● ※10	● ※10	● ※5	● ※5	● ※5	● ※5	● ※5	● ※6	—	—
—	—	—	—	—	—	—	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	● ※11	—
● ※18	● ※18	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※4 ※7	● ※4 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
● ※18	● ※18	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※4 ※7	● ※4 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—
● ※18	● ※18	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※7 ※15	● ※4 ※7	● ※4 ※7	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	● ※4 ※7 ※15	● ※4 ※7 ※15	● ※4 ※7 ※15	—	—	● ※2	● ※2	● ※2	—	—	—	—	—

※13 ○は自動ビント調整 ※14 シングルマイクの耳あな型を両耳装用にした場合のみ(primaxシリーズのCIC除く) ※15 Pure 10 Nxを除く ※16 Nxの耳あな型を除く ※17 Silk X、IIC、CIC、COOL、ITC(7、5Nx)とMC/MC312(7px)は両耳装用で対応 ※18 Silk Xは非対応 ※19 Motion Charge&Go SP Xのクラスは34ch ※20 Motion Charge&Go SP Xは非対応 ※21 Motion SPの7/5クラスは24ch ※22 Motion Charge&Go P XとMotion Charge&Go SP X対応 ※23 Silk Xは自動ビント調整 ※24 Insio Charge&Go AXは非対応 ※25 Androidスマートフォンは、Android OSバージョン10以上かつASHA(Audio Streaming for Hearing Aids)機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声を送ることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングをするには別途StreamLine Micが必要

補聴器を選ぶ前に

Signia AX

Signia Xperience

Signia Nx

その他補聴器  
ラインナップ

アプリ、  
アクセサリなど

性能一覧  
カラーバリエーション

# おすすめラインナップ性能表


シグニア エーエックス  
Signia AX

シグニア エクスぺリエンス  
Signia Xperience

ダブルプロセッサー、ライブサウンドは Signia AX ならではの機能

	安心保証	会話	テレビ・スマホ	屋内	屋外	グループ活動・買い物	楽に聞き取れる	生音のよう聞こえ	おしゃべり	騒がしい場所での会話	居酒屋・レストラン	職場・車イス	ロビー・ホール	車・電車	超高音質
	もしもの時も安心	きめ細かい聞こえ	無線で直接補聴器へ	衝撃音を抑制	風雑音を抑制	環境と動きを認識していつでもどこでも最適な音を届ける	言葉と環境音を別々に処理する	さらに進化した音声技術でより明瞭で自然な聞こえ	自声のこもりを解消	前方の相手の声にフォーカス	後方の雑音を抑える	前後の声の方向にフォーカス	響く音をしっかりと抑える	前後左右の方向にフォーカス	12kHz帯域まで対応し超高音質実現
AX	*1	*2	*3			Xセンサー (環境・動き認識) 超広角センサー	ダブルプロセッサー	ライブサウンド	*5*6	*6	*7	*6	*8	*6	*9
X	保証	チャンネル	Bluetooth	突発音抑制	風雑音抑制				OVP (両耳)	ビーム指向性 (両耳)	パワーエンハンス	スピーチフォーカス	反響音抑制	スピーチフォーカス360° (両耳)	12kHz帯域対応
7 プレミアム	3年修理保証 2年初失保証	48ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5 アドバンス	3年修理保証 2年初失保証	32ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
3 スタンダード	2年修理保証 1年初失保証 3AX, 3Xのみ対応	24ch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
2 ベーシック	2年修理保証	16ch	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 バリュー	2年修理保証	16ch	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 詳しくは60ページに記載 \*2 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは34ch \*3 Bluetooth搭載機種のみ対応。TV視聴は別途StreamLine TVが必要。iPhoneは直接音声をストリーミングすることが可能。Androidスマートフォンは、Android OS バージョン10以上かつASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) 機能対応スマートフォンのみ、AXシリーズの補聴器に直接音声をストリーミングすることが可能(ただし、メーカーや機種によっては利用できない場合があります)。それ以外の場合Androidスマートフォンの音声ストリーミングをするには別途StreamLine Micが必要 \*4 ライブサウンドはSignia AXで進化した機能の総称。詳しくは17ページをご確認ください \*5 Insio Charge&Go AXは非対応 \*6 Silk Xは非対応 \*7 Silk Xは両耳装着で対応 \*8 Signia Xperienceの5クラスは非対応 \*9 Motion Charge&Go SP Xの7クラスは非対応

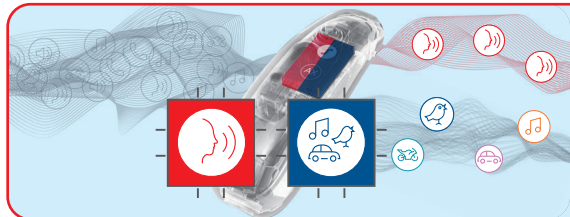

## Signia AX

世界初※、2つの頭脳で言葉と環境音を別々に処理するダブルプロセッサー補聴器

※ 2021年4月、WSオーディオロジーグループ調べ

# シグニア補聴器の安心保証とスマートリペアプラン



## ① 保証期間内は無料で修理 補聴器本体に自然故障\*が生じた場合

- \*取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合
- \*紛失および過失による故障(シェル破損や水没など)は保証対象外です。修理可能な場合はスマートリペアの価格で対応いたします(全損は対象外)
- \*電池やイヤチップなどのアクセサリ類は、保証およびスマートリペアの対象外です

## ② さらに修理保証期間が過ぎた後も修理は定額のスマートリペア

- \*「スマートリペアプラン」は入会金などの費用が一切かからず、修理は定額
- \*耳あな型のシェル再作、修正は別途費用がかかります
- \*故障部位および購入年数によって各種規定があります

## ③ 1年以内の無料再作(耳あな型オーダーメイド補聴器)

耳あな型オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、お買い上げの日から1年以内の再作を無料でいたします(その他、詳しい保証規定は添付の保証書によります)

### ● 修理保証


	1年目	2年目	3年目	4年目以降～
Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	3年無料修理保証			スマートリペア期間 定額修理プラン
上記以外の シグニア補聴器	2年無料修理保証		スマートリペア期間 定額修理プラン	

### ● 紛失保証


	1年目	2年目
Signia 7AX/5AX Signia 7X/5X Signia 7Nx/5Nx	2年保証 1回に限り無料	
Signia 3AX Signia 3X 7px/5px	1年保証 1回に限り無料	

## 両耳装用のすすめ

- 片目だけで見ると疲れやすいもの。片耳だけの補聴器も同様です。

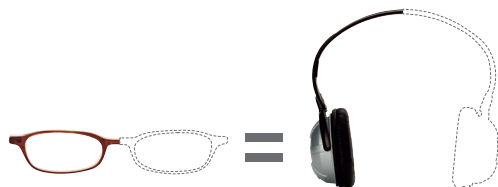

- 両耳装用は満足度が高いという研究結果があります。

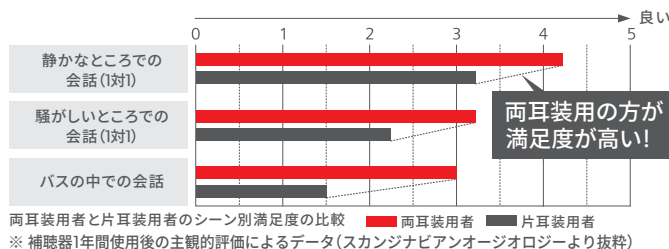

## 両耳に補聴器をつけるとよいとされる3つの理由

- 音の方向がわかりやすい
- 騒音下での聞きとりが良い
- 疲れにくいから長く使える



## シバントス株式会社

〒242-0007 神奈川県大和市中央林間7-10-1 三機大和ビル 6F

### ■ 個人のお客様専用窓口

「シグニア補聴器」お客様コールセンター

営業時間 9:00-17:00 (土・日・祝日 定休日)

Tel:0800-888-0303

Tel:046-289-0303 Fax:046-407-1133

### ■ 販売店様専用問合せ窓口

カスタマーサービス

営業時間 9:00-17:00 (日・祝日 定休日)

Tel:0800-222-4133 Fax:0800-888-4133

Tel:046-409-4133 Fax:046-407-1133

販促物注文専用Fax:050-3730-5795

※本フリーコールはIP電話からはつながりません。  
その場合は通常の電話番号までお問い合わせください



個人のお客様向けサイト  
[www.signia.net/ja-jp](http://www.signia.net/ja-jp)



SNS公式アカウント、メールマガジンの登録はこちら  
[www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/socialmedia-newsletter/](http://www.signia.net/ja-jp/local/ja-jp/socialmedia-newsletter/)



シグニア補聴器のご相談・ご用命は当店へ

聞こえの詳細な検査は、耳鼻科専門医を受診してください。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、着用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。このカタログと実際の製品の色・形状は、印刷等の関係で異なる場合があります。

カタログに表示されている価格は希望小売価格です。

医療機器製造販売業許可番号 14B2X00018 このカタログの内容は2022年3月時点のものです。価格や仕様は予告なく変更されることがあります。22.03.JP.17001313

AndroidとGoogle PlayはGoogle LLCの商標です。Apple App StoreはApple Inc.の商標です。Qi(チー)はWireless Power Consortiumの登録商標です。Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有しており、Sivantosによるこれらのマークの使用は、ライセンス許諾されています。その他の商標・商品名に関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。



6月6日は補聴器の日